

# AiLink

osobní váha  
ETA878190000



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI AILINK



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII AILINK



USER'S MANUAL FOR AILINK APPLICATION



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AILINK ALKALMAZÁSHOZ



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI AILINK



BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR APPLIKATION AILINK



**Vážení zákazníci,**  
děkujeme za nákup a zájem o naši osobní váhu. Spolu s tímto návodem používejte i návod k použití k samotné váze, který je jeho nedílnou součástí. Tento návod se zaměřuje primárně pouze na samotnou aplikaci a její možnosti, nikoliv na používání váhy.

Uvedené ilustrace a překlady textů či aktivačních prvků v aplikaci se mohou ve skutečnosti mírně odlišovat od zobrazení a popisu v tomto návodu. Proto se nelekněte, pokud vaše aplikace 100% neodpovídá ilustracím v návodu. Uvedené ilustrace se také mohou týkat různých měření, proto se nelekněte, když uvidíte nesoulad mezi vyjádřením výsledků.

<b>OBSAH</b>	
<b>ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY APLIKACE</b>	<b>3</b>
<b>ZÁKLADNÍ STRUKTURA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY VÁHY</b>	<b>4</b>
<b>UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI AILINK</b>	<b>5</b>
<b>1. INSTALACE APLIKACE</b>	<b>5</b>
<b>2. REGISTRACE ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ</b>	<b>5</b>
<b>3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	<b>5</b>
<b>4. ZÁKLADNÍ RADY A TIPY K POUŽITÍ</b>	<b>6</b>
<b>5. VÁŽENÍ A ANALÝZA</b>	<b>7</b>
<b>6. ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ</b>	<b>7</b>
<b>7. SDÍLENÍ VLASTNÍCH VÝSLEDKŮ</b>	<b>8</b>
<b>8. KAMARÁD - SDÍLENÍ MĚŘENÍ</b>	<b>9</b>
<b>9A. NASTAVENÍ - OBECNÁ část</b>	<b>9</b>
<b>9B. NASTAVENÍ - APLIKAČNÍ část</b>	<b>9</b>

**Vážení zákazníci,**  
ďakujeme za nákup a záujem o našu osobnú váhu. Spolu s týmto návodom používajte aj návod na použitie k samotnej váhe, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Tento návod sa zameriava primárne iba na samotnú aplikáciu a jej možnosti, nie na používanie váhy.

Uvedené ilustrácie a preklady textov či aktivačných prvkov v aplikácii sa môžu v skutočnosti mierne odlišovať od zobrazenia a popisu v tomto návodu. Preto sa neobávajte, ak vaša aplikácia 100% neodpovedá ilustráciám v návode. Uvedené ilustrácie sa tiež môžu týkať rôznych meraní, preto sa nezľaknite, keď uvidíte nesúlad medzi vyjadrením výsledkov.

<b>OBSAH</b>	
<b>ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNEJ DOMOVSKÉJ OBRAZOVKY APLIKÁCIE</b>	<b>10</b>
<b>ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA DOMOVSKÉJ OBRAZOVKY VÁHY</b>	<b>11</b>
<b>UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII AILINK</b>	<b>12</b>
<b>1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE</b>	<b>12</b>
<b>2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRIHLÁSENIE</b>	<b>12</b>
<b>3. PÁROVANIE ZARIADENÍ</b>	<b>12</b>
<b>4. ZÁKLADNÉ RADY A TIPY NA POUŽITIE</b>	<b>13</b>
<b>5. VÁŽENIE A ANALÝZA</b>	<b>14</b>
<b>6. ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV</b>	<b>14</b>
<b>7. ZDIEĽANIE VLASTNÝCH VÝSLEDKOV</b>	<b>15</b>
<b>8. KAMARÁT - ZDIEĽANIE MERANÍ</b>	<b>16</b>
<b>9A. NASTAVENIA - OBECNÁ časť</b>	<b>16</b>
<b>9B. NASTAVENIA - APLIKAČNÁ časť</b>	<b>16</b>

**Dear customers,**  
Thank you for your purchase and interest into our personal scale. Use this manual together with the maual for the scale. This manual is focused only on the application and its options. It is not focused on the usage of the scale.

Illustrations and translations of texts or of activating elements applied in the application may slightly differ from the illustrations and descriptions specified in this manual. Therefore, don't get scared if there are differences in your application compared with the illustrations in the manual. The illustrations provided may also cover different measurements, so don't be afraid if you see a discrepancy between the results.

<b>CONTENT</b>	
<b>BASIC STRUCTURE OF APP'S MAIN MENU</b>	<b>17</b>
<b>BASIC STRUCTURE OF HOME SCREEN</b>	<b>18</b>
<b>USER MANUAL FOR THE AILINK APP</b>	<b>19</b>
<b>1. APPLICATION INSTALLATION</b>	<b>19</b>
<b>2. ACCOUNT REGISTRATION AND LOGIN</b>	<b>19</b>
<b>3. CONNECTING THE DEVICE</b>	<b>19</b>
<b>4. BASIC ADVICE AND TIPS FOR USE</b>	<b>20</b>
<b>5. MEASUREMENT AND ANALYSIS</b>	<b>21</b>
<b>6. RESULT VIEW</b>	<b>21</b>
<b>7. RESULT SHARING</b>	<b>22</b>
<b>8. FRIEND – RESULT SHARING</b>	<b>23</b>
<b>9A. SETTINGS - GENERAL</b>	<b>23</b>
<b>9B. SETTINGS - APPLICATION</b>	<b>23</b>

**Tisztelt Vásárlóink!**  
Köszönjük, hogy személyi mérlegünket választotta! Kérjük, ezzel a használati utasítással együtt használja a mérleget! Ez a használati utasítás elsősorban az aplikációról szól és annak a lehetőségeiről, nem a mérleg használatáról.

Az alkalmazásban található szövegek vagy aktiváló elemek illusztrációi és fordításai némileg eltérhetnek a jelen kézikönyvben található illusztrációktól és leírásoktól. Ne ijedjen meg tehát, ha az Ön alkalmazása nem 100%-ban egyezik a kézikönyvben található ábrákkal.

<b>TARTALOM</b>	
<b>APLIKÁCIÓ KÉPERNYŐJÉNEK ALAP STRUKTÚRÁJA</b>	<b>24</b>
<b>APLIKÁCIÓ KÉPERNYŐJÉNEK ALAP STRUKTÚRÁJA</b>	<b>25</b>
<b>APLIKÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA</b>	<b>26</b>
<b>1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE</b>	<b>26</b>
<b>2. FIÓK REGISZTRÁCIÓJA ÉS BEJELENTKEZÉS</b>	<b>26</b>
<b>3. ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA</b>	<b>26</b>
<b>4. ALAP HASZNÁLATI TANÁCSOK ÉS TIPPEK</b>	<b>27</b>
<b>5. MÉRÉS ÉS ANALÍZIS</b>	<b>28</b>
<b>6. EREDMÉNYEK MEGJELENÉSE</b>	<b>28</b>
<b>7. SAJÁT EREDMÉNYEK MEGOSZTÁSA</b>	<b>29</b>
<b>8. BARÁT – MÉRÉSEK MEGOSZTÁSA</b>	<b>30</b>
<b>9A. BEÁLLÍTÁS - ÁLTALÁNOS rész</b>	<b>30</b>
<b>9B. BEÁLLÍTÁS – APLIKÁCIÓ rész</b>	<b>30</b>


**Szanowny Klienci,**  
dziękujemy za zakupienie i zainteresowanie naszą wagą osobową. Wraz z niniejszą instrukcją korzystajcie też z instrukcji obsługi samej wagi, która jest jej integralną częścią. Niniejsza instrukcja dotyczy przede wszystkim samej aplikacji i jej możliwości, nie używania wagi.

Podane ilustracje i tłumaczenia tekstów w aplikacji mogą się nieznacznie różnić od wyobrażeń i opisu w niniejszej instrukcji. Dlatego nie należy niepokoić się, jeżeli aplikacja w 100% nie odpowiada ilustracjom w instrukcji.

<b>SPIS TREŚCI</b>	
<b>PODSTAWOWA STRUKTURA GŁÓWNEGO EKРАНU APLIKACJI</b>	<b>31</b>
<b>PODSTAWOWA STRUKTURA EKРАНU GŁÓWNEGO WAGI</b>	<b>32</b>
<b>PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI AILINK</b>	<b>33</b>
<b>1. INSTALACJA APLIKACJI</b>	<b>33</b>
<b>2. REJESTRACJA KONTA I ZALOGOWANIE</b>	<b>33</b>
<b>3. PAROWANIE URZĄDZEŃ</b>	<b>33</b>
<b>4. PODSTAWOWE RADY DOTYCZŁCE UŻYWANIA</b>	<b>34</b>
<b>5. WAŻENIE I ANALIZA</b>	<b>35</b>
<b>6. ZWYŚWIETLANIE WYNIKÓW</b>	<b>35</b>
<b>7. WSPÓŁUŻYTKOWANIE WŁASNYCH WYNIKÓW</b>	<b>36</b>
<b>8. PRZYJACIEL - WSPÓŁUŻYTKOWANIE MIERZENIA</b>	<b>37</b>
<b>9A. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ OGÓLNA</b>	<b>37</b>
<b>9B. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ APLIKACYJNA</b>	<b>37</b>

**Sehr geehrte Kunden,**  
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Interesse an unserer Personenwaage. Bitte benutzen Sie neben dieser Anleitung auch die Bedienungsanleitung der Waage selbst, die Bestandteil dieser Anleitung ist. Dieses Handbuch konzentriert sich in erster Linie auf die App selbst und ihre Möglichkeiten, nicht auf die Verwendung der Personenwaage. Die Abbildungen und Übersetzungen der Texte oder Aktivierungselemente in der App können leicht von den Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen. Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn Ihre App nicht zu 100 % mit den Abbildungen im Handbuch übereinstimmt.


<b>INHALT</b>	
<b>GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBILDSCHIRMS DER APP</b>	<b>38</b>
<b>GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBILDSCHIRMS DER APP</b>	<b>39</b>
<b>AILINK BEDIENUNGSANLEITUNG</b>	<b>40</b>
<b>1. INSTALLATION DER APP</b>	<b>40</b>
<b>2. KONTOREGISTRIERUNG UND ANMELDUNG</b>	<b>40</b>
<b>3. GERÄTEKOPPLUNG</b>	<b>40</b>
<b>4. GRUNDLEGENDE HINWEISE UND TIPPS ZUR VERWENDUNG</b>	<b>41</b>
<b>5. WIEGEN UND ANALYSE</b>	<b>42</b>
<b>6. ERGEBNISSE ANZEIGEN</b>	<b>42</b>
<b>7. EIGENE ERGEBNISSE TEILEN</b>	<b>43</b>
<b>8. FREUNDE - MESSUNGEN TEILEN</b>	<b>44</b>
<b>9A. EINSTELLUNGEN - ALLGEMEINER Teil</b>	<b>44</b>
<b>9B. EINSTELLUNGEN - ANWENDUNGSTEIL</b>	<b>44</b>

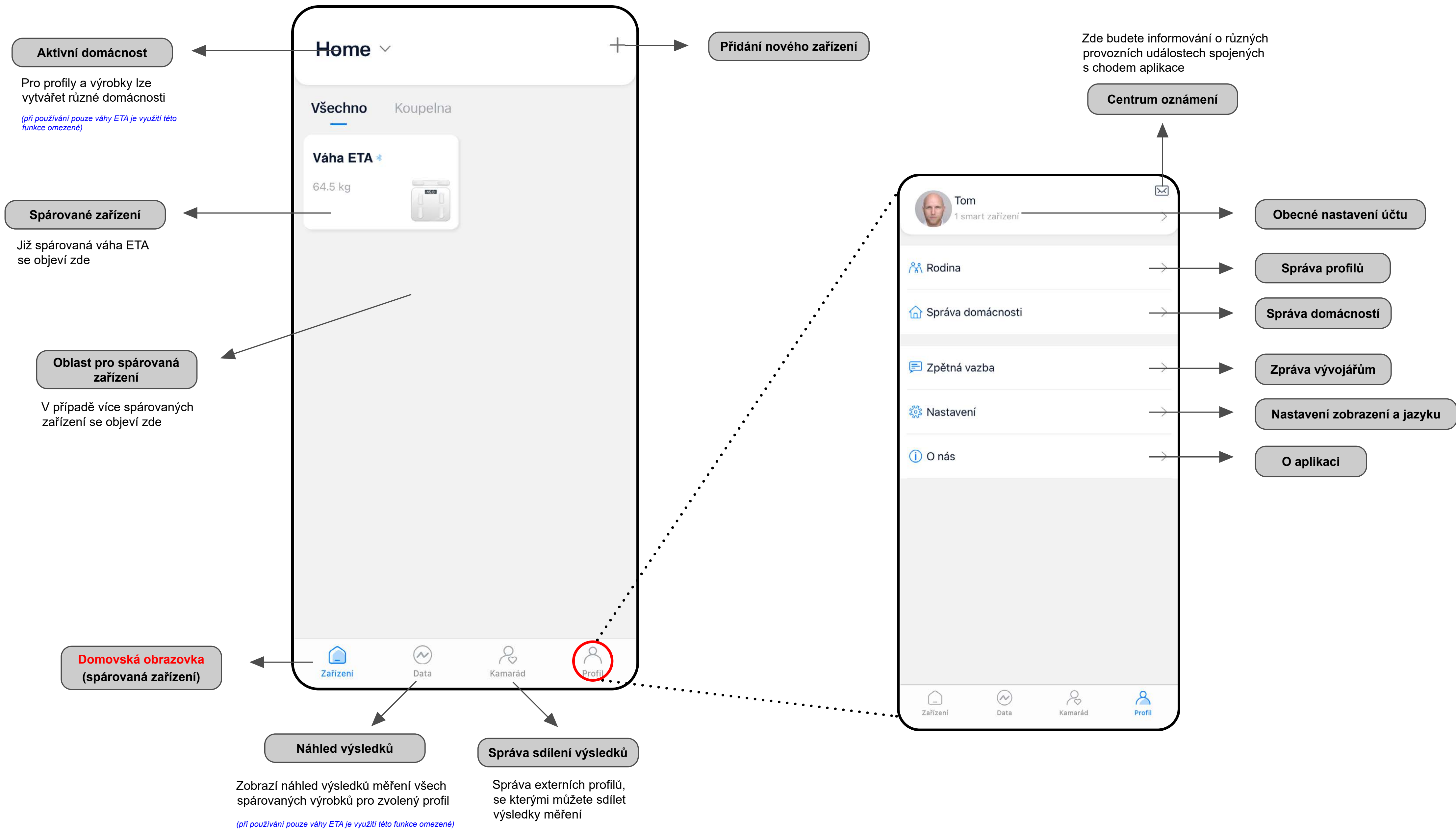





Přechod do části aplikace určené pro váhu ETA

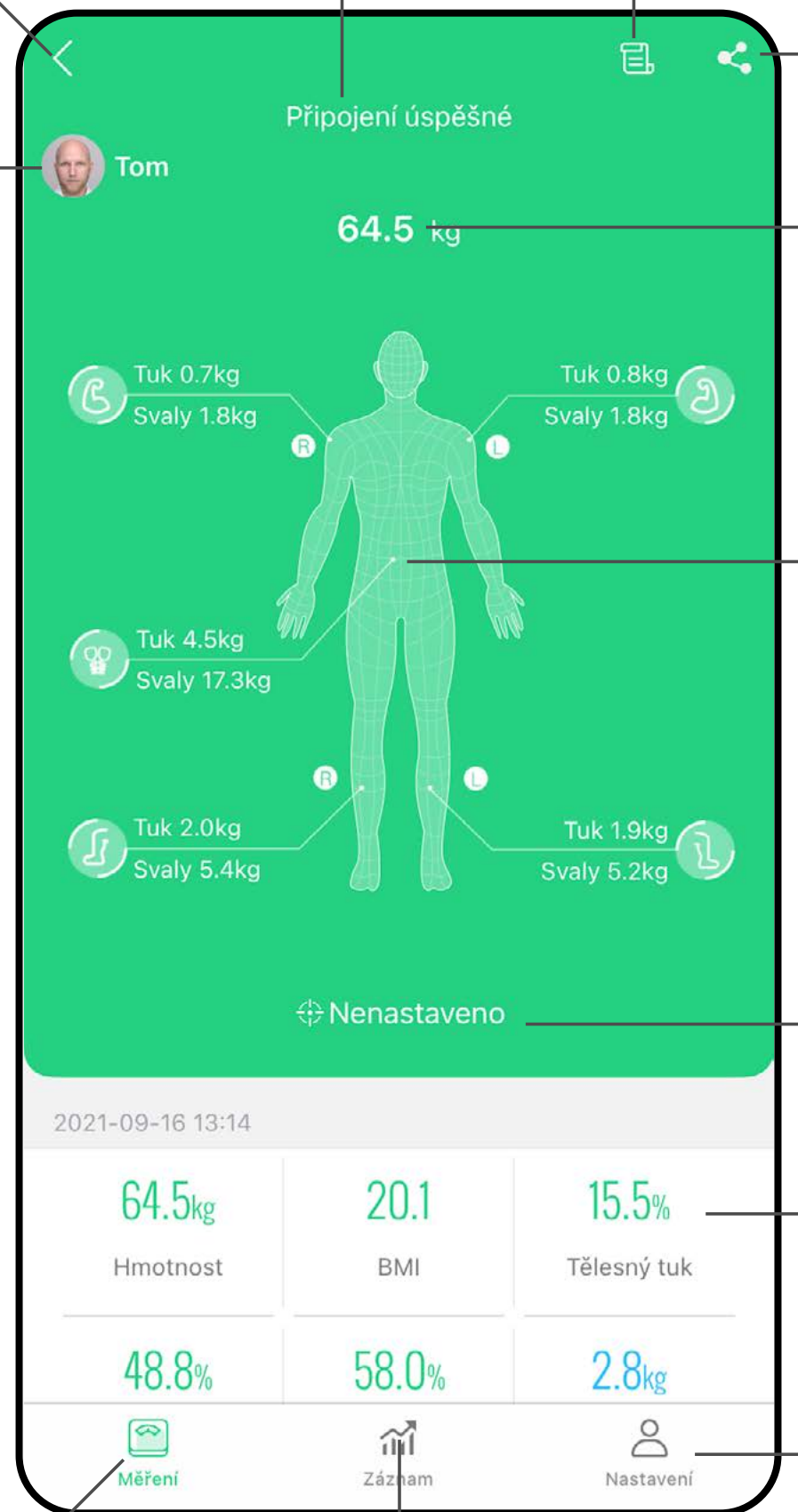

Umožňuje vytvořit podrobný report aktuálního měření zvoleného profilu

Report výsledků

Informační lišta

Krok zpět

Správa profilů

Umožňuje přepínání mezi profily, včetně možnosti vytvoření nových profilů

Sdílení výsledků

Umožňuje sdílet aktuální výsledek měření pomocí podporovaných sociálních sítí (WeChat, Facebook), nebo uložením záznamu na úložiště zařízení

Naměřená hmotnost

Grafické znázornění rozložení výsledků

Nastavení cíle, resp. požadované hmotnosti

Výsledkové pole

V této části jsou výsledky jednotlivých parametrů (po rozkliknutí i s textovým komentářem)

Nastavení

Sekce nastavení související s daným zařízením. Lze spravovat profil, zařízení, barevná nastavení, notifikace, nebo zaslat zpětnou vazbu vývojáři aplikace

Vnořená domovská obrazovka váhy

Historie měření, grafy

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům váhy ETA8781, kteří chtějí naplno využít její potenciál pomocí aplikace AILINK.

Další informace, rady a tipy k Vaší váze naleznete také našich webových stránkách:

[www.eta.cz/osobnipecce](http://www.eta.cz/osobnipecce)

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

V případě dotazů k funkci aplikace, nebo v případě jakýchkoliv problémů nejprve přejděte na výše uvedené webové stránky a pokud ani informace tam uvedené nepomohou vaši žádost vyřešit, můžete nás kontaktovat na informačním e-mailu: [apps@eta.cz](mailto:apps@eta.cz)

## 1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

### KOMPATIBILITA

Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 6.0 a vyšší IOS 9.0 a vyšší
--	--


## 2. REGISTRACE ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ

1

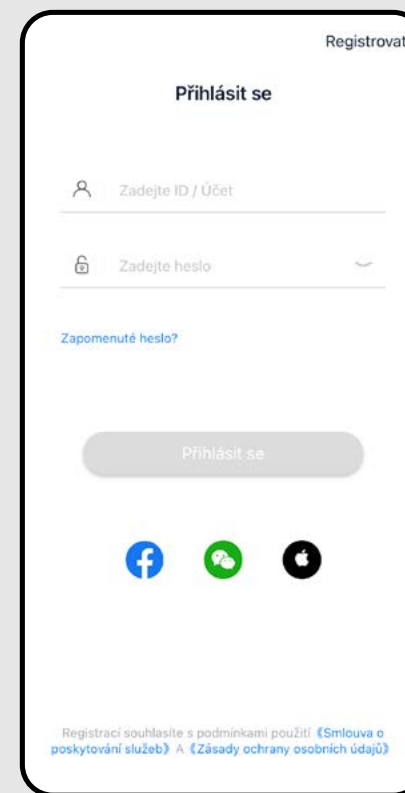


- Jakmile aplikaci stáhněte, zapněte ji. Objeví se základní obrazovka umožňující přihlášení.
- Obrazovka také umožňuje přepnutí na registraci nového účtu, obnovení hesla v případě jeho ztráty, nebo přihlášení pomocí aplikací třetích stran.
- Pokud nemáte vytvořený účet, pokračujte na „**Registrovat**“ (případně se přihlaste aplikací třetí strany)
- Pro přihlášení zadejte název svého účtu (e-mail) a heslo, poté klikněte na „**Přihlásit se**“. V případě OS Android musíte před přihlášením odkliknout pole souhlasu s podmínkami použití v levém dolním rohu.

2

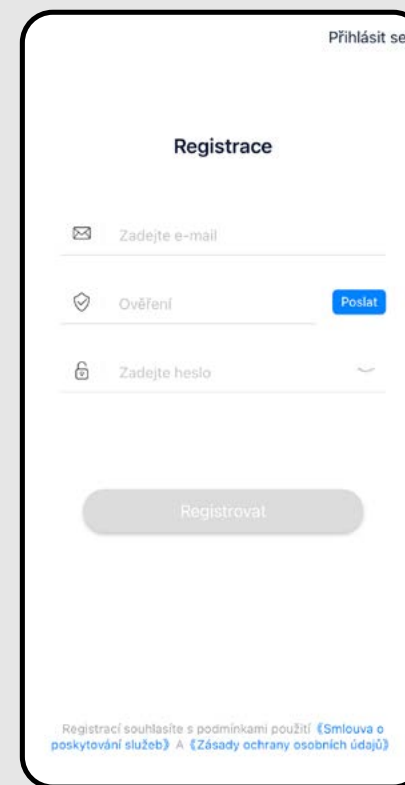

- Zadejte platnou e-mailovou adresu a zvolte si bezpečné heslo.
- Poté klikněte na „**Poslat**“; systém vám odešle na zadaný e-mail ověřovací kód, který poté zadejte do pole „**Ověření**“. (v případě, že kód po uvedeném časovém limitu nedorazí, nežádejte o nový a vyčkejte několik minut, kód může dorazit se zpožděním.
- Proces potvrďte kliknutím na „**Registrovat**“.

3

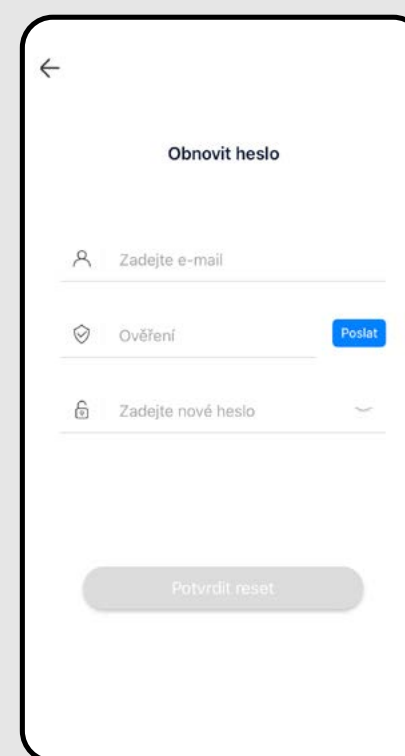

- V případě ztráty hesla je možné jej obnovit prostřednictvím e-mailové adresy použité pro založení účtu.
  - Zadejte daný e-mail a jakmile na něj obdržíte ověřovací kód, zadejte jej do příslušného pole.
- Pozn. Ověřovacímu kódu může nějakou dobu trvat, než dorazí. Buďte prosím trpěliví. Zároveň zkontrolujte, zda kód neblokuje spamový koš/filtr vašeho poštovního klienta. V ideálním případě používejte běžné e-mailové adresy/klienty (např. gmail, seznam atp.).**

## 3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1




- Po úspěšném přihlášení se vám objeví výchozí obrazovka, v tomto případě bez spárovaného zařízení.
- Pro spárování aplikace s váhou klikněte na „**Přidat zařízení**“

\* V případě, že máte nějaké zařízení již spárováno, využijte v pravém horním rohu ikonu „+“, která stejným způsobem umožní přidat další zařízení.




2

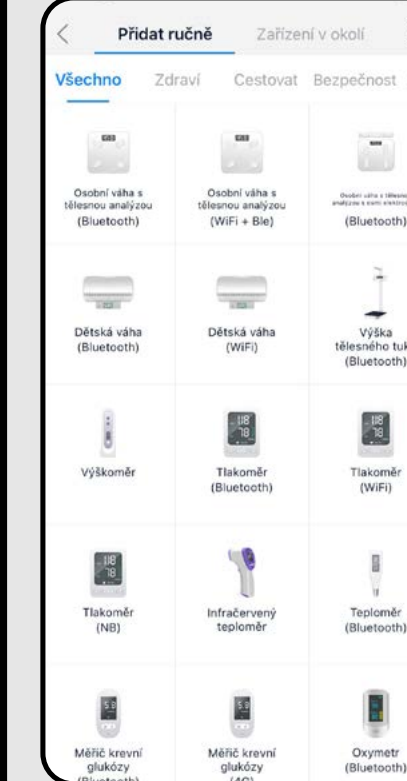

- Objeví se seznam různých druhů zařízení, pro které je aplikace určena.




**Poznámka:**  
Společnost ETA využívá aplikaci pouze pro váhu ETA8781. Žádné další zařízení v aplikaci uvedené není v tuto chvíli podporováno.

3

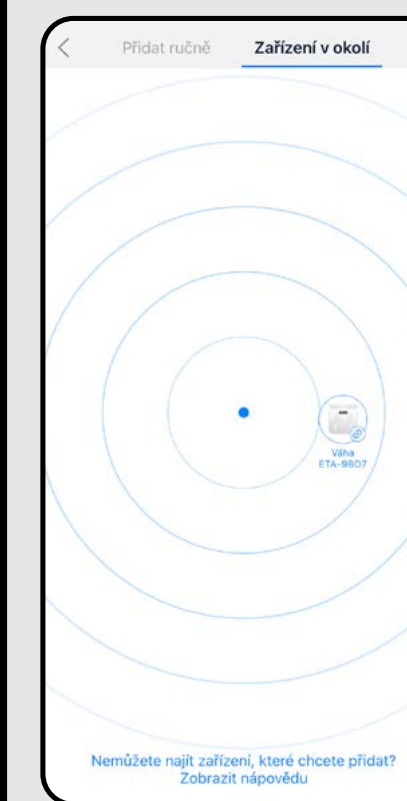

- Nejlepším způsobem je automatické vyhledání zařízení, na které přejdete kliknutím na „**Zařízení v okolí**“.
- Začne se automaticky vyhledávat zařízení v nejbližším okolí.
- Váhu nášlapem zapněte.
- Jakmile se váha objeví v aplikaci, klikněte na její ikonu.

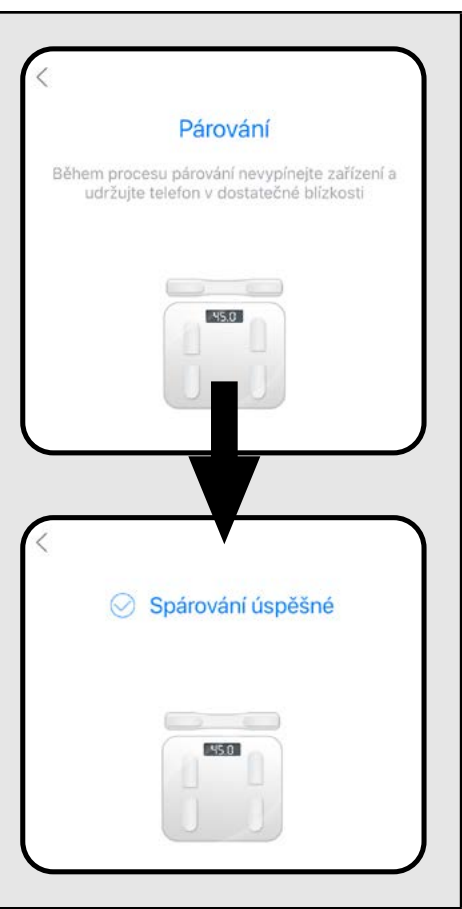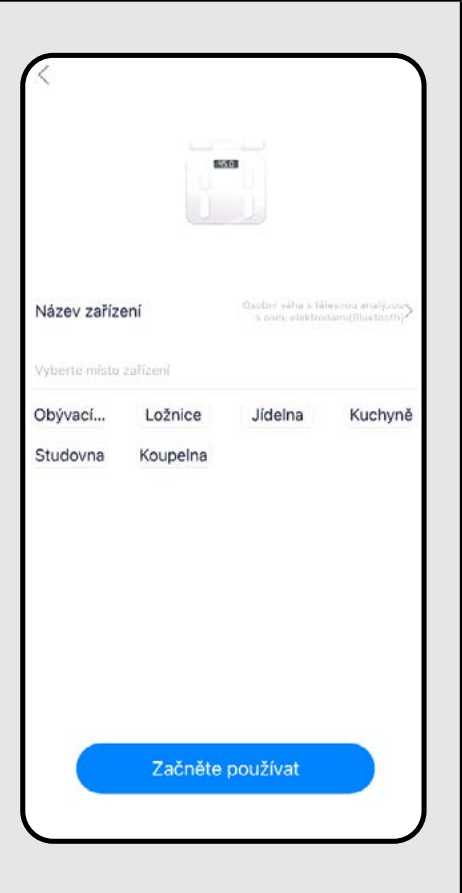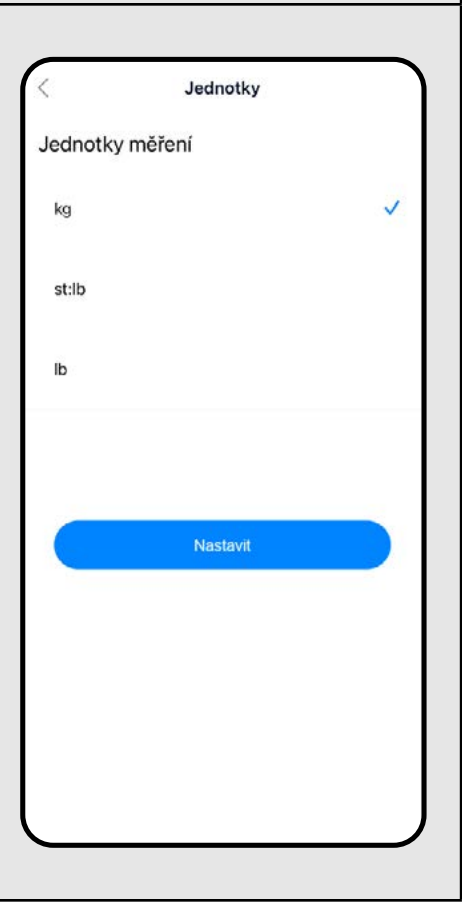

4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahájí se proces párování. Jakmile je proces dokončen, aplikace zobrazí informaci o úspěšném spárování.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>V dalším kroku aplikace nabídne možnost přidat vlastní název váhy a váhu přiřadit a kategorizovat dle místnosti, ve které se bude používat.</li> <li>Pro potvrzení klikněte na „<b>Začněte používat</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Poznámka</b> Funkce kategorizace produktů dle místností má smysl spíše při používání více produktů, které aplikace podporuje. V našem případě (pouze použití váhy ETA) tuto funkci nemusíte používat.</p>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>V posledním kroku nastavení zařízení vám bude nabídnuta možnost nastavení jednotek hmotnosti.</li> <li>Pro potvrzení klikněte na „<b>Nastavit</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Poznámka</b> Pro zrušení párování/smazání daného zařízení tak učiňte v sekci nastavení, viz 9B-1-b</p>

### 4. ZÁKLADNÍ RADY A TIPY K POUŽITÍ

Používání váhy ETA s aplikací AiLink je intuitivní a během našeho testování jsme nezaznamenali žádné výrazné problémy či potíže, na které byste mohli při používání narazit. Přesto mají smart výrobky obecně zvýšené riziko spojené s nekompatibilitou mobilních zařízení, nebo třeba problémy s bezdrátovou konektivitou. Proto přinášíme soubor základních rad a doporučení, jak případné potíže charakteristické pro segment smart výrobků vyřešit.


#### 1. Smart zařízení (mobil, příp. tablet):

- a) používejte vždy aktuální verzi aplikace staženou z oficiálních zdrojů
- b) ujistěte se, že vaše zařízení obsahují podporované verze Android a iOS.
- c) mějte aktivní funkci Bluetooth
- d) mějte aktivní internetové spojení pro správnou komunikaci aplikace s cloudovým serverem
- e) aplikaci povolte požadovaná oprávnění, která jsou v některých případech závislá na typu operačního telefonu.  
V případě potíží zkontrolujte, zda nemáte v rámci např. vašeho telefonu nějaké nadřazené systémové nastavení, které zabraňuje aplikacím používat některá oprávnění - v takovém případě musíte aplikaci udělit výjimku.
- f) komunikaci váhy a telefonu mohou narušovat některé programy (např. VPN, firewall apod.), které používáte v telefonu. V případě problémů s párováním, nebo s běžným provozem tyto programy vypněte.
- g) v případě potíží vyzkoušejte párování s jiným telefonem, tím vyloučíte problém v daném telefonu.

#### 2. Jednotka váhy


- a) vždy se ujistěte, že používáte dostatečně nabité baterie. Slabé baterie mohou negativně ovlivnit funkci spojení prostřednictvím Bluetooth, nebo samotný proces měření. V některých případech se může také stát, že baterie, které byly dodány spolu s výrobkem, mohou mít vlivem skladování a přepravy sníženou kapacitu, proto je vhodné při případných potížích vyzkoušet baterie nové.
- b) dotykové plochy váhy, včetně ručních snímačů, udržujte vždy čisté. Minimalizujete tak riziko chybných měření. Na váhu vstupujte naboso a pro zajištění lepší vodivosti si chodidla a dlaně navlhčete.

- Vyzkoušejte založení nového účtu, tím vyloučíte problém s chybnou aktivací účtu;
- V průběhu párování i používání udržujte vaše smart zařízení v blízkosti váhy (nejlépe do vzdálenosti cca 2 m).

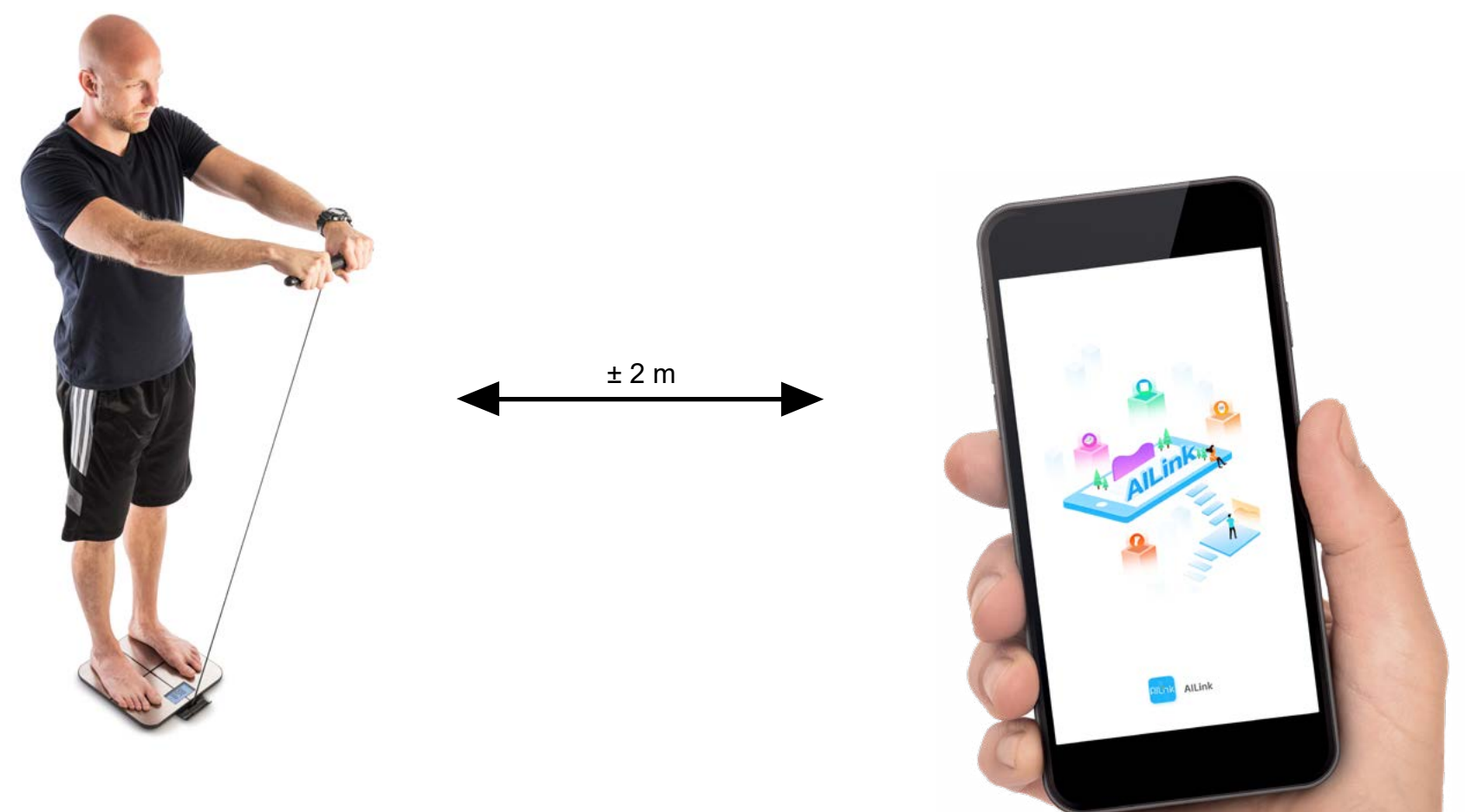


## 5. VÁŽENÍ A ANALÝZA

1

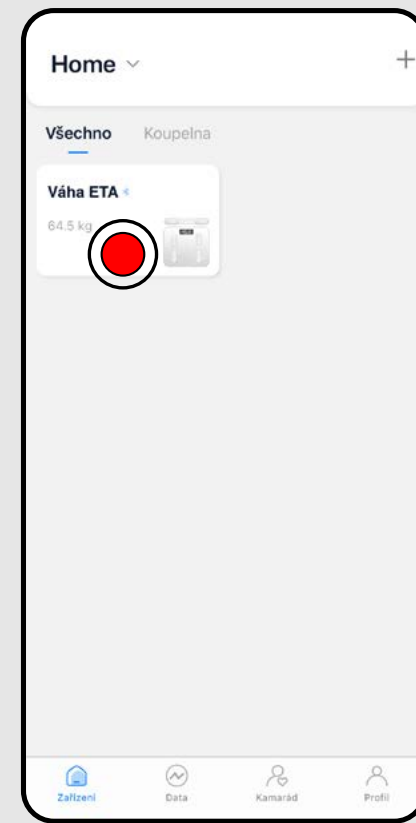


- Po zapnutí aplikace a úspěšném spárování klikněte na pole/ikonu spárované váhy.
- Tím přejdete z obecné části aplikace do části pro ovládání a správu samotné váhy.

2

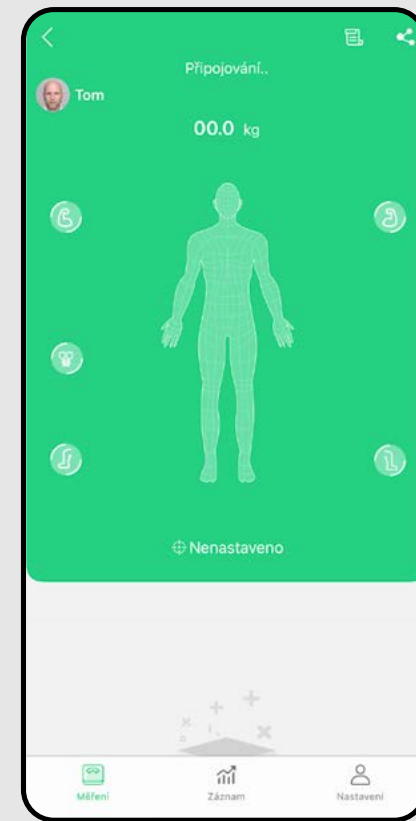


- Zobrazí se základní obrazovka měření.
- Kliknutím na ikonu profilu v levém horním rohu si zvolte profil (pokud jich máte více).
- Váhu nášlapem zapnete a vyčkejte, až se váha s aplikací spojí - informační lišta zobrazí hlášku „Připojení úspěšné“.

3

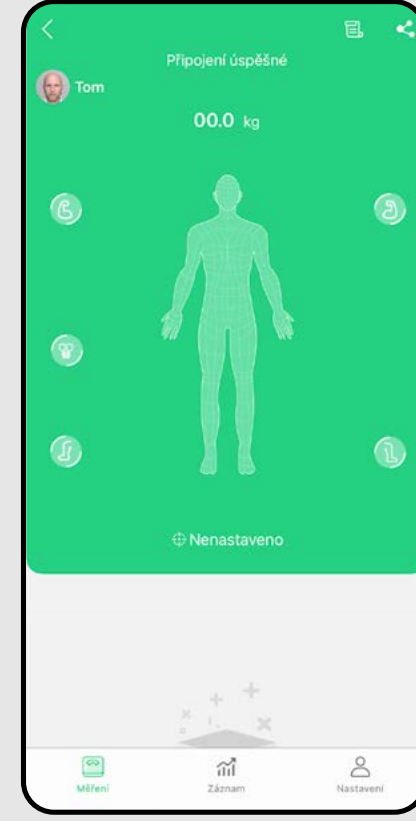

- Nyní můžete zahájit praktické vážení a měření tělesných parametrů.
- Na váhu stoupněte, uchopte ruční snímač a vyčkejte zvažení/změření.
- Informační lišta a grafické prostředí okolo torza těla vás bude informovat o aktuálním stavu měření.

4

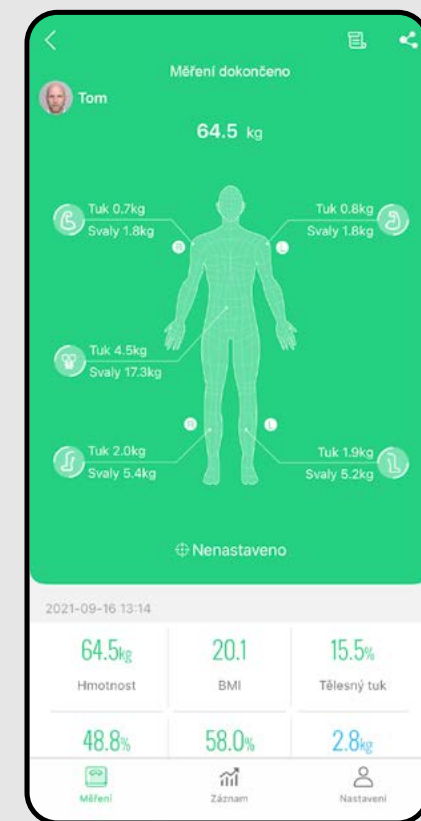

- Po úspěšném dokončení měření zobrazí informační lišta informaci, že bylo měření dokončeno.
- Zároveň se zobrazí výsledky v grafice torza těla a ve spodní části aplikace.



- U jednotlivých změřených parametrů ve spodní části můžete rozkliknutím zobrazit informativní textový komentář.

### POZNÁMKY

- Mějte prosím na zřeteli, že naměřené hodnoty jsou pouze přibližné a mohou být nepřesné ve srovnání s výsledky skutečných medicínských analýz. Jelikož je měření lidského těla velmi složité a nákladné, používají různí výrobci různé orientační metody měření. Často se tak od sebe odlišují i výsledky těchto profesionálních zařízení. Z tohoto důvodu je doporučováno používat jedno zařízení a na něm pozorovat vývoj trendu jednotlivých parametrů.**
- Pokud selhalo připojení váhy, ujistěte se, že máte na telefonu aktivní Bluetooth, poté klikněte pro opětovné připojení na text v informační liště. Případně si přečtete instrukce v kapitole 3.
- V případě, že měření či analýza selhalo, zkuste celý proces vážení/měření zopakovat. Případně si přečtete instrukce v kapitole 3.

## 6. ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ


1



- Klikněte na ikonu „Záznam“ na spodní liště aplikace. Tím přejdete do sekce grafického znázornění výsledků měření.
- Kliknutím na jednotlivé parametry ve spodní části aplikace zobrazíte jejich graf.
- Pro zobrazení kalendáře klikněte na ikonu v pravém horním rohu, nebo na pole výsledku měření.




2

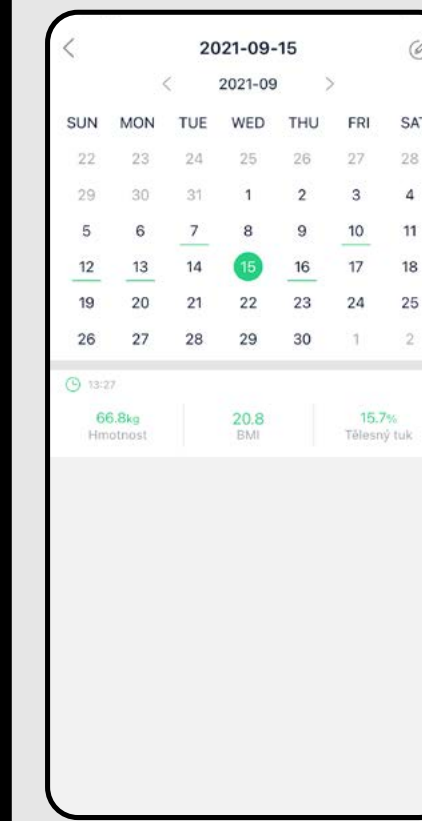

- V rámci kalendáře vidíte, ve kterých dnech bylo provedeno měření. Kliknutím na jednotlivé dny zobrazíte daná měření ve spodní části pod kalendářem.

**Tip:**  
Kalendářem můžete listovat pomocí šipek v jeho horní části.

3

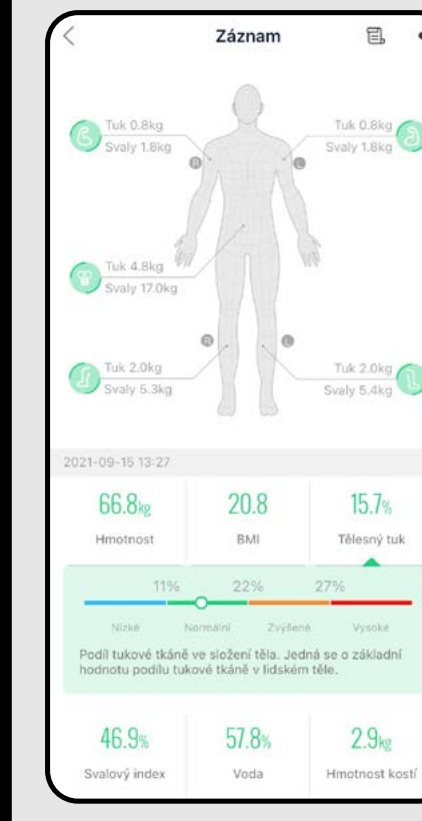


- Kliknutím na jednotlivá měření pak zobrazíte následující záznam, který pak můžete dále sdílet.



## 7. SDÍLENÍ VLASTNÍCH VÝSLEDKŮ


Aplikace AiLink umožňuje několik možností, jak sdílet své výsledky. V principu umožňuje sdílet vždy pouze jednotlivá měření. K jednotlivým obrazovkám sdílení se dopravujete dle schématu na této stránce.

Vždy si však můžete vytvořit tzv. „screenshot“, tedy záznam obrazovky jakékoliv části aplikace, se kterým pak pracujete jako s jakýmkoliv jiným obrázkem.

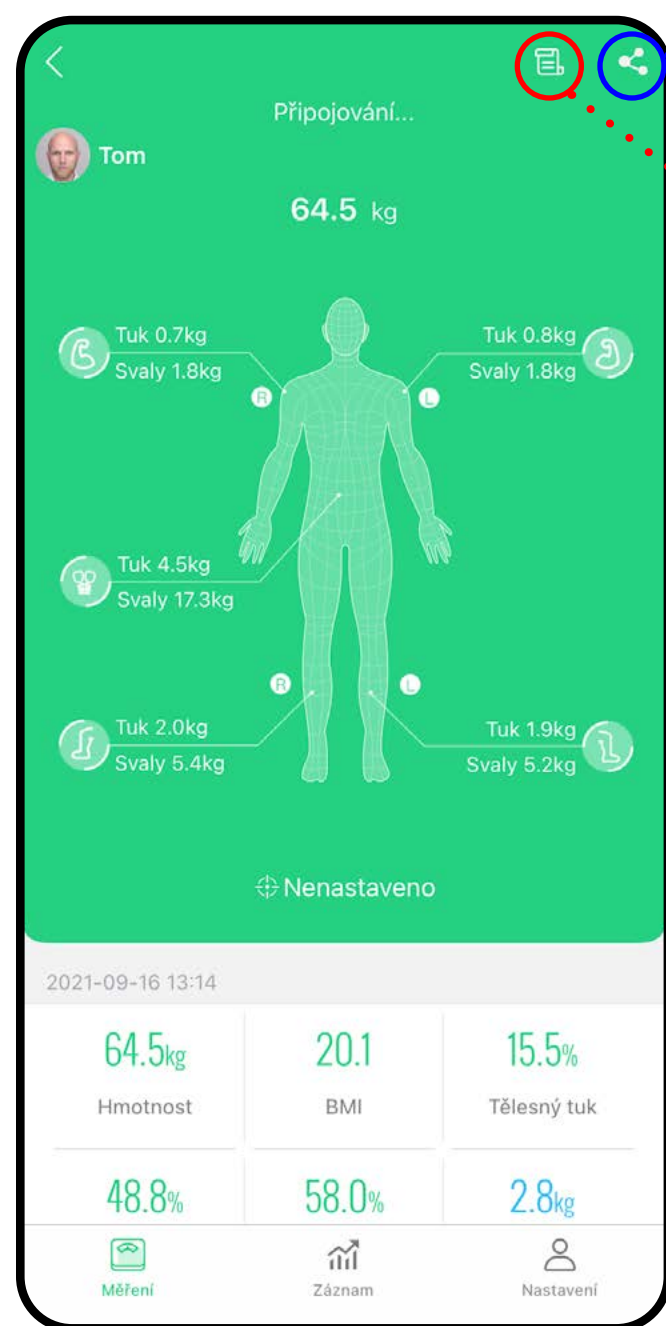


### Záznam posledního měření

V základní obrazovce najdete výsledky posledního měření bez nutnosti procházení historie. Lze tak zkontrolovat výsledky ihned po změření.

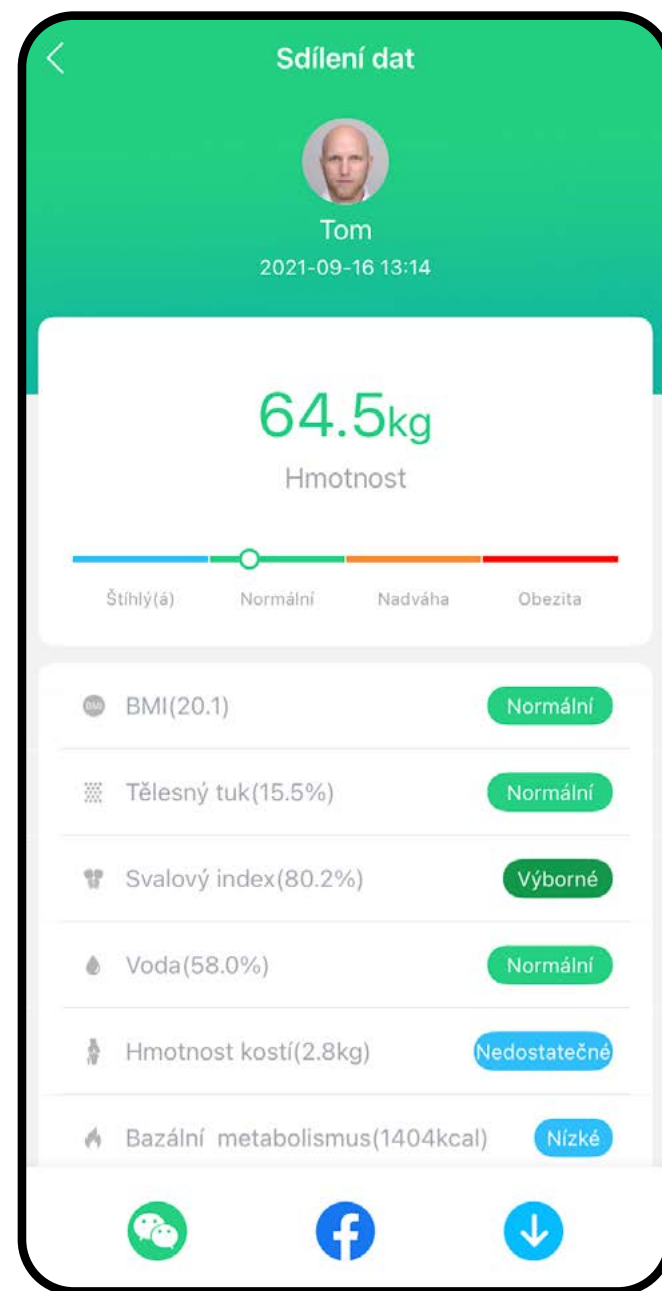

## Sdílení konkrétního měření

Základní podoba reportu konkrétního měření, který lze buďto napřímo stáhnout do úložiště zařízení, nebo sdílet pomocí připojených sociálních sítí (Facebook, WeChat) prostřednictvím příslušných tlačítek ve spodní liště.

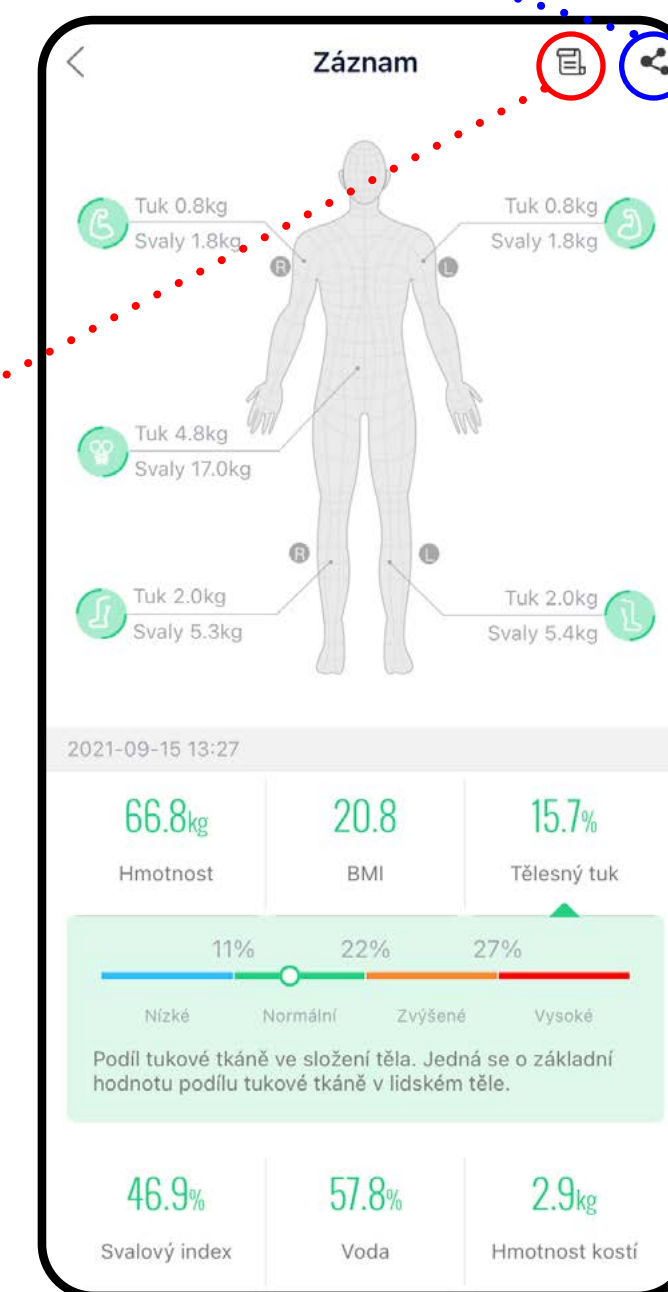

### Záznam konkrétního měření

Toto zobrazení záznamu konkrétního měření získáte v sekci „Záznam“ - tedy v historii měření jak je znázorněno v kap. 6.3


### Podrobnější zpráva o měření

Aplikace vygeneruje podrobnější report, který se vztahuje k vybranému měření. Report lze stáhnout do úložiště (kliknutím na ikonu šipky ve spodní části obrazovky) zařízení ve formátu obrázku a potom s ním dále pracovat. (Nelze jej však napřímo z aplikace sdílet na sociálních sítích.)




## 8. KAMARÁD - SDÍLENÍ MĚŘENÍ

1

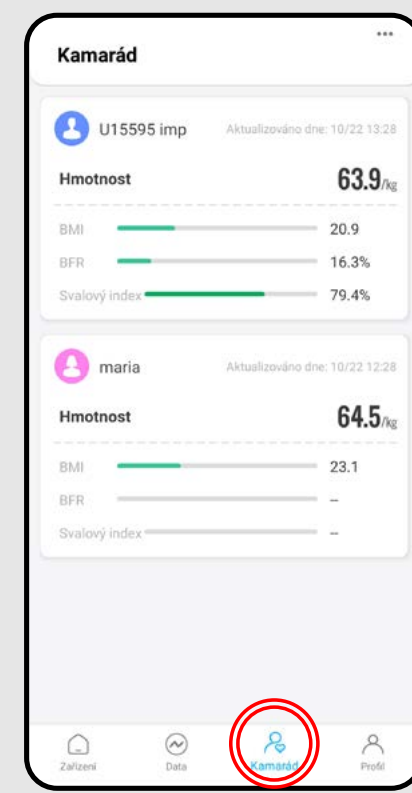

- Vedle možnosti sdílet vlastní výsledky umožňuje aplikace také vzájemné propojení uživatelských účtů AiLink.
- Tímto způsobem můžete nahlížet do výsledků osoby, se kterou jste spojeni a naopak - ona osoba uvidí vaše výsledky.
- **Příklad:** na ilustraci vlevo vidíte, že aktuální profil sdílí své výsledky s uživatelem „imp“. Uživatel IMP obsahuje více profilů, rozhodl se však sdílet pouze svůj hlavní profil a profil uživatele „maria“.

2

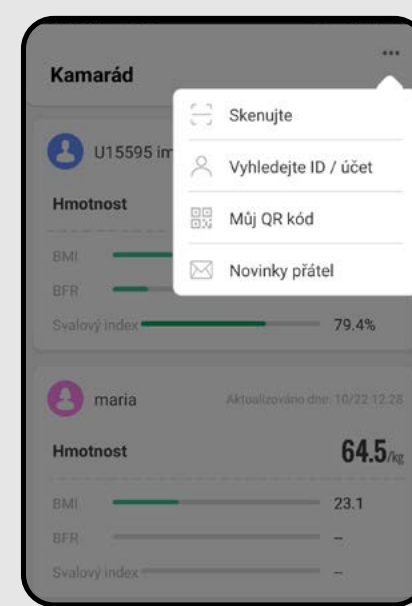


- Pro přidání nového přítele je nutné, aby jeden z účtů vstoupil do části „Kamarád“ a klikl na „...“. Následně máte k dispozici 2 možnosti:
  - 1) Pomocí možnosti „**Skenujte**“ lze z vašeho telefonu nascanovat QR kód, který obdržíte od druhého účtu, se kterým chcete data sdílet. QR kód získáte tak, že na telefonu druhého účtu kliknete na možnost „**Můj QR kód**“, tento QR kód nascanujete a potvrdíte sdílení profilů.
  - 2) Pomocí možnosti „**Vyhledejte ID / účet**“ zadejte e-mail účtu druhého účtu a potvrdíte.
- Jakmile pošlete druhé straně žádost, zobrazí se jí v aplikaci upozornění v sekci „Kamarád“, u ikony se zobrazí jedna ze zobrazených červených značek (👤/👤). Poté zvolte „...“, přejděte na „**Novinky přátel**“ a potvrdíte přijetí žádosti.

### Poznámka

Účet, který žádost odesílá i účet, který žádost přijímá, si při odeslání/přijetí žádosti může zvolit, jaké své podprofile bude sdílet druhé straně.

3

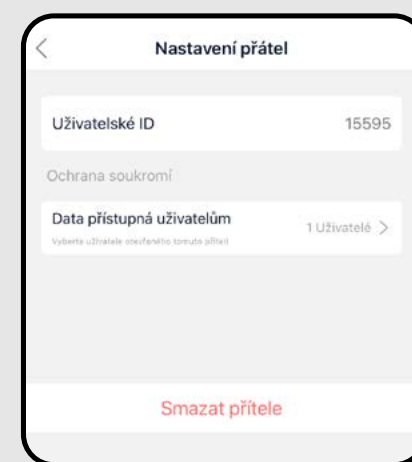


- Pokud chcete změnit nějaké parametry u sdíleného účtu (např. jméno účtu, smazání sdílení, změna sdílených podprofilů), klikněte v sekci „Kamarád“ na daný profil a následně na ikonu nastavení „⚙“.

## 9A. NASTAVENÍ - OBECNÁ část


Aplikace Vám umožňuje 2 základní možnosti nastavení. Nastavení v rámci obecné části aplikace (která je společná pro správu všech výrobků, které se v aplikaci používají) a nastavení v rámci aplikační části určené pro váhu ETA. Některá nastavení se v obou případech překrývají, některá jsou specifická.

1

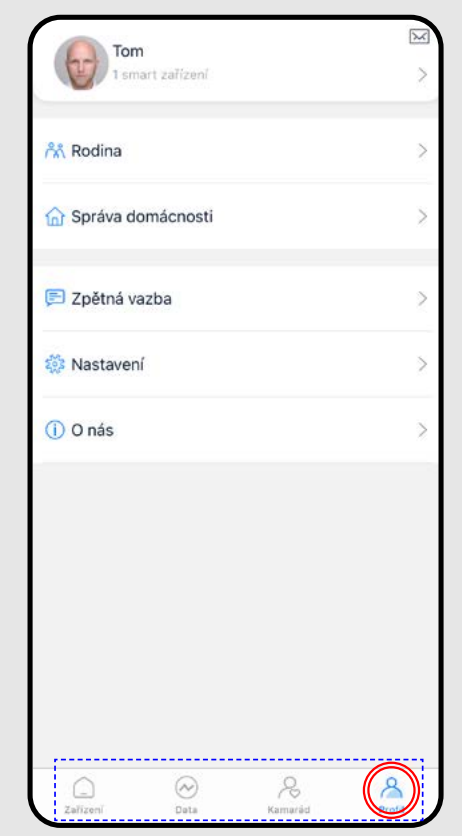


- **V obecné části lze nastavit:**
  - a) **Úprava hlavního profilu** (viz níže 9A-2)
  - b) **Správa profilů** (viz níže 9A-3)
  - c) **Správa domácnosti** - Správa domácností, místností a s nimi spojenými produkty. Pro účely používání pouze váhy ETA je tato funkce zbytečná.
  - d) **Zpětná vazba** - Lze napsat vývojářům aplikace. **Toto pole spíše nepoužívejte.** Doporučujeme použít formulář přímo z aplikační části viz 9B-1)!
  - e) **Nastavení** - Možnost přepnutí jazyka aplikace a zobrazení připojených zařízení.
  - f) **O nás** - Zobrazí verzi aplikace a možnost nahlédnout do smluvních podmínek aplikace.

2

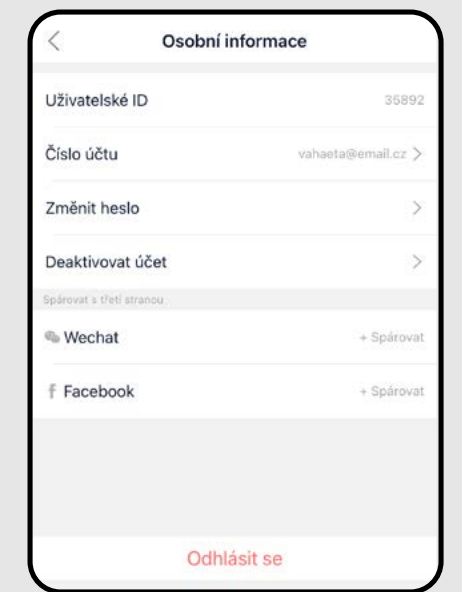

- Po kliknutí na ikonu profilu (👤) přejdete do nastavení profilu.
- Lze zde zjistit ID účtu, změnit heslo, nebo deaktivovat účet.
- Možnosti aplikací třetích stran (WeChat, Facebook) v této části aplikace slouží pouze pro informaci, zda jste přihlášení k účtu pomocí těchto služeb.


3

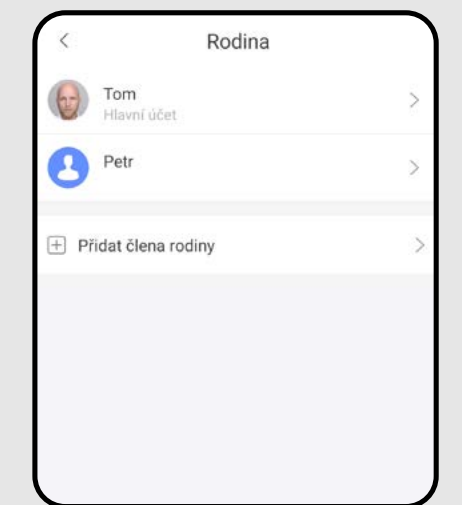

- Sekce „**Rodina**“ umožňuje jednoduchou správu profilů. V nabídce vidíte jak hlavní profil, tak všechny vytvořené podprofile.
- Po rozkliknutí daného profilu můžete měnit základní informace (foto, přezdívka, narozeniny, pohlaví) případně můžete profil vymazat.
- Pro vytvoření nového podprofilu klikněte na „**Přidat člena rodiny**“.


## 9B. NASTAVENÍ - APLIKAČNÍ část

1

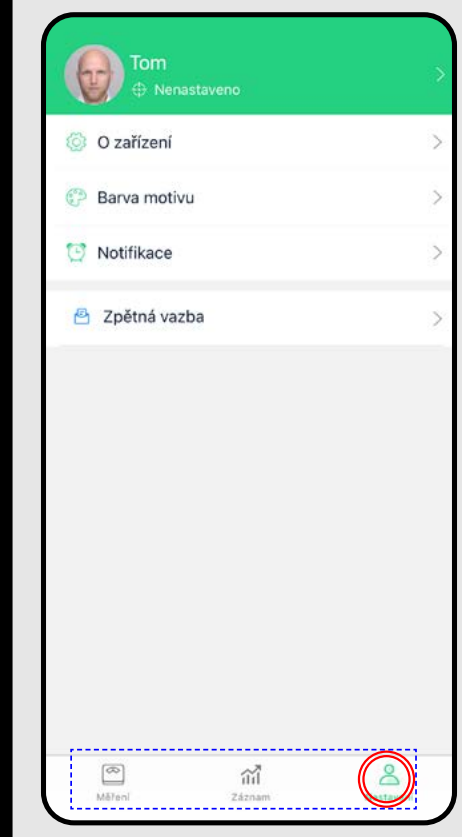


- **V aplikační části lze nastavit:**
  - a) **Úpravu profilů** (viz níže 9B-2)
  - b) **Správu zařízení** (váhy) - Možnost přejmenování a odstranění zařízení, změny jednotek měření a info o firmwaru.
  - c) **Barvu motivu** - Nastavení barevného motivu aplikace.
  - d) **Notifikace** - Funkce tzv. budíku. Lze nastavit 3 různé časy připomenutí vážení.
  - e) **Zpětnou vazbu** - Lze napsat vývojářům aplikace, připomínky, dotazy apod. **Využijte nejlépe tuto možnost** (raději než pole v obecné části nastavení).

2

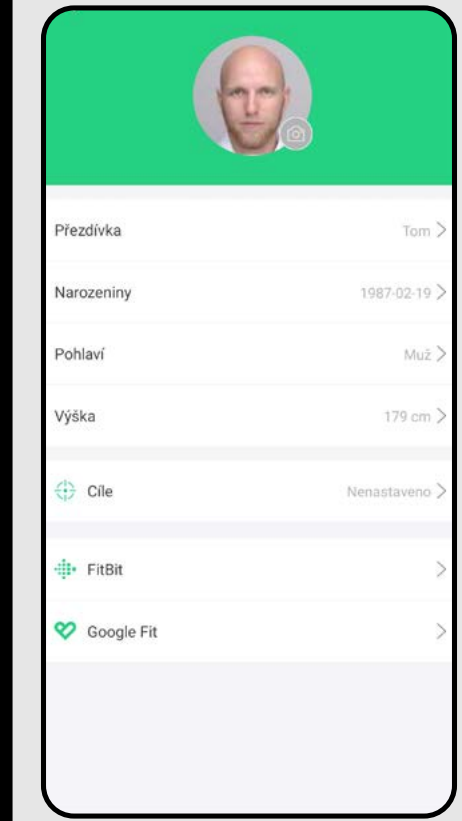


- Po kliknutí na ikonu profilu (👤) přejdete do nastavení profilu.
- Lze zde měnit přezdívku, údaje o narození, pohlaví, výšce a požadovaném cíli hmotnosti.
- Zároveň zde lze spárovat aplikaci s aplikacemi třetích stran, které budou přijímat vybrané parametry změřené váhou ETA. Jedná se o aplikaci FitBit a Google Fit (příp. Apple Health pro uživatele Apple zařízení).

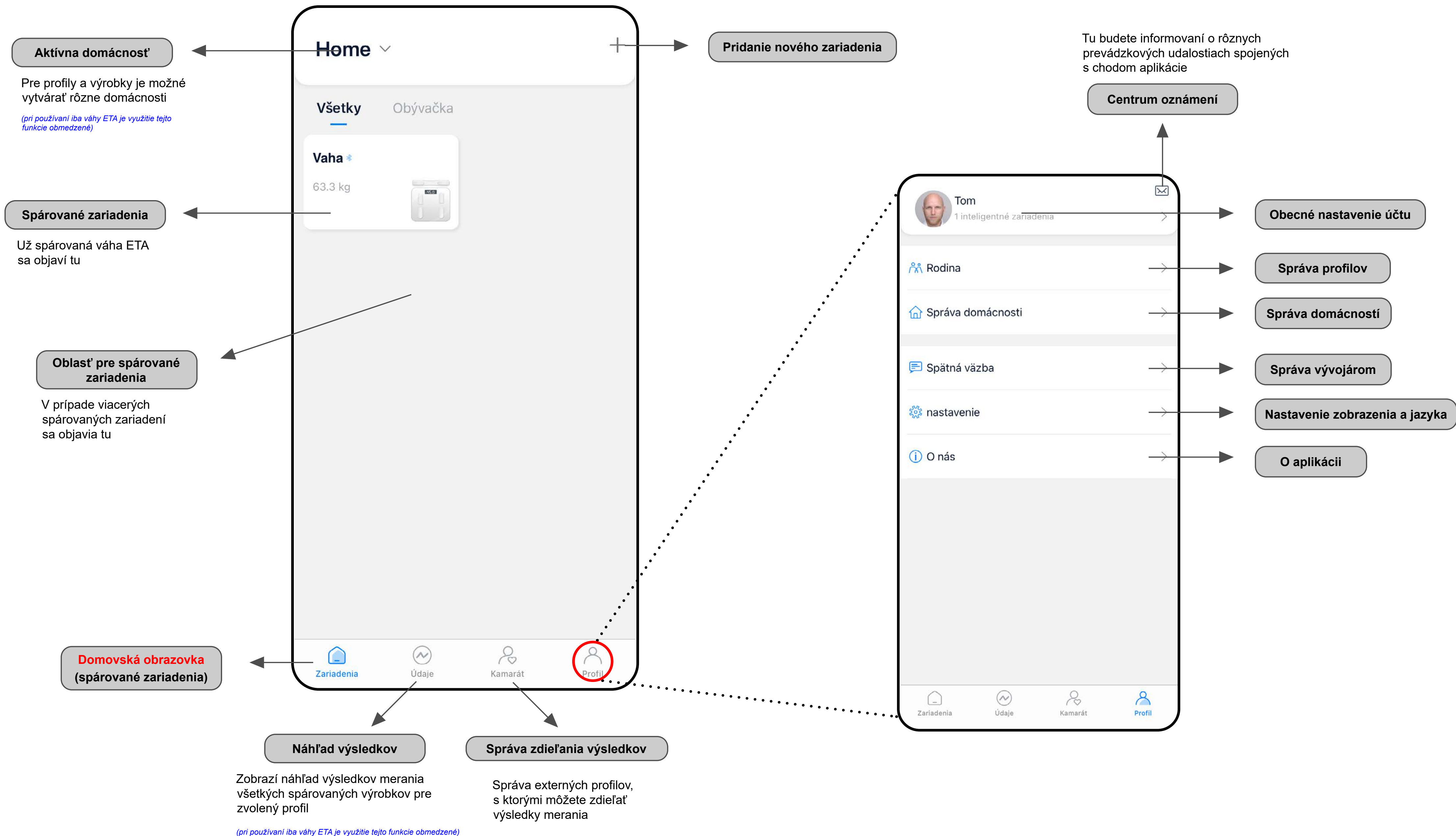





Prechod do časti aplikácie určenej pre váhu ETA

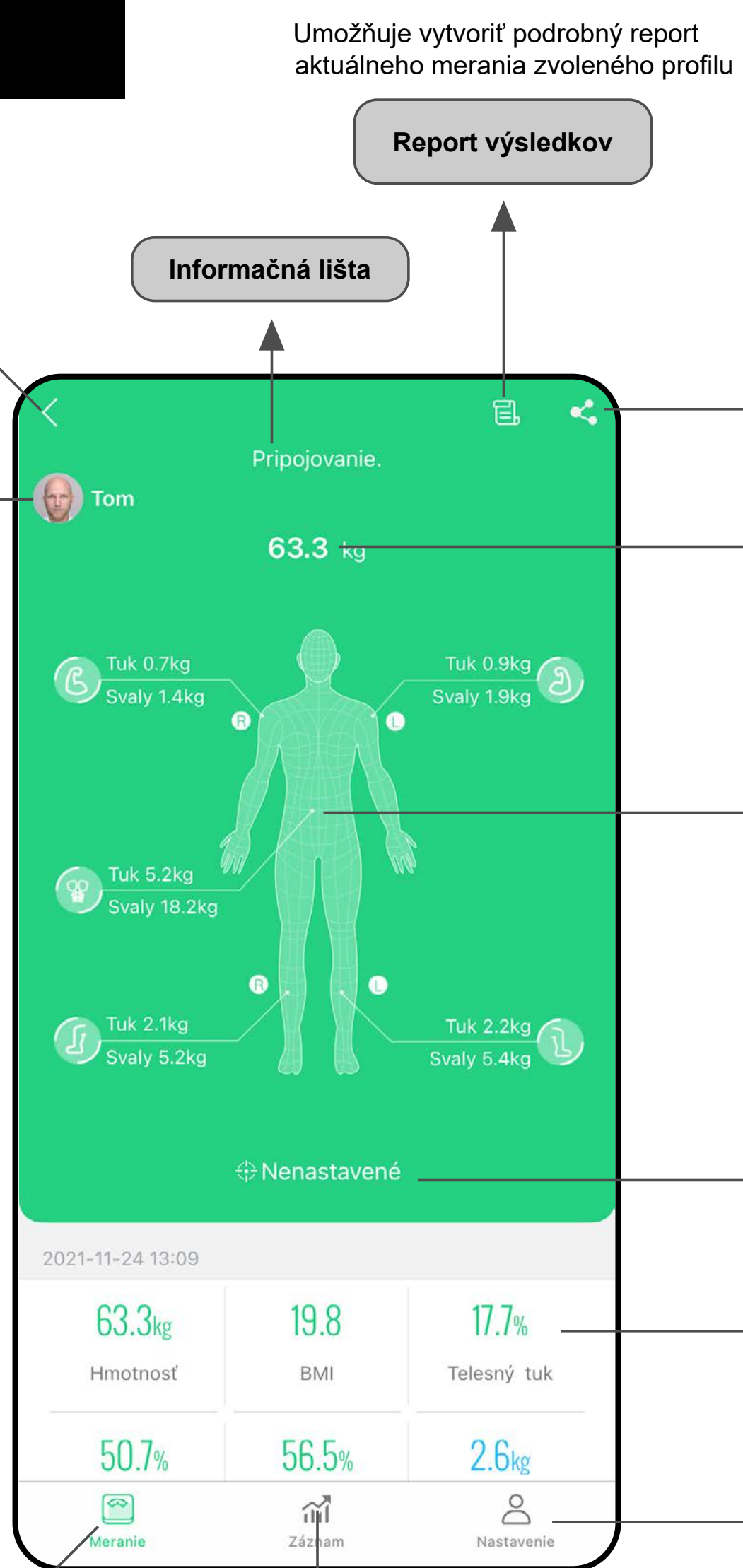

Umožňuje vytvoriť podrobný report aktuálneho merania zvoleného profilu

Report výsledkov

Informačná lišta

Krok späť

Správa profilov

Umožňuje prepínanie medzi profilmi, vrátane možnosti vytvorenia nových profilov

Zdieľanie výsledkov

Umožňuje zdieľať aktuálny výsledok meraní pomocou podporovaných sociálnych sietí (WeChat, Facebook), alebo uložením záznamu na úložisko zariadení

Nameraná hmotnosť

Grafické znázornenie rozloženia výsledkov

Nastavenie cieľa, resp. požadovanej hmotnosti

Výsledkové pole

V tejto časti sú výsledky jednotlivých parametrov (po rozkliknutí aj s textovým komentárom)

Nastavenia

Sekcia nastavení súvisiaca s daným zariadením. Je možné spravovať profil, zariadenia, farebné nastavenia, notifikácie, alebo zaslať spätnú väzbu vývojárovi aplikácie

Vnorená domovská obrazovka váhy

História meraní, grafy

Vážený zákazník,

Ďakujeme za Vašu dôveru v produkty značky ETA. Táto príručka je určená všetkým majiteľom váhy ETA8781, ktorí chcú naplno využiť jej potenciál pomocou aplikácie AILINK.

Ďalšie informácie, rady a tipy k Vašej váhe nájdete tiež na našich webových stránkach:

[www.eta.cz/osobnipece](http://www.eta.cz/osobnipece)

Tieto webové stránky neustále aktualizujeme a zhromažďujeme tu najnovšie poznatky o danom výrobku.

V prípade otázok k funkciám aplikácie, alebo v prípade akýchkoľvek problémov najprv prejdite na vyššie uvedené webové stránky a ak ani informácie tam uvedené nepomôžu vašu žiadosť vyriešiť, môžete nás kontaktovať na informačnom e-maile: [apps@eta.cz](mailto:apps@eta.cz)

## 1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play, alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:




Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte do Vášho mobilného telefónu (tabletu).

### KOMPATIBILITA

Operačný systém mobilného telefónu (tabletu)	Android 6.0 a vyšší IOS 9.0 a vyšší
--	--


## 2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRIHLÁSENIE

1

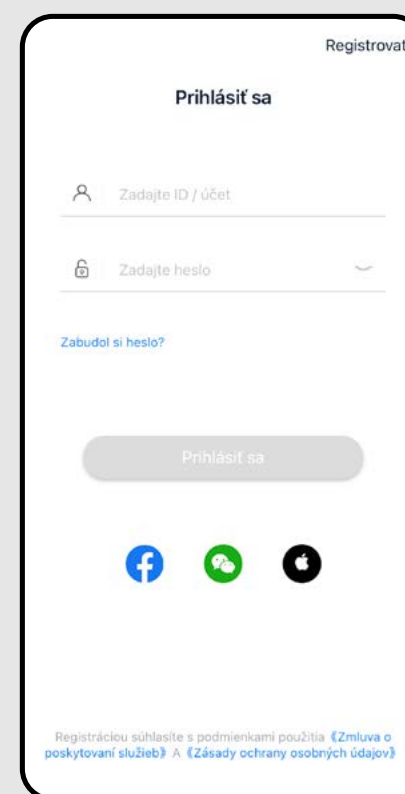


- Hneď ako si aplikáciu stiahnete, zapnite ju. Objaví sa základná obrazovka umožňujúca prihlásenie.
- Obrazovka tiež umožňuje prepnutie na registráciu nového účtu, obnovenie hesla v prípade jeho straty, alebo prihlásenie pomocou aplikácie tretích strán.
- Ak nemáte vytvorený účet, pokračujte na „**Registrovat**“ (prípadne sa prihláste aplikáciou tretej strany).
- Pre prihlásenie zadajte názov svojho účtu (e-mail) a heslo, potom kliknite na „**Prihlásiť sa**“. V prípade OS Android musíte pred prihlásením odkliknúť pole súhlasu s podmienkami použitia v ľavom dolnom rohu.

2

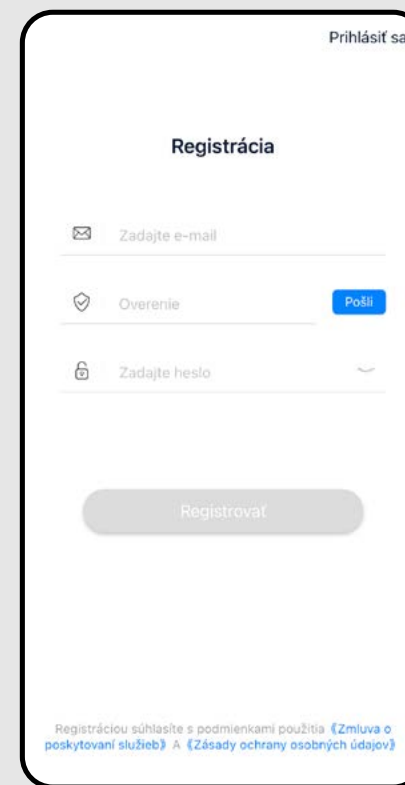

- Zadajte platnú e-mailovú adresu a zvolte si bezpečné heslo.
- Potom kliknite na „**Pošli**“; systém vám odošle na zadaný e-mail overovací kód, ktorý potom zadajte do poľa „**Overenie**“. (v prípade, že kód po uvedenom časovom limite nedorazí, nežiadajte o nový, ale počkajte niekoľko minút, kód môže doraziť s oneskorením).
- Proces potvrdte kliknutím na „**Registrovat**“.

3

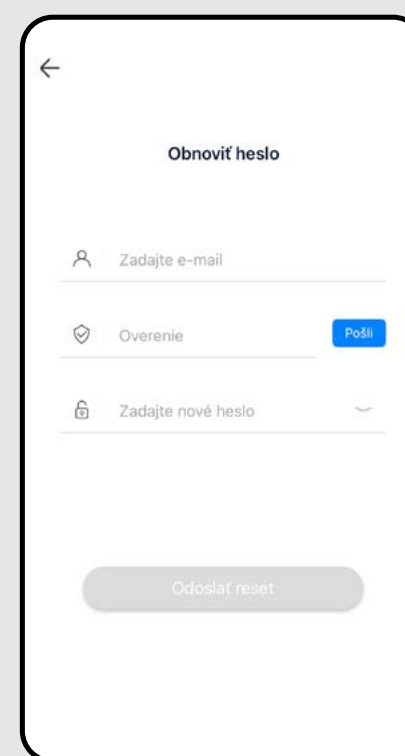

- V prípade straty hesla je možné ho obnoviť prostredníctvom e-mailovej adresy použitej na založenie účtu.
  - Zadajte daný e-mail a hneď ako dostanete overovací kód, zadajte ho do príslušného poľa.
- Pozn. Overovaciemu kódu môže nejakú dobu trvať, kým dorazí. Buďte prosím trpezlivý. Zároveň skontrolujte, či kód neblokuje spamový kôš/filter vášho poštového klienta. V ideálnom prípade používajte bežné e-mailové adresy/klienty (napr. gmail, zoznam a pod.).**


## 3. PÁROVANIE ZARIADENÍ

1




- Po úspešnom prihlásení sa vám objaví východisková obrazovka, v tomto prípade bez spárovaného zariadenia.
- Pre spárovanie aplikácie s váhou kliknite na „**Pridať zariadenie**“.

\* V prípade, že máte nejaké zariadenie už spárované, využijete v pravom hornom rohu ikonu „+“, ktorá rovnakým spôsobom umožní pridať ďalšie zariadenie.

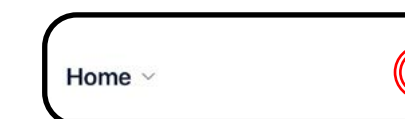


2

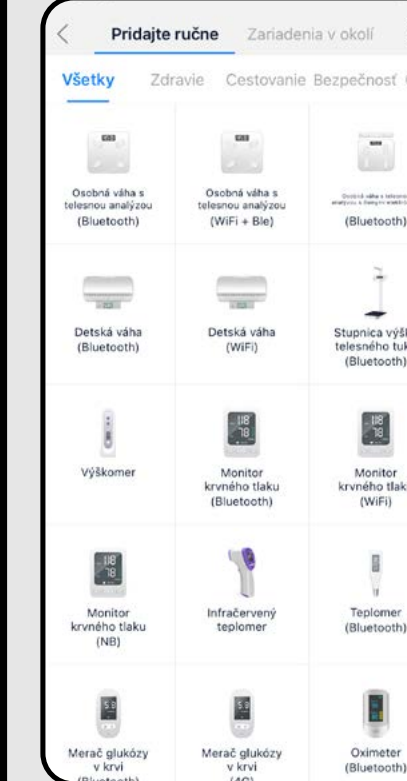

- Objaví sa zoznam rôznych druhov zariadení, pre ktoré je aplikácia určená.




**Poznámka:**  
Spoločnosť ETA využíva aplikáciu iba pre váhu ETA8781. Žiadne ďalšie zariadenie v aplikácii uvedené nie je v tejto chvíli podporované.

3

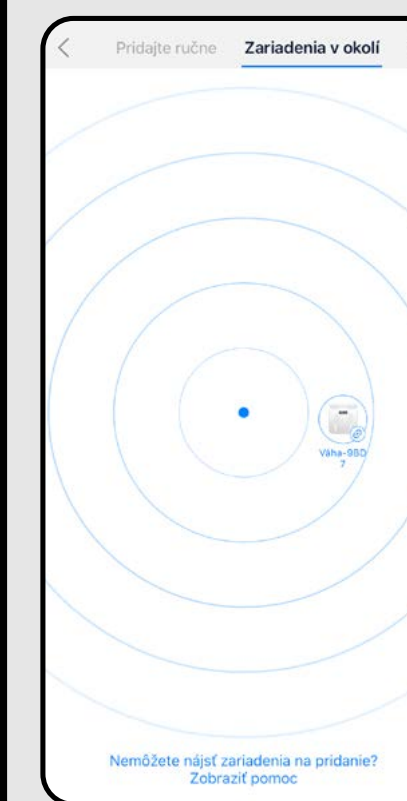

- Najlepším spôsobom je automatické vyhľadanie zariadenia, na ktoré prejdete kliknutím na „**Zariadenia v okolí**“.
- Začne sa automaticky vyhľadávať zariadenie v najbližšom okolí.
- Váhu nášľapom zapnite.
- Hneď ako sa váha objaví v aplikácii, kliknite na jej ikonu.

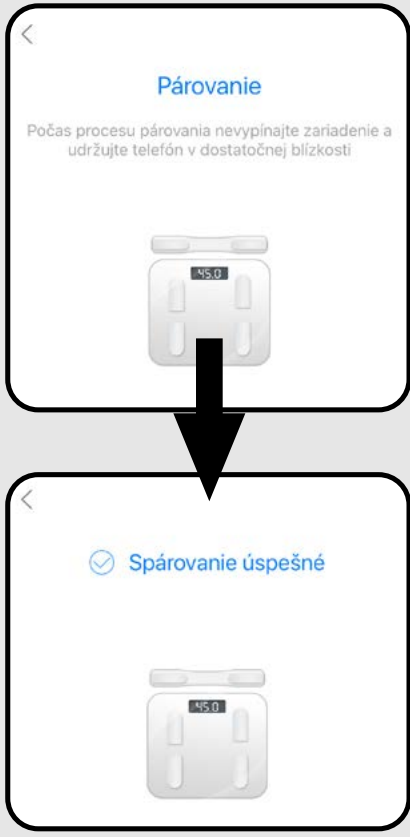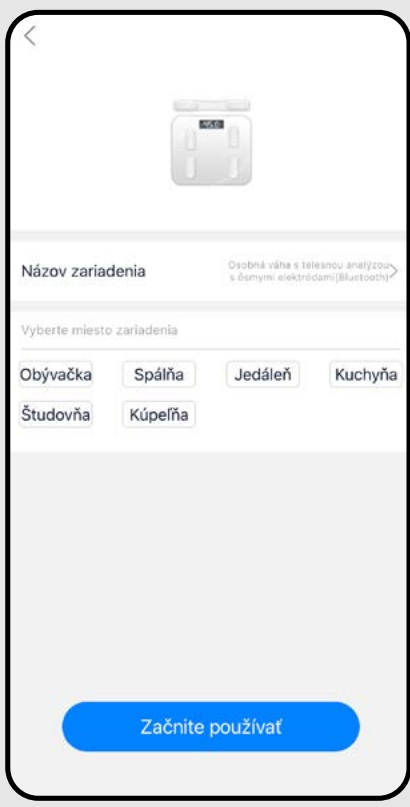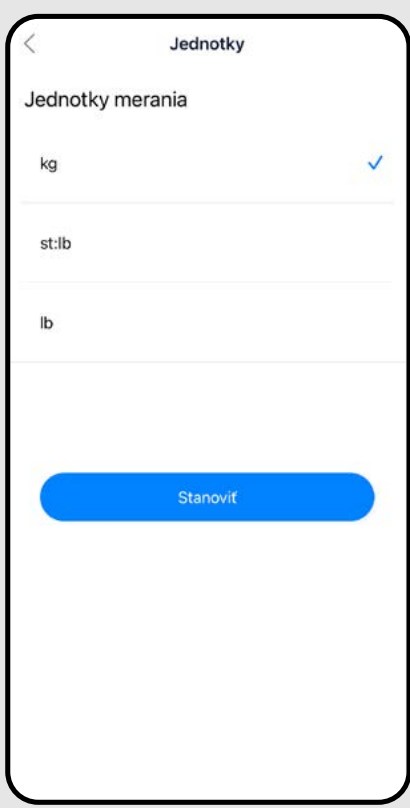

<b>4</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaháji sa proces párovania. Hneď ako je proces dokončený, aplikácia zobrazí informáciu o úspešnom spárovaní.</li> </ul>
<b>5</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>V ďalšom kroku aplikácia ponúkne možnosť pridať vlastný názov váhy a váhu priradiť a kategorizovať podľa miestnosti, v ktorej sa bude používať.</li> <li>Pre potvrdenie kliknite na „<b>Začnite používať</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Poznámka</b></p> <p>Funkcia kategorizácie produktov podľa miestností má zmysel skôr pri používaní viacerých produktov, ktoré aplikácia podporuje. V našom prípade (iba použitie váhy ETA) túto funkciu nemusíte používať.</p>
<b>6</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>V poslednom kroku nastavenia zariadenia vám bude ponúknutá možnosť nastavenia jednotiek hmotnosti.</li> <li>Pre potvrdenie kliknite na „<b>Stanoviť / Nastaviť</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Poznámka</b></p> <p>Pre zrušenie párovania/zmazania daného zariadenia tak urobte v sekcii nastavenia, viď 9B-1-b</p>

## 4. ZÁKLADNÉ RADY A TIPY NA POUŽITIE

Používanie váhy ETA s aplikáciou AiLink je intuitívne a počas nášho testovania sme nezaznamenali žiadne výrazné problémy, na ktoré by ste mohli pri používaní naraziť. Napriek tomu majú smart výrobky obecné zvýšené riziko spojené s nekompatibilitou mobilných zariadení, alebo napr. problémy s bezdrôtovou konektivitou. Preto prinášame súbor základných rád a odporúčení, ako prípadné problémy charakteristické pre segment smart výrobkov vyriešiť.


### 1. Smart zariadenia (mobil, príp. tablet):

- používajte vždy aktuálnu verziu aplikácie stiahnutú z oficiálnych zdrojov
- uistite sa, že vaše zariadenie obsahuje podporované verzie Android a iOS.
- majte aktívnu funkciu Bluetooth
- majte aktívne internetové spojenie pre správnu komunikáciu aplikácie s cloudovým serverom
- aplikácii povoľte požadované oprávnenia, ktoré sú v niektorých prípadoch závislé na type operačného telefónu. V prípade problémov skontrolujte, či nemáte v rámci napr. vášho telefónu nejaké nadradené systémové nastavenie, ktoré zabraňuje aplikácii používať niektoré oprávnenia - v takom prípade musíte aplikácii udeliť výnimku.
- komunikáciu váhy a telefónu môžu narúšať niektoré programy (napr. VPN, firewall a pod.), ktoré používate v telefóne. V prípade problémov s párovaním, alebo s bežnou prevádzkou tieto programy vypnite.
- v prípade problémov vyskúšajte párovanie s iným telefónom, tým vylúčite problém v danom telefóne.

### 2. Jednotka váhy


- vždy sa uistite, že používate dostatočne nabité batérie. Slabé batérie môžu negatívne ovplyvniť funkciu spojenia prostredníctvom Bluetooth, alebo samotný proces merania. V niektorých prípadoch sa môže tiež stať, že batérie, ktoré boli dodané spolu s výrobkom, môžu mať vplyvom skladovania a prepravy zníženú kapacitu, preto je vhodné pri prípadných problémoch vyskúšať batérie nové.
- dotykové plochy váhy, vrátane ručných snímačov, udržiavajte vždy čisté. Minimalizujete tak riziko chybných meraní. Na váhu vstupujte naboso a pre zaistenie lepšej vodivosti si chodidlá a dlane navlhčite.

- Vyskúšajte založenie nového účtu, tým vylúčite problém s chybnou aktiváciou účtu;
- V priebehu párovania a používania udržiavajte vaše smart zariadenie v blízkosti váhy (najlepšie do vzdialenosti cca 2 m).

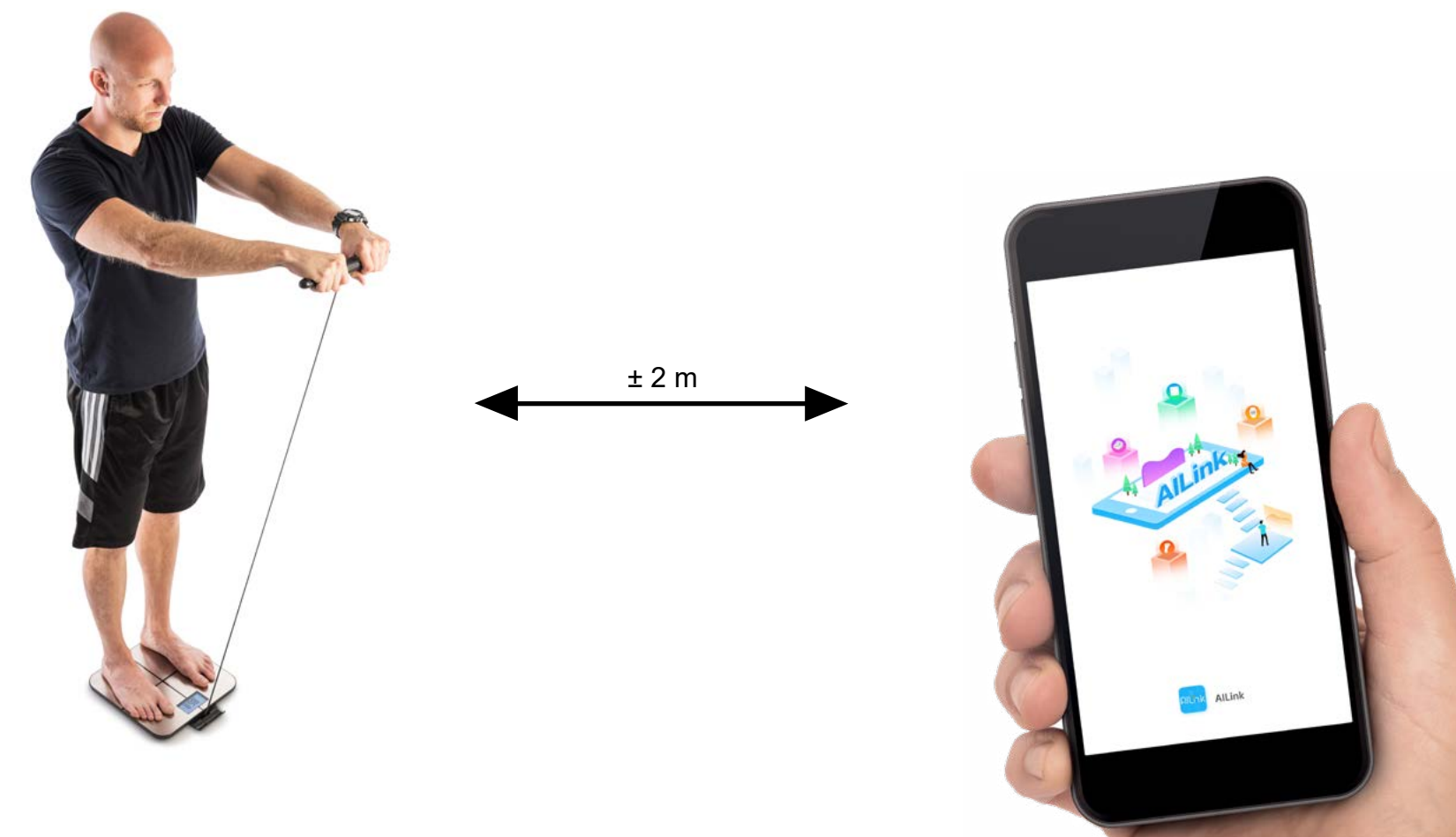


## 5. VÁŽENIE A ANALÝZA

1

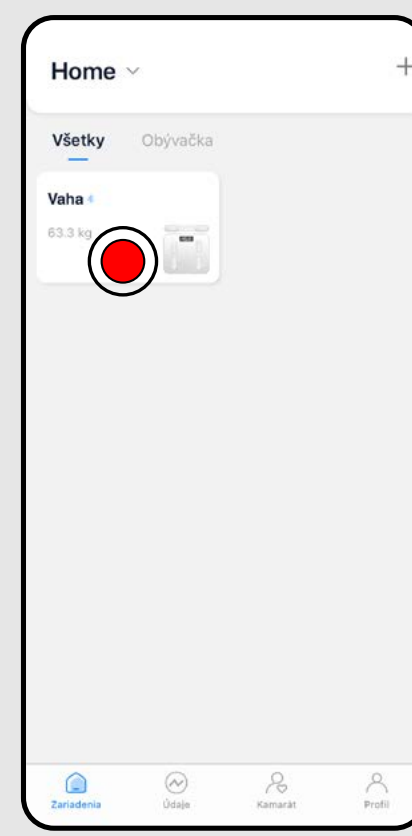


- Po zapnutí aplikácie a úspešnom spárovaní kliknite na pole/ikonu spárovanej váhy.
- Tým prejdete z obcejnej časti aplikácie do časti pre ovládanie a správu samotnej váhy.

2

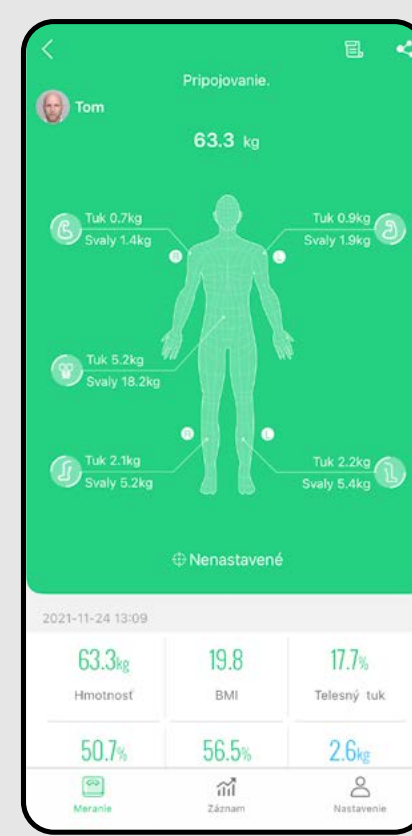


- Zobrazí sa základná obrazovka meraní.
- Kliknutím na ikonu profilu v ľavom hornom rohu si zvolíte profil (ak ich máte viac).
- Váhu nášľapom zapnete a počkajte, kým sa váha s aplikáciou spojí - informačná lišta zobrazí hlášku „**Prípojenie úspešné**“.

3

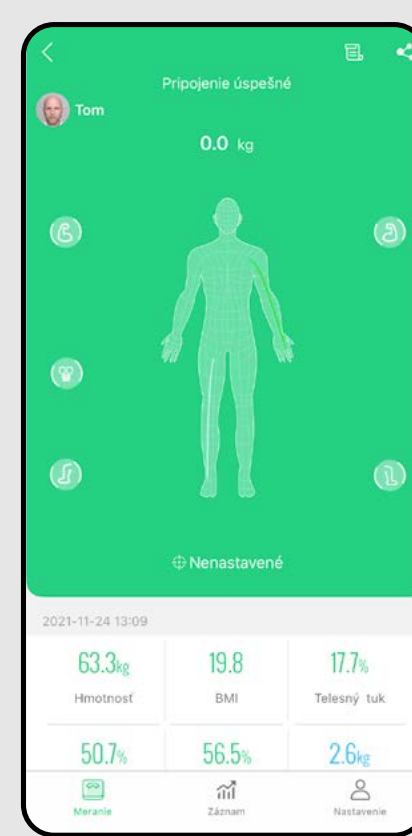


- Teraz môžete zahájiť praktické váženie meraní telesných parametrov.
- Postavte sa na váhu, uchopte ručný snímač, počkajte na zváženie/zmeranie.
- Informačná lišta a grafické prostredie okolo torza tela vás bude informovať o aktuálnom stave meraní.

4

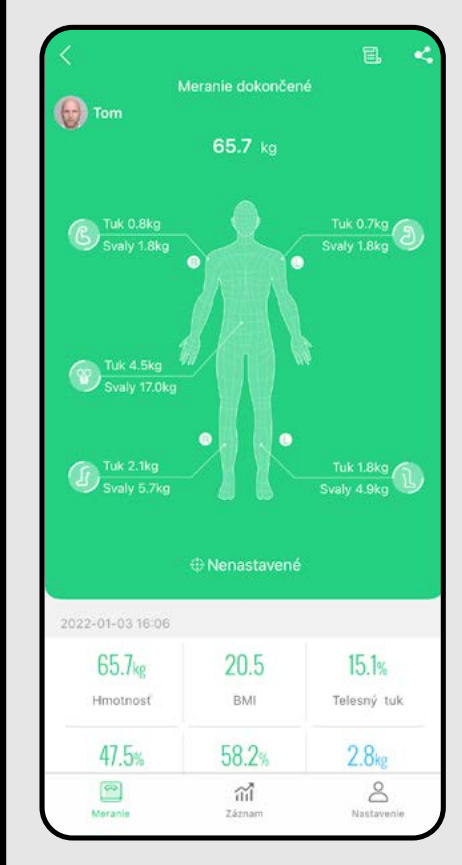

- Po úspešnom dokončení meraní zobrazí informačná lišta informáciu, že meranie bolo dokončené.
- Zároveň sa zobrazia výsledky v grafike torza tela a v spodnej časti aplikácie.

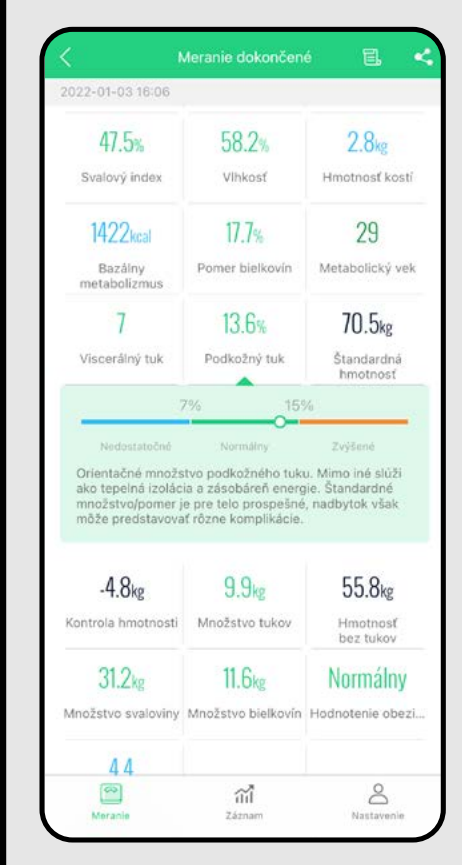


- U jednotlivých zmeraných parametrov v spodnej časti môžete rozkliknutím zobrazit' informatívny textový komentár.

### POZNÁMKY

- Majte prosím na pamäti, že namerané hodnoty sú iba približné a môžu byť nepresné v porovnaní s výsledkami skutočných medicínskych analýz. Nakoľko je meranie ľudského tela veľmi zložitá a nákladná, používajú rôzni výrobcovia, rôzne orientačné metódy meraní. Často sa tak od seba odlišujú aj výsledky týchto profesionálnych zariadení. Z tohto dôvodu je odporúčané používať jedno zariadenie a na ňom pozorovať vývoj trendu jednotlivých parametrov.**
- Ak zlyhalo pripojenie váhy, uistite sa, že máte na telefóne aktívny Bluetooth, potom kliknite pre opätovné pripojenie na text v informačnej lište. Prípadne si prečítajte inštrukcie v kapitole 3.
- V prípade, že meranie či analýza zlyhala, skúste celý proces váženia/merania zopakovať. Prípadne si prečítajte inštrukcie v kapitole 3.


## 6. ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV

1

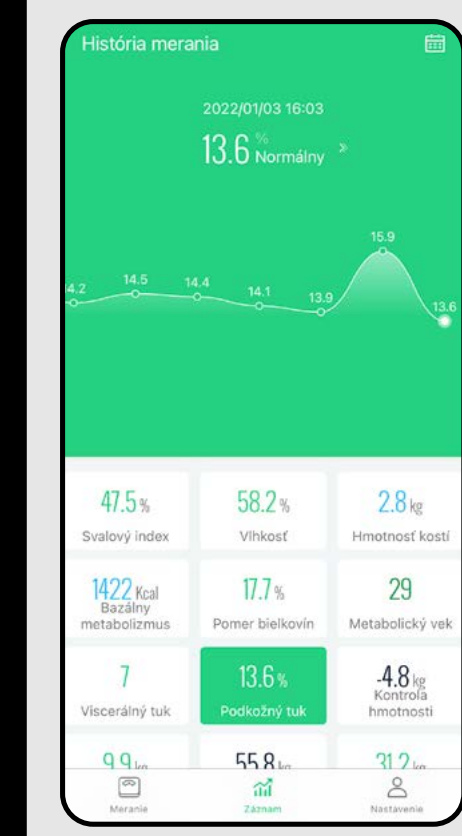

- Kliknite na ikonu „**Záznam**“ na spodnej lište aplikácie. Tým prejdete do sekcie grafického znázornenia výsledkov meraní.
- Kliknutím na jednotlivé parametre v spodnej časti aplikácie zobrazíte ich graf.
- Na zobrazenie kalendára kliknite na ikonu v pravom hornom rohu, alebo na pole výsledkov meraní.


2

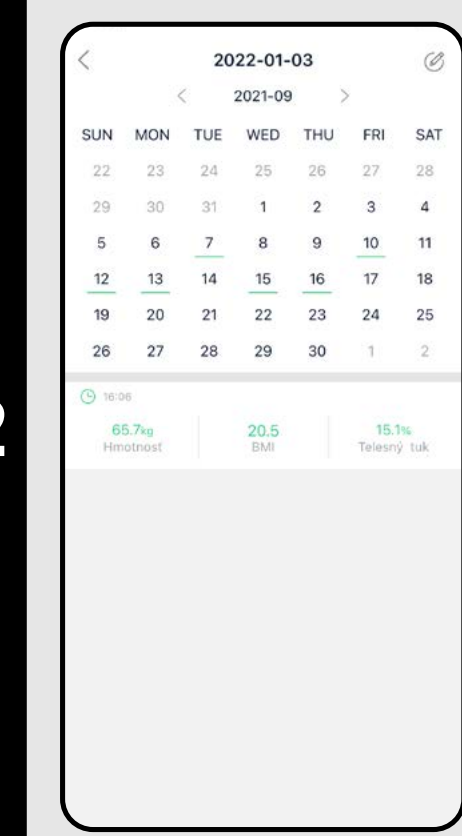

- V rámci kalendára vidíte, v ktorých dňoch bolo meranie vykonané. Kliknutím na jednotlivé dni zobrazíte dané merania v spodnej časti pod kalendárom.

**Tip:**  
V kalendári môžete listovať pomocou šípok v jeho hornej časti.

3

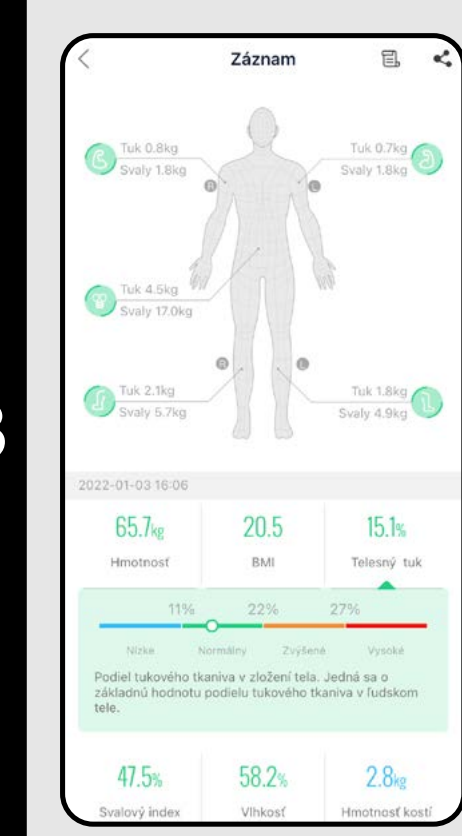


- Kliknutím na jednotlivé merania potom zobrazíte nasledujúci záznam, ktorý potom môžete ďalej zdieľať.



### 7. ZDIEĽANIE VLASTNÝCH VÝSLEDKOV


Aplikácia AiLink umožňuje niekoľko možností, ako zdieľať svoje výsledky. V princípe umožňuje zdieľať vždy iba jednotlivé merania. K jednotlivým obrazovkám zdieľania sa dopravíte podľa schémy na tejto stránke.

Vždy si však môžete vytvoriť tzv. „screenshot“, teda záznam obrazovky akejkoľvek časti aplikácie, s ktorým potom pracujete ako s akýmkoľvek iným obrázkom.

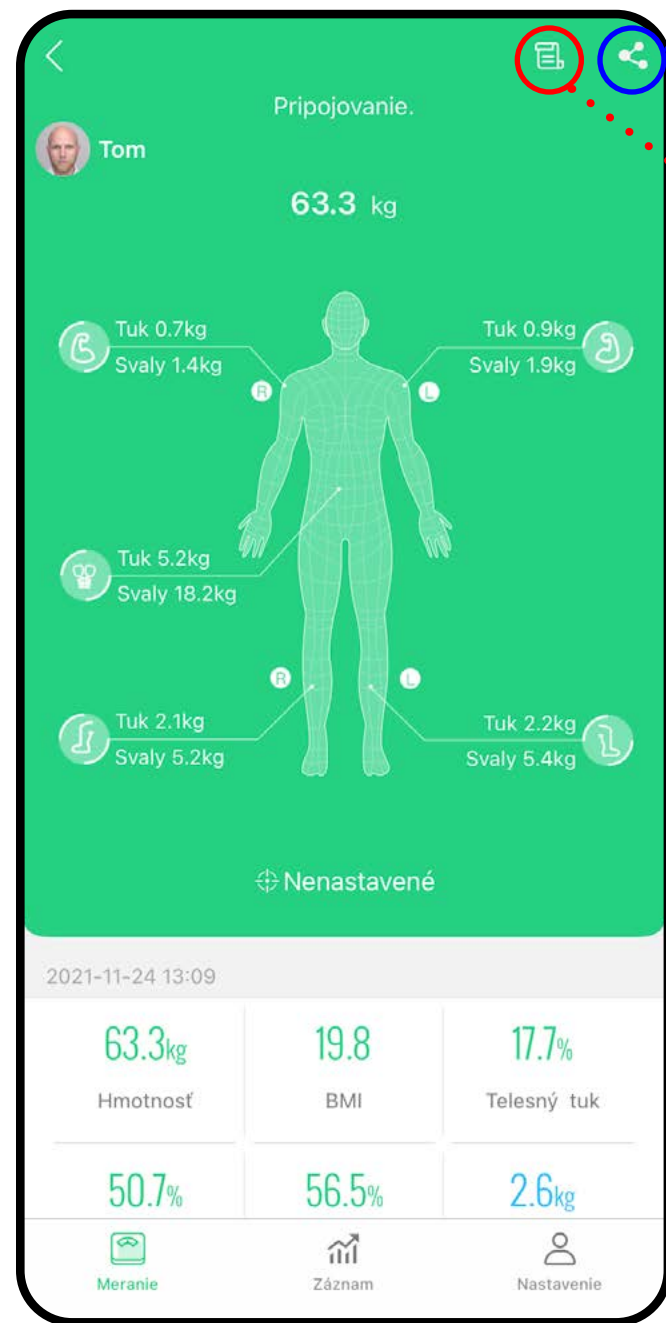


### Záznam posledného merania

V základnej obrazovke nájdete výsledky posledného merania bez nutnosti prechádzania histórie. Je možné tak skontrolovať výsledky ihneď po zmeraní.

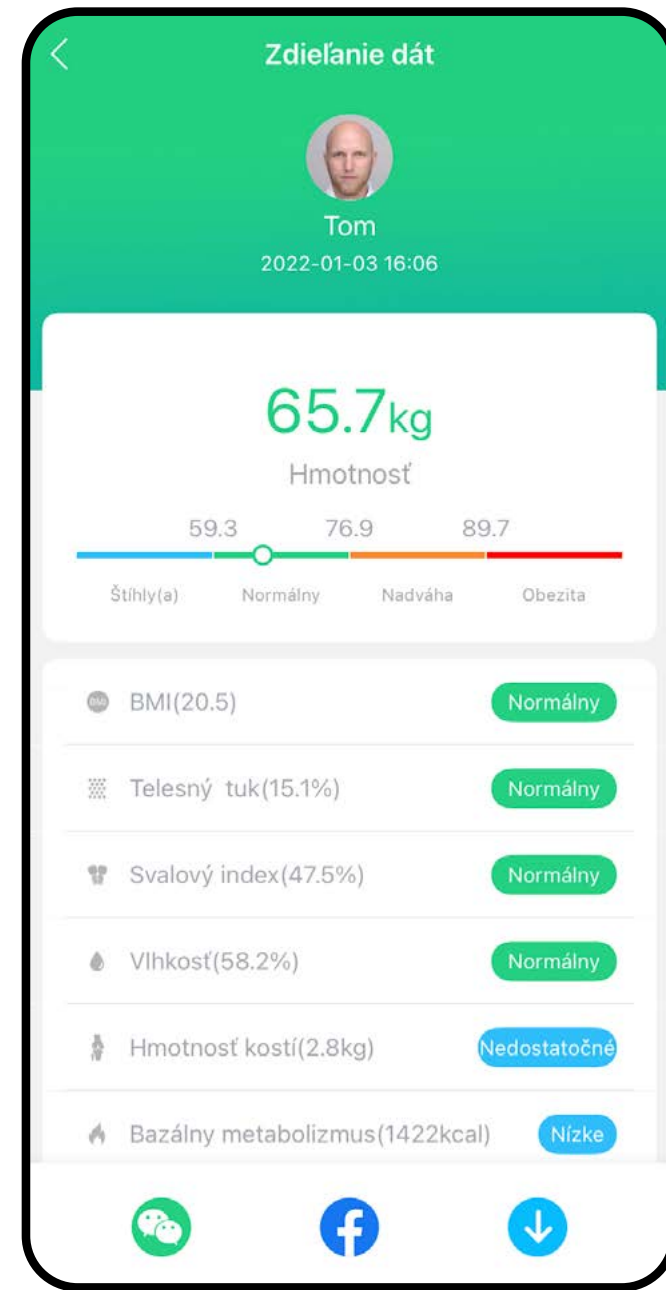

### Zdieľanie konkrétneho merania

Základná podoba reportu konkrétneho merania, ktoré je možné buď priamo stiahnuť do úložiska zariadenia, alebo zdieľať pomocou pripojených sociálnych sietí (Facebook, WeChat) prostredníctvom príslušných tlačidiel v spodnej lište.

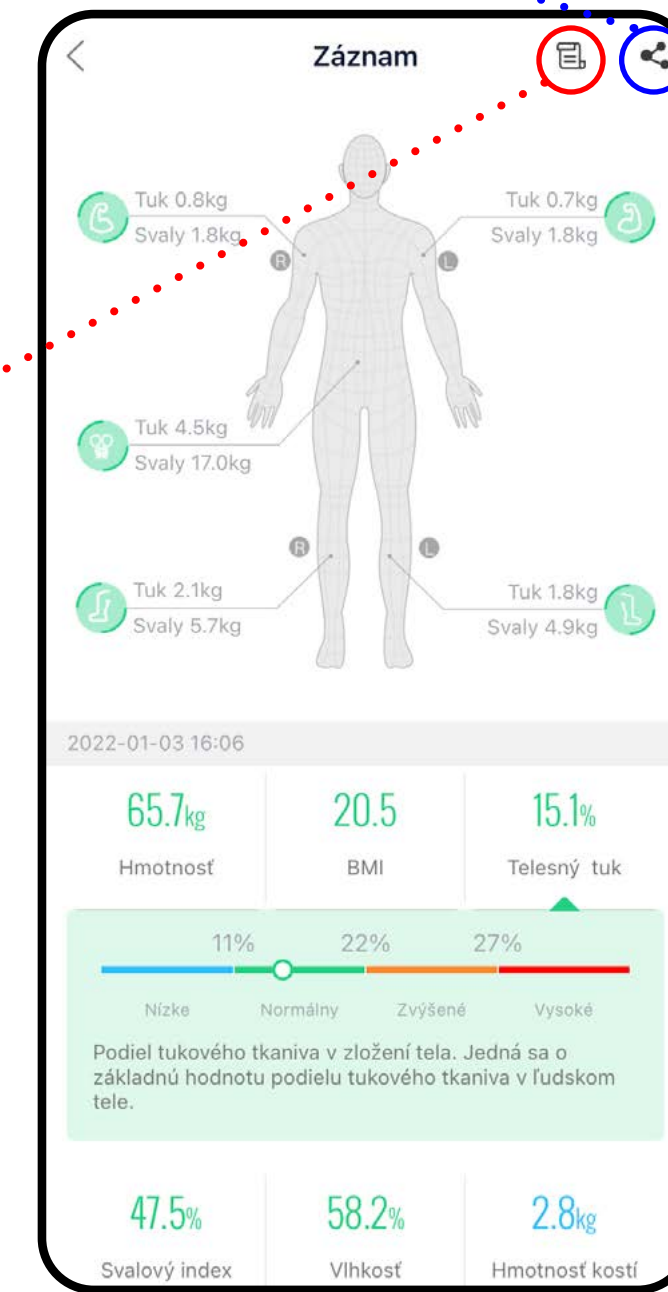

### Záznam konkrétneho merania

Toto zobrazenie záznamu konkrétneho merania získate v sekcii „Záznam“ – teda v histórii meraní, ako je znázornené v kap. 6.3


### Podrobnejšia správa o meraní

Aplikácia vygeneruje podrobnejší report, ktorý sa vzťahuje k vybranému meraniu. Report je možné stiahnuť do úložiska (kliknutím na ikonu šípky v spodnej časti obrazovky) zariadenia vo formáte obrázka a potom s ním ďalej pracovať. (Nie je možné ho však priamo z aplikácie zdieľať na sociálnych sieťach).



## 8. KAMARÁT - ZDIEĽANIE MERANÍ

1

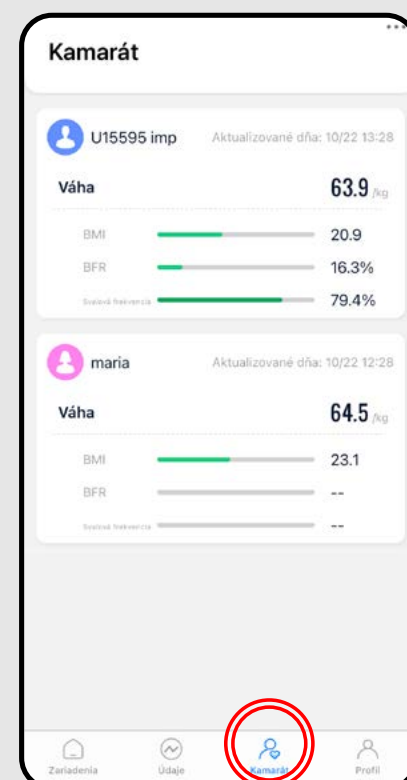

- Popri možnosti zdieľať vlastné výsledky umožňuje aplikácia tiež vzájomné prepojenie užívateľských účtov AiLink.
- Týmto spôsobom môžete nazrieť do výsledkov osoby, s ktorou ste spojení a naopak – táto osoba uvidí vaše výsledky.
- **Príklad:** na ilustrácii vľavo vidíte, že aktuálny profil zdieľa svoje výsledky s užívateľom „imp“. Užívateľ IMP obsahuje viac profilov, rozhodol sa však zdieľať iba svoj hlavný profil a profil užívateľa „maria“.

- Pre pridanie nového priateľa je nutné, aby jeden z účtov vstúpil do časti „Kamarát“ a klikol na „...“. Následne máte k dispozícii 2 možnosti:

1) Pomocou možnosti „**Naskenujte to**“ je možné z vášho telefónu naskenovať QR kód, ktorý dostanete od druhého účtu, s ktorým chcete dáta zdieľať. QR kód získate tak, že na telefóne druhého účtu kliknete na možnosť „**Môj QR kód**“, tento QR kód naskenujte a potvrdíte zdieľanie profilov.


- 2) Pomocou možnosti „**Vyhľadajte ID / účet**“ zadajte e-mail účtu druhého účtu a potvrdíte.

- Hneď ako pošlete druhej strane žiadosť, zobrazí sa jej v aplikácii upozornenie v sekcii „Kamarát“, u ikony sa zobrazí jedna zo zobrazených červených značiek (👤/👤). Potom zvolíte „...“, prejdíte na „**Správy priateľov**“ a potvrdíte prijatie žiadosti.

**Poznámka**


Účet, ktorý žiadosť odosiela, ako aj účet, ktorý žiadosť prijíma, si pri odoslaní/prijatí žiadosti môže zvoliť, aké svoje podprofile bude zdieľať druhej strane.

2

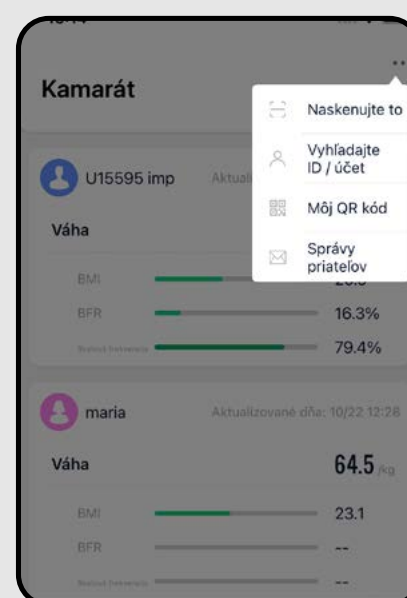

- Ak chcete zmeniť nejaké parametre u zdieľaného účtu (napr. meno účtu, zmazanie zdieľaní, zmena zdieľaných podprofilov), kliknite v sekcii „Kamarát“ na daný profil a následne na ikonu nastavení „⚙“.


3

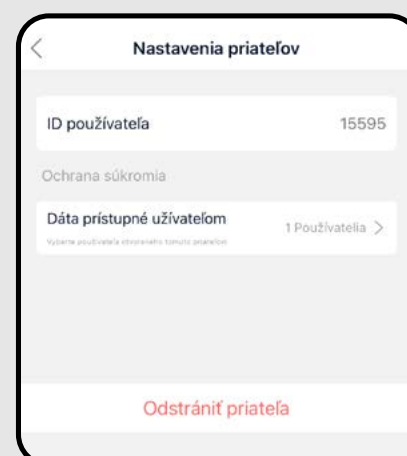

## 9A. NASTAVENIA - OBECNÁ časť

Aplikácia Vám umožňuje 2 základné možnosti nastavení. Nastavenie v rámci obcej časti aplikácie, (ktorá je spoločná pre správu všetkých výrobkov, ktoré sa v aplikácii používajú) a nastavení v rámci aplikačnej časti určenej pre váhu ETA. Niektoré nastavenia sa v oboch prípadoch prekrývajú, niektoré sú špecifické.

1

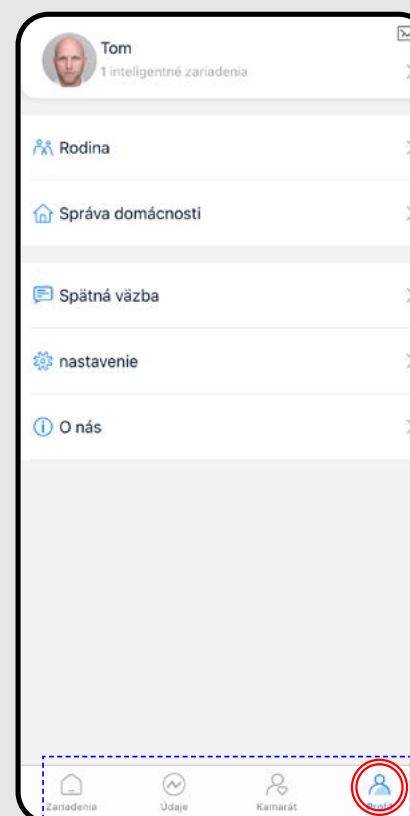

- **V obecnej časti je možné nastaviť:**

- Úprava hlavného profilu** (viď nižšie 9A-2)
- Správa profilov** (viď nižšie 9A-3)


- Správa domácnosti** - Správa domácností, miestností a s nimi spojenými produktami. Pre účely používania iba váhy ETA je táto funkcia zbytočná.

- Spätná väzba** - Je možné napísať vývojárom aplikácie. **Toto pole skôr nepoužívajte.** Odporúčame použiť formulár priamo v aplikačnej časti, viď. 9B-1)!

- Nastavenie** - Možnosť prepnutia jazyka aplikácie a zobrazenia pripojených zariadení.

- O nás** - Zobrazí verziu aplikácie a možnosť nahliadnuť do zmluvných podmienok aplikácie.

2

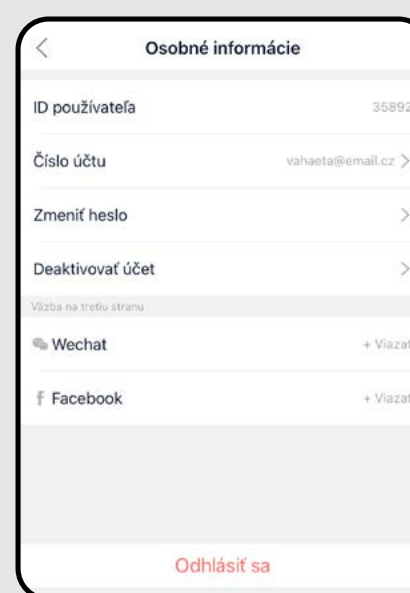


- Po kliknutí na ikonu profilu (👤) prejdíte do nastavenia profilu.

- Je možné tu zistiť ID účtu, zmeniť heslo, alebo deaktivovať účet.

- Možnosti aplikácií tretích strán (WeChat, Facebook) v tejto časti aplikácie slúžia iba pre informácie, tu ste prihlásení k účtu pomocou týchto služieb.

3

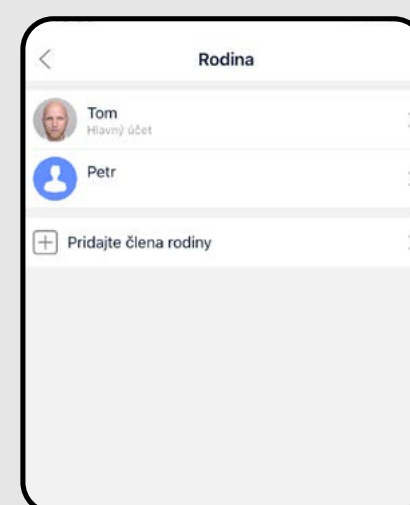


- Sekcia „**Rodina**“ umožňuje jednoduchú správu profilov. V ponuke vidíte ako hlavný profil, tak všetky vytvorené podprofile.

- Po rozkliknutí daného profilu môžete meniť základné informácie (foto, prezývku, narodeniny, pohlavie), prípadne môžete profil vymazať.

- Pre vytvorenie nového podprofilu kliknite na „**Pridať člena rodiny**“.

## 9B. NASTAVENIA - APLIKAČNÁ časť

1

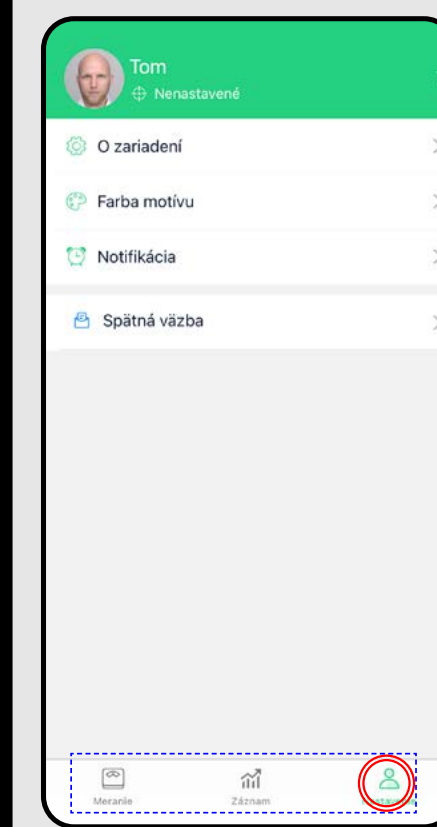

- **V aplikačnej časti je možné nastaviť:**

- Úprava profilov** (viď. nižšie 9B-2)


- O zariadení** (váhy) - Možnosť premenovania a odstránenia zariadení, zmeny jednotiek meraní a info o firmware.

- Farba motívu** - Nastavenie farebného motívu aplikácie.

- Notifikácia** - Funkcia tzv. budíka. Je možné nastaviť 3 rôzne časy pripomenutia váženia.

- Spätná väzba** – Je možné napísať vývojárom aplikácie, pripomenutia, otázky a pod. **Využívajte túto možnosť!** (radšej ako pole v obecnej časti nastavení).

2

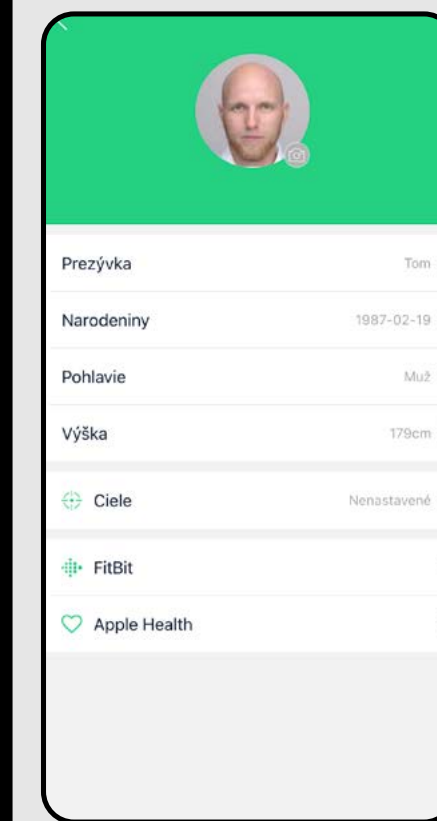



- Po kliknutí na ikonu profilu (👤) prejdíte do nastavenia profilu.

- Je možné tu meniť prezývku, údaje o narodení, pohlaví, výške a požadovanom cielei hmotnosti.

- Zároveň tu je možné spárovať aplikáciu s aplikáciami tretích strán, ktoré budú prijímať vybrané parametre zamerané váhou ETA. Jedná sa o aplikáciu FitBit a Google Fit (príp. Apple Health pre užívateľov Apple zariadení).



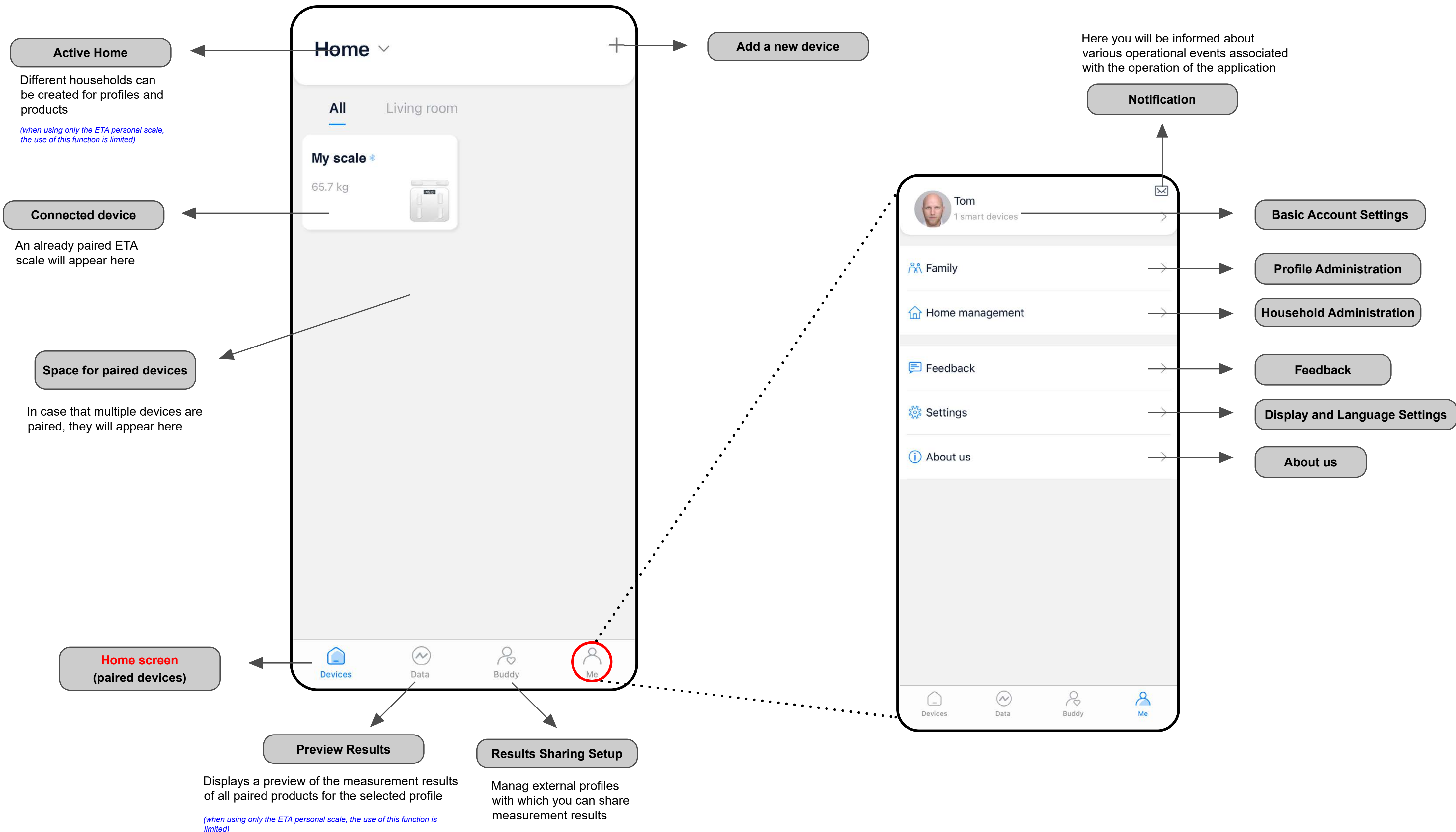

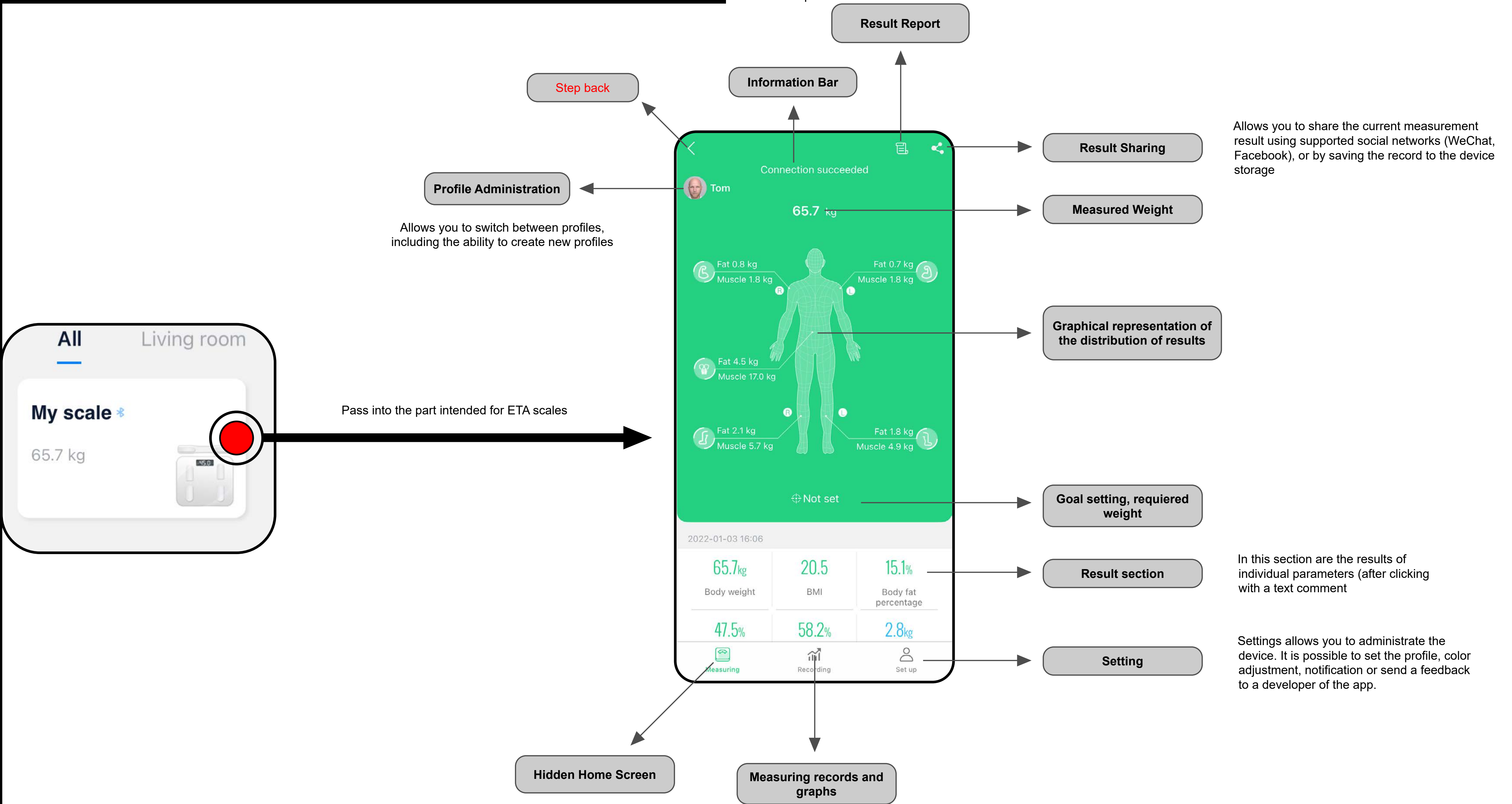



# USER MANUAL FOR THE AILINK APP

Dear customer,

Thank you for your trust in ETA product. This manual is intended for all owners of the ETA8781 scale who want to reach its full potential with the AILINK application.

In case of questions about the function of the application, or in case of any problems, first go to the above-mentioned website and even if the information provided there does not help you to solve your request, you can contact us at the information e-mail: [info@etasince1943.com](mailto:info@etasince1943.com)

Further information, advice and tips can be found also on our websites:

[www.etasince1943.com/care](http://www.etasince1943.com/care)

We are constantly updating this website to gather the latest information about the product.

## 1. APPLICATION INSTALLATION

You can find this application in the database of Apple Store or Google Play, or can also use this QR code for quickening:



Download and install the application to your mobile phone (tablet).


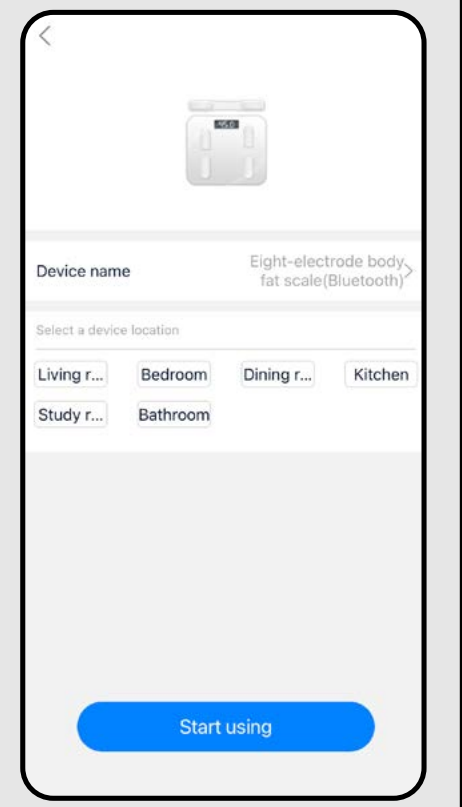
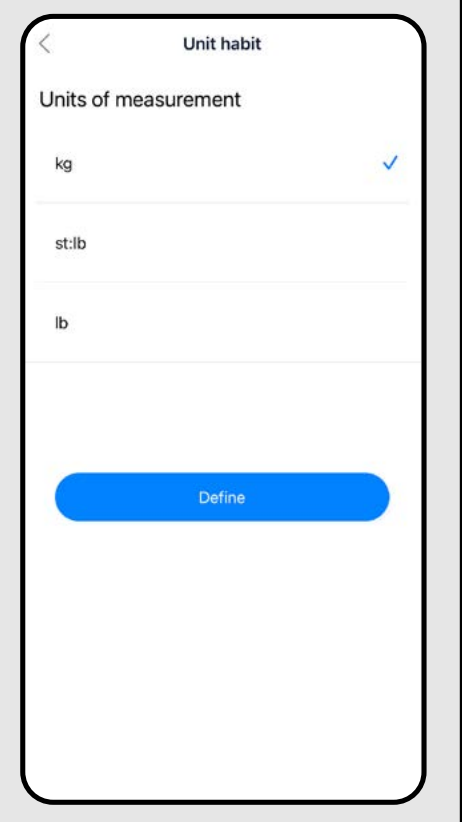
KOMPATIBILITA	
Mobile phone's (tablet's) operation system	Android 6.0 and up IOS 9.0 and up

## 2. ACCOUNT REGISTRATION AND LOGIN

<b>1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Once you have downloaded the application, turn it on. The basic login screen appears.</li> <li>The screen also allows you to switch to register a new account, reset your password if it is lost, or log in using third-party applications.</li> <li>If you do not have an account, proceed to „<b>Register</b>“ (or sign in with a third-party application, if applicable)</li> <li>Enter your account name to log in (email) and password, then click on „<b>Log in</b>“. In the case of the Android OS, you must check the terms of use box in the lower left corner before logging in.</li> </ul>
<b>2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Enter a valid e-mail address and choose a secure password.</li> <li>Then press „<b>Send</b>“, the system will send you a verification code to the e-mail you entered, which you will then enter in the field „<b>Verification</b>“. (in case that the code is not delivered after the specified time limit, do not request a new one and wait a few minutes, the code may arrive with a delay.)</li> <li>Confirm the process by pressing „<b>Register</b>“.</li> </ul>
<b>3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>If you've lost your password, you can renew it by means of the e-mail address used for creating the account.</li> <li>Enter this e-mail and as soon as you receive a verifying code, write it to the respective field.</li> <li><b>Remark: It could take a certain time until the verifying code comes up. Please be patient. At the same time, check that the code is not blocked by the spam basket/ filter of your e-mail client. Ideally, use common email addresses / clients (eg. Gmail, Yahoo, etc.)</b></li> </ul>

## 3. CONNECTING THE DEVICE

<b>1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>After successful login, the home screen will appear, in this case without a paired device.</li> <li>Click to connect the application with the scale „<b>Add device</b>“</li> </ul> <p><i>* If you already have a device paired, use the „+“ icon in the upper right corner, which will allow you to add another device in the same way.</i></p>
<b>2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>A list of different types of devices for which the application is intended appears.</li> </ul> <p><b>Note:</b> ETA uses the application only for the ETA8781 scale. No other devices listed in the application are currently supported.</p>
<b>3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>The best way is to automatically find the device you go to by clicking „<b>Devices nearby</b>“.</li> <li>The search for nearby devices starts automatically.</li> <li>Switch on the scale by stepping on it.</li> <li>When the scale appears in the application, click on its icon.</li> </ul>

4		<ul style="list-style-type: none"> <li>The connecting process starts. Once the process is complete, the application will display information about the successful pairing.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>In the next step, the application offers the possibility to add your own balance name and assign and categorize the balance according to the room in which it will be used.</li> <li>Click to confirm „<b>Start using</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Note</b> The room categorization feature makes more sense when using multiple products that the application supports. In our case (ETA scale only) you do not have to use this function.</p>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>In the last step of setting up the device, you will be offered the option to set the weight units.</li> <li>Click to confirm „<b>Set / Define</b>“.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Note</b> To cancel pairing / deleting the device, do so in the settings section, see 9B-1-b</p>

### 4. BASIC ADVICE AND TIPS FOR USE

Using the ETA scale with AiLink is intuitive and we did not notice any significant problems or difficulties during our testing you might encounter while using it. Nevertheless, smart products generally have an increased risk associated with incompatibility of mobile devices or problems with wireless connectivity. Therefore, we prepared a set of basic advice and recommendations on how to solve problems characteristic of the smart products segment.


#### 1. Smart device (mobile phone, eventually tablet):

- a) always use the current version of the application downloaded from official sources
- b) make sure your devices have supported versions of Android and iOS.
- c) have the Bluetooth function active
- d) have an active internet connection for proper communication of the application with the cloud server
- e) allow the application the required permissions, which in some cases depend on the type of operating phone. In case of problems, make sure that you do not have any parent system settings within your phone, for example, that prevent applications from using certain permissions - in which case you must grant the application an exception.
- f) the communication between the balance and the phone may be disturbed by some programs (eg VPN, firewall, etc.) that you use in the phone. In case of problems with pairing or normal operation, turn off these programs.
- g) In case of problems, try pairing with another phone to avoid the problem in that phone.

#### 2. Scale


- a) Always make sure you use sufficiently charged batteries. Weak batteries can negatively affect the function of the Bluetooth connection or the measurement process itself. In some cases, the batteries that came with the product may also have reduced capacity due to storage and shipping, so it is a good idea to try new batteries if you have any problems.
- b) Always keep the contact surfaces of the balance, including hand sensors, clean. This minimizes the risk of erroneous measurements. Step on the scale barefoot and moisten your feet and palms to ensure better conductivity.

- Try creating a new account to avoid the problem of incorrect account activation;
- Keep your smart device close to the scale (preferably within a distance of approx. 2 m) during pairing and use.

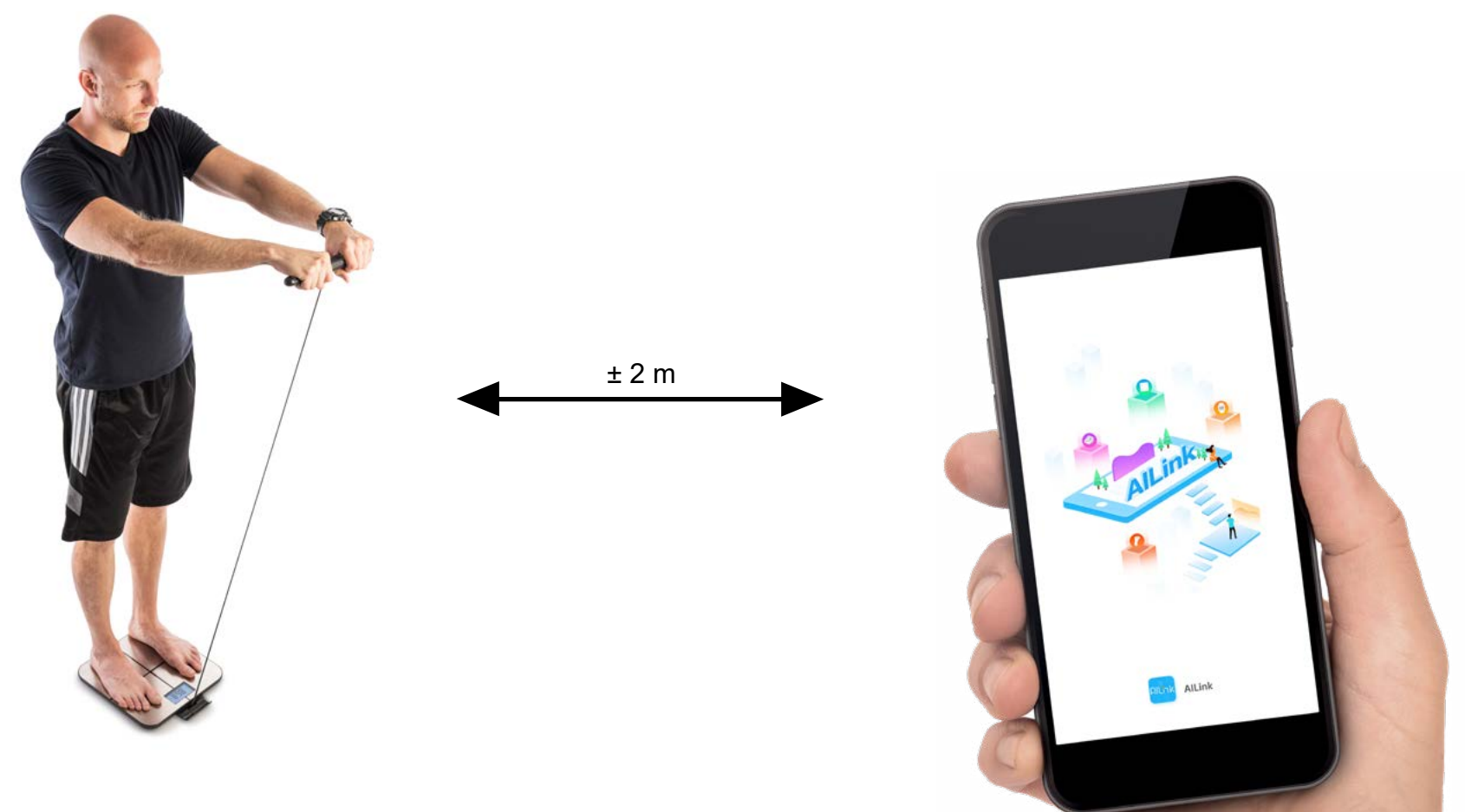




### 5. MEASUREMENT AND ANALYSIS

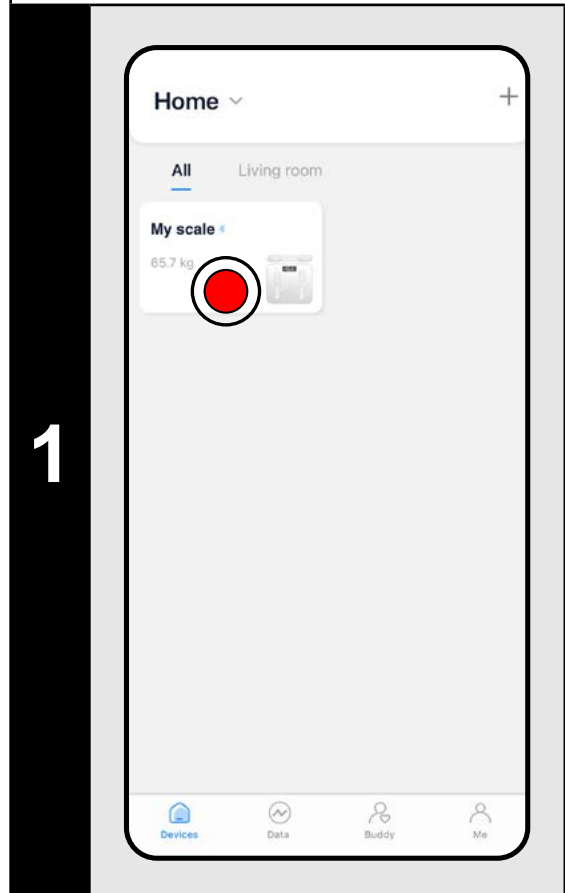


1

- After switching on the application and successful connecting, click on the field / icon of the paired balance.
- This will take you from the general part of the application to the section for controlling and managing the scale itself.

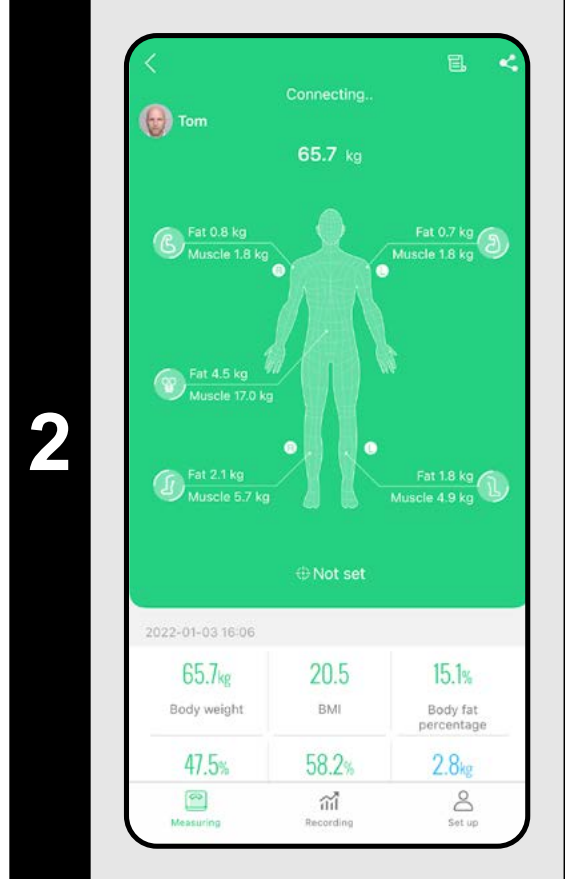

2

- The basic measurement screen is displayed.
- Click on the profile icon in the upper left corner to select a profile (if you have more than one).
- Switch on the balance by stepping on it and wait until the balance connects to the application - the information bar displays the message „**Connection successful**“.

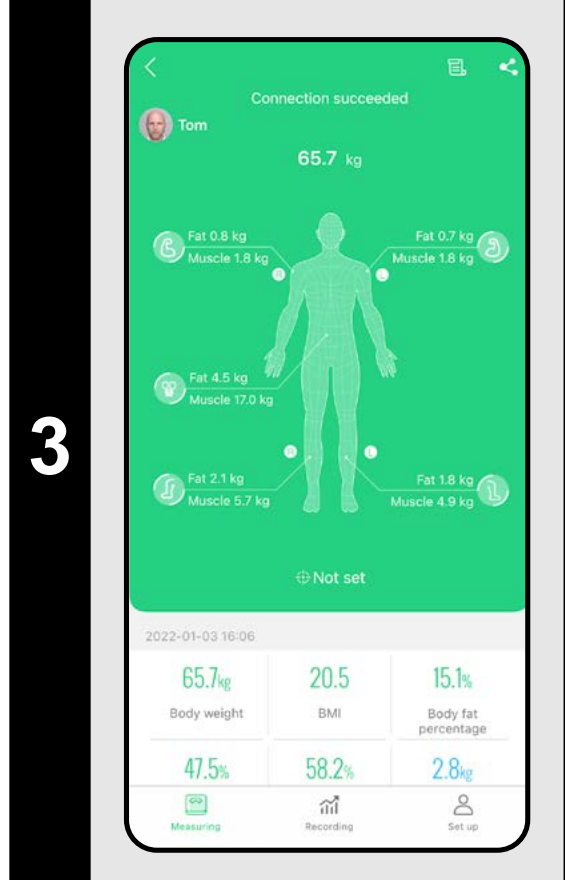


3

- You can now start the practical weighing and measurement of body parameters.
- Get on the scale, grab the hand sensor and wait for the weighing / measuring.
- The information bar and the graphical environment around the body torsion will inform you about the current measurement status.

4



- Upon successful completion of the measurement, the information bar displays information that the measurement has been completed.
- At the same time, the results are displayed in the body torsion graphics and at the bottom of the application.

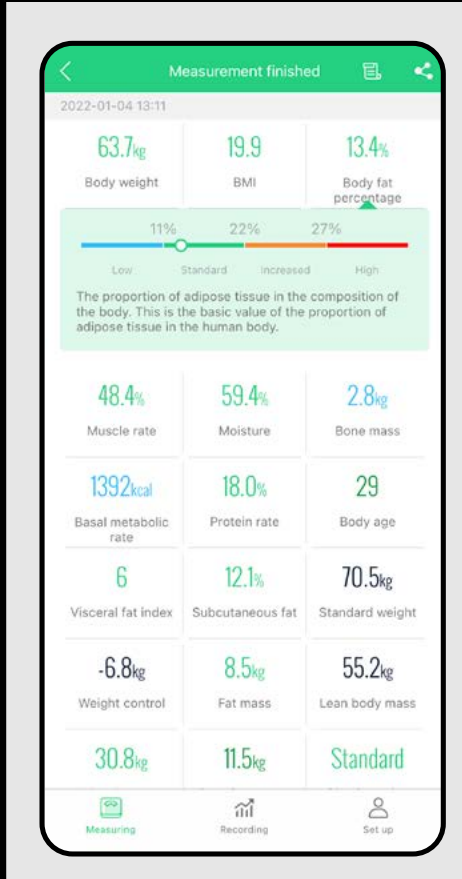


- For individual measured parameters at the bottom, you can click to display an informative text comment.

### NOTES


- **Please note that the measured values are only approximate and may be inaccurate compared to the results of actual medical analyzes. Because measuring the human body is very complex and expensive, different manufacturers use different indicative measurement methods. The results of these professional devices often differ from each other. For this reason, it is recommended to use one device and observe the development of the trend of individual parameters on it.**
- If the balance connection has failed, make sure you have Bluetooth activated on your phone, then click on the text in the information bar to reconnect. Alternatively, read the instructions in Chapter 3.
- If the measurement or analysis failed, try the whole weighing / measuring process again. Alternatively, read the instructions in Chapter 3.

### 6. RESULT VIEW

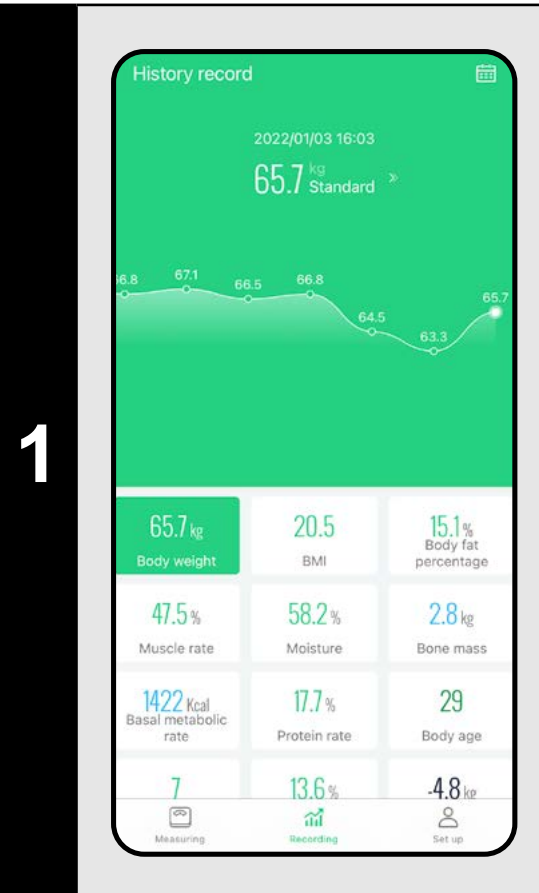

1


- Click on the „**Recording**“ icon on the bottom bar of the application. This will take you to the graphical representation of the measurement results.
- Click on the individual parameters at the bottom of the application to display their graph.
- To view the calendar, click on the icon in the upper right corner or on the measurement result field.

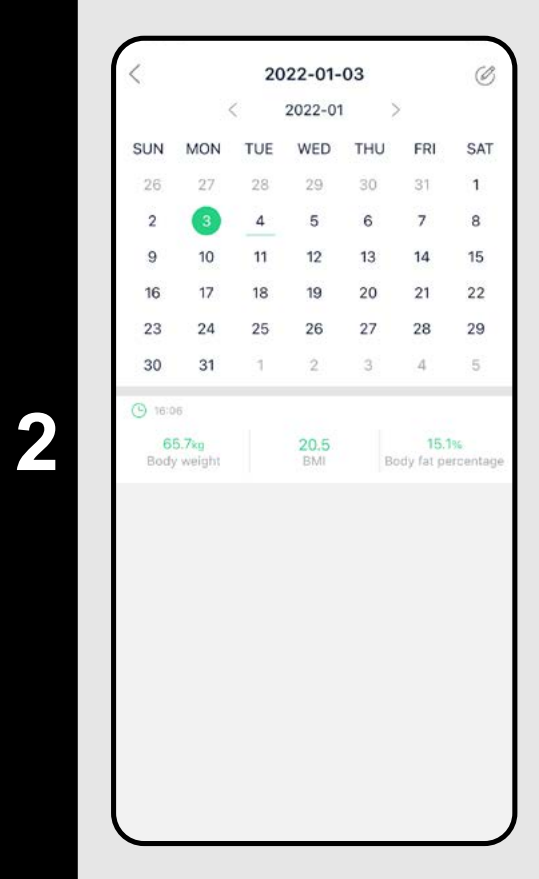

2

- Within the calendar, you can see on which days the measurement was performed. Click on the individual days to display the given measurements at the bottom below the calendar.

**Tip:**  
You can scroll through the calendar using the arrows at the top.

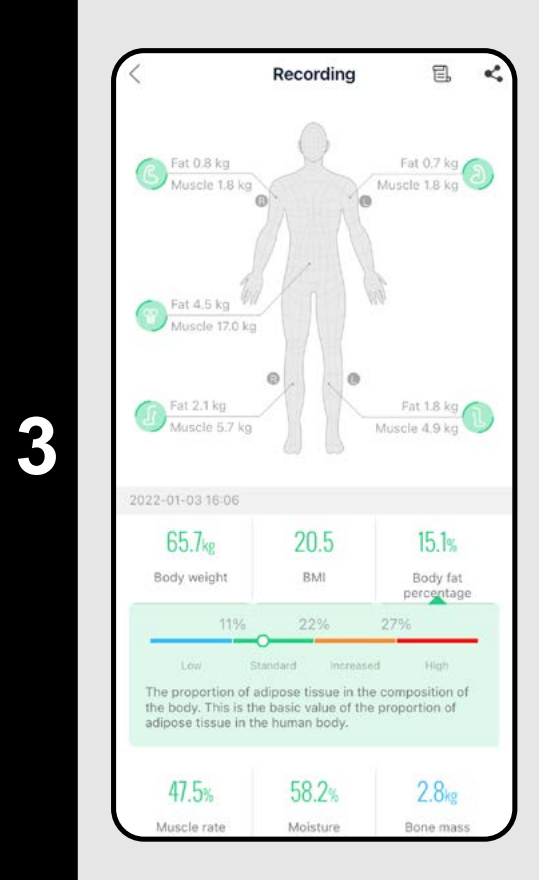

3


- Click on the individual measurements to display the next record, which you can then share.



### 7. RESULT SHARING



AiLink provides several ways to share your results. In principle, it only allows individual measurements to be shared. You will follow the individual sharing screens according to the diagram on this page.

However, you can always create a screenshot, ie a screenshot of any part of the application, with which you then work like with any other image.

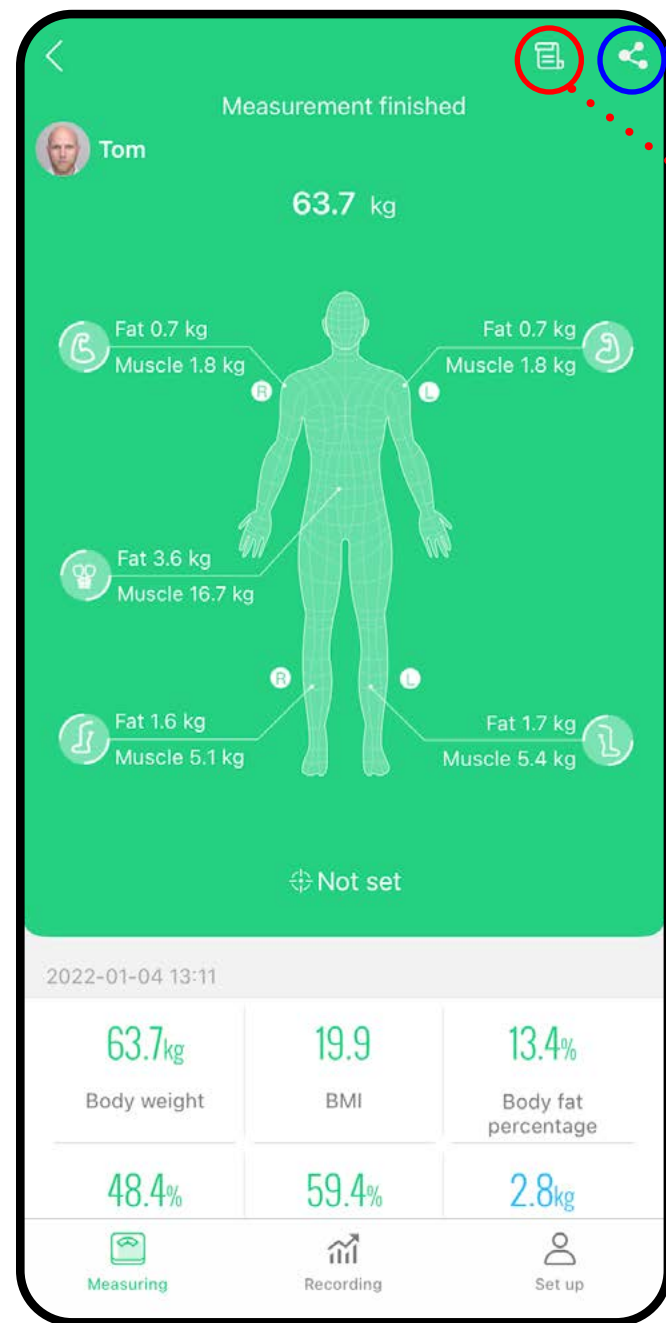


#### Last measurement record

In the basic screen you will find the results of the last measurement without having to go through the history. This allows you to check the results immediately after the measurement.

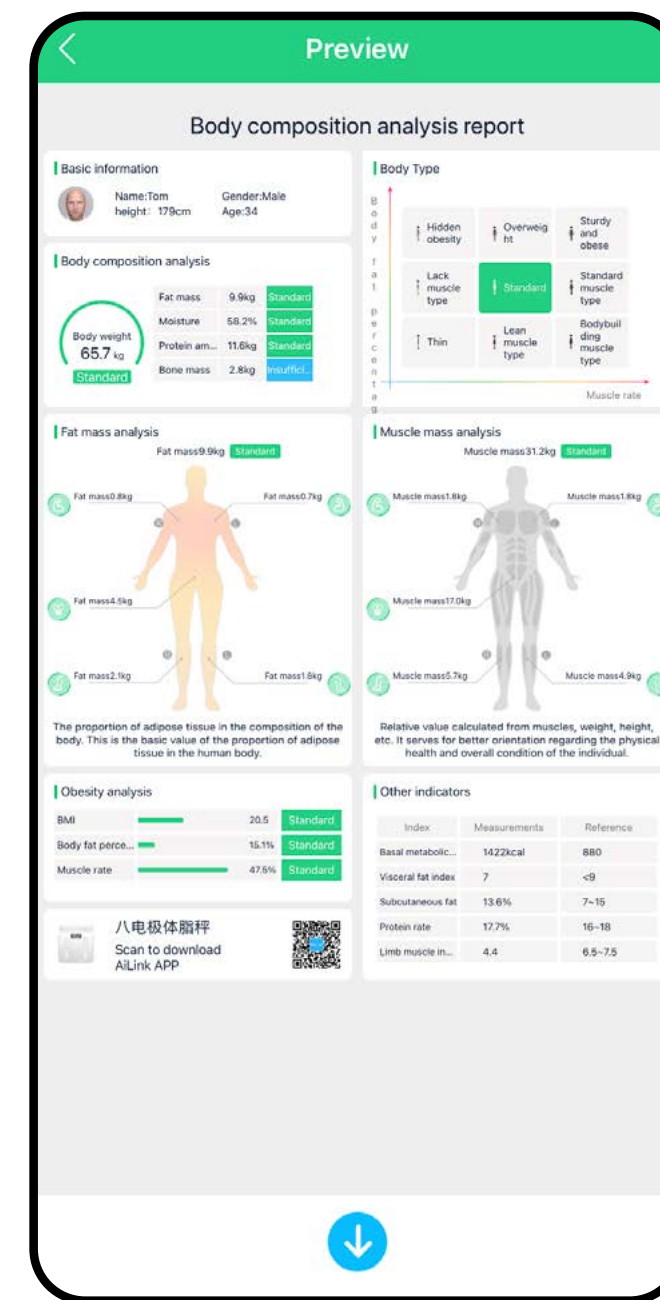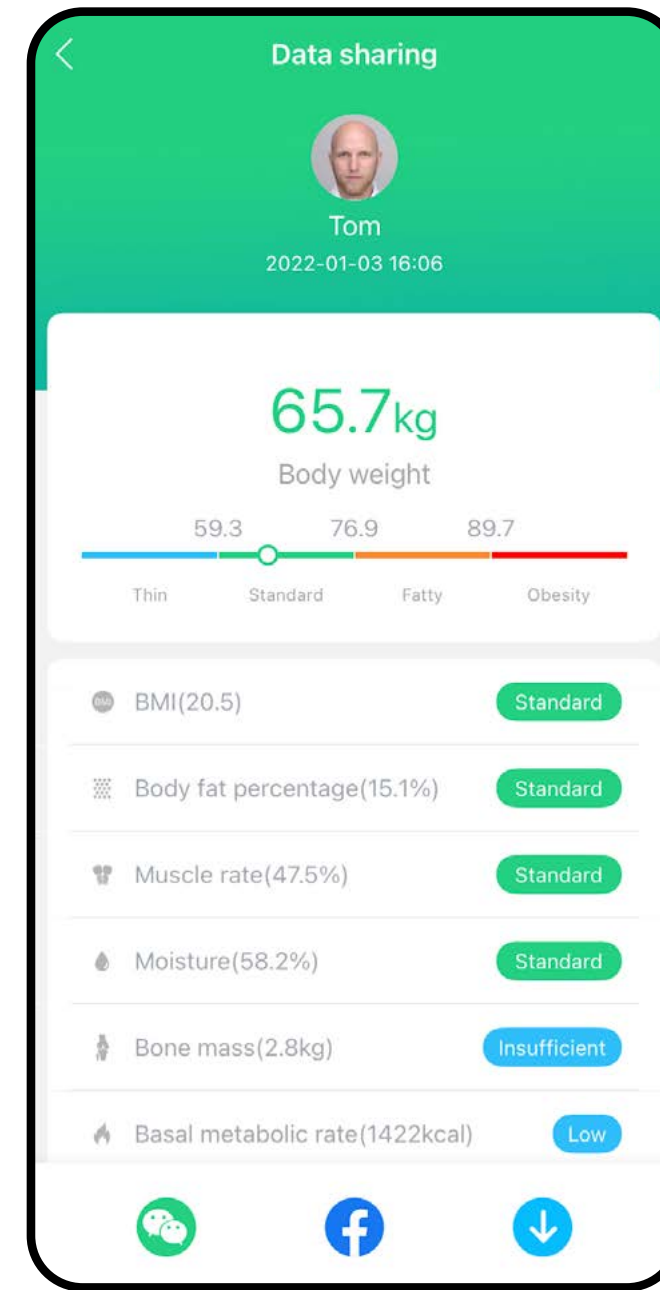

### Sharing of a specific measurement

The basic form of the report of a specific measurement, which can either be downloaded directly to the device storage or shared via connected social networks (Facebook, WeChat) via the appropriate buttons in the bottom bar.

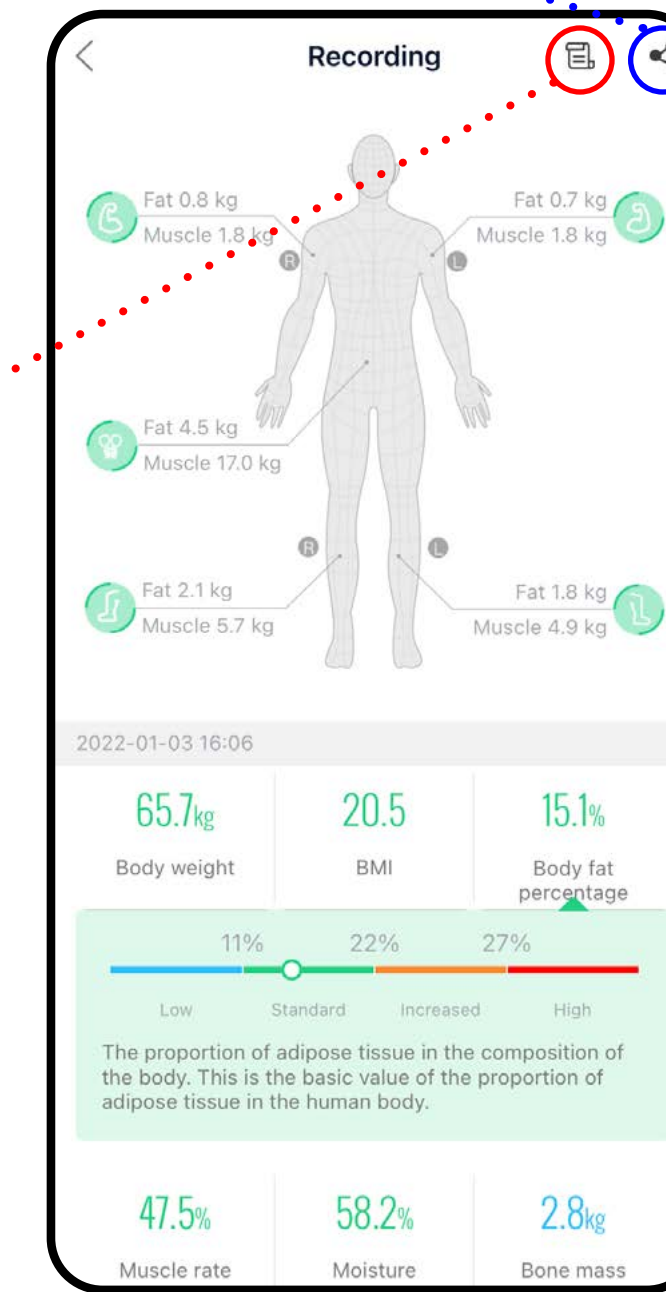

#### Specific measurement record

You can get this display of the record of a specific measurement in the „Recording“ - n the measurement history as shown in chapter. 6.3


### Detailed measurement report

The application generates a more detailed report that relates to the selected measurement. The report can be downloaded to the storage (by clicking on the arrow icon at the bottom of the screen) of the device in image format and then further worked with. (However, it cannot be shared directly from social applications on social networks.)




### 8. FRIEND – RESULT SHARING

1

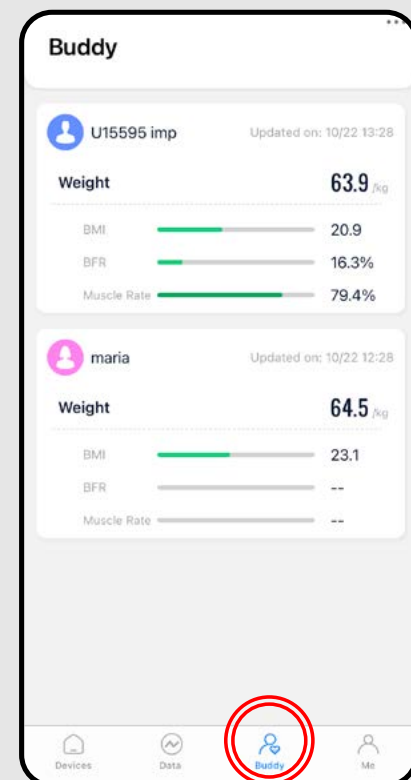

- In addition to the ability to share your own results, the application also allows you to link AiLink user accounts to each other.
- This way you can view the results of the person you are connected to and vice versa - that person will see your results.
- Example: in the illustration on the left you can see that the current profile shares its results with the user „imp“. IMP has multiple profiles, but has chosen to share only his primary profile and profile of „Maria“.

2

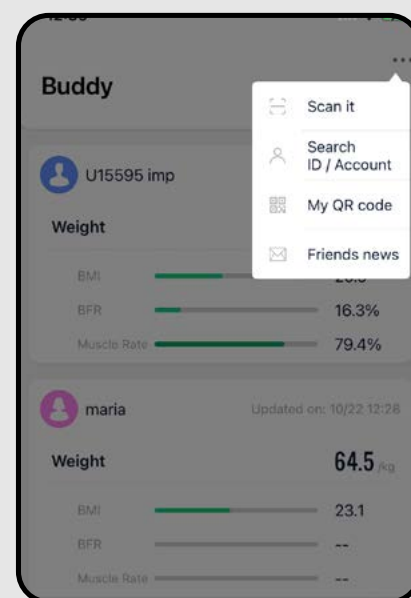


- To add a new friend, one of the accounts must enter the „**Buddy**“ and press „...“. Then you have 2 options:
  - 1) You can use the „**Scan it**“ option Scan the QR code you receive from the other account you want to share data with from your phone. You can get the QR code by clicking on „**My QR code**“, on the phone of the other account, scan this QR code and confirm the sharing of profiles.
  - 2) Use the „**Search ID / Account**“ option to enter the e-mail address of the other account and confirm.
- As soon as you send a request to the other party, a notification will appear in the application in the „Friend“, section, one of the displayed red markers (👤/👤) will appear next to the icon. Then select „...“, go to „**Friends' News**“ and confirm your request.

**Note**

The account that sends the request and the account that receives the request can choose which sub-profiles to share with the other party when sending / receiving the request.

3

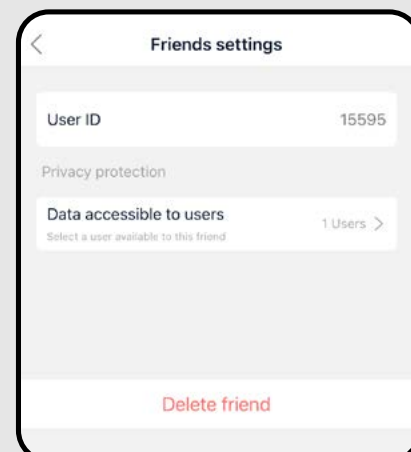


- If you want to change some parameters of the shared account (eg account name, delete share, change shared sub-profiles), click on the profile in the „**Buddy**“ section and then on the settings icon „⚙️“.

### 9A. SETTINGS - GENERAL


The application allows you 2 basic setting options. Settings within the general part of the application (which is common for the management of all products used in the application) and settings within the application part intended for the ETA scale. In both cases, some settings overlap, some are specific.

1

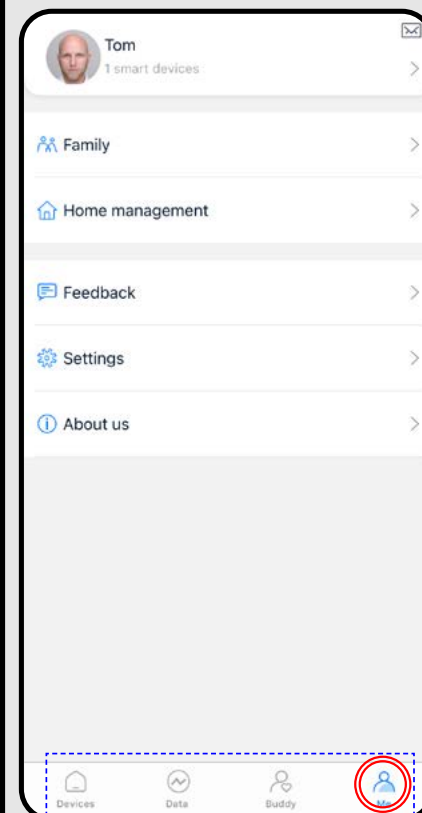


- **General section allows you to set:**
  - a) **Main profile adjustment** (see below 9A-2)
  - b) **Profile management** (see below 9A-3)
  - c) **Home management** - Management of households, rooms and related products. This function is unnecessary for the purpose of using only the ETA scale.
  - d) **Feedback** - It is possible to give a feedback to the developers of the app. Please, do not use this option. We recommend to use the form in the app.(See below 9B-1)!
  - e) **Settings** - Ability to switch the application language and display connected devices.
  - f) **About us** - Displays the version of the application and the option to view the terms and conditions of the application.

2

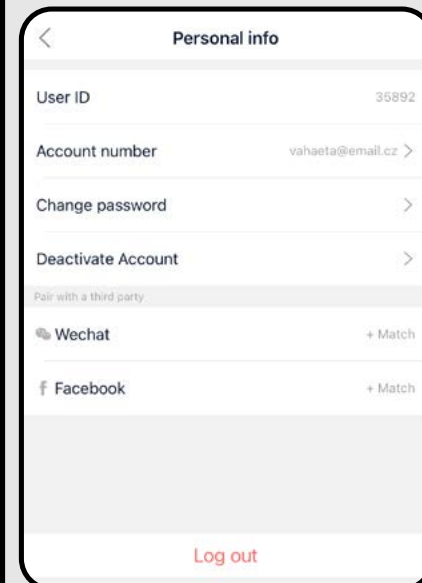

- Click on the profile icon (👤 Tom) to go to the profile settings.
- Here you can find the account ID, change the password, or deactivate the account.
- The options of third-party applications (WeChat, Facebook) in this part of the application are only used to inform you whether you are logged in to your account using these services.


3

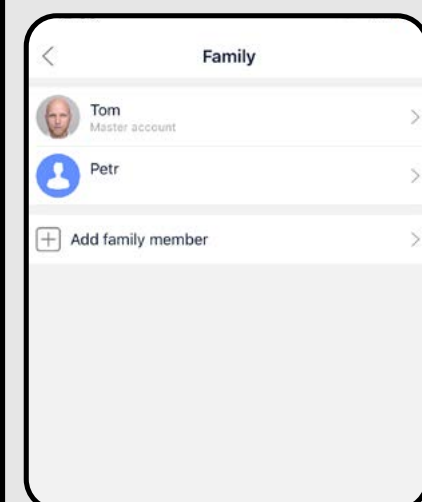

- Section „**Family**“ allows easy profile management. In the menu you can see both the main profile and all created sub-profiles.
- After clicking on the profile, you can change the basic information (photo, nickname, birthday, gender) or you can delete the profile.
- To create a new subprofile, click on „**Add family member**“.


### 9B. SETTINGS - APPLICATION

1

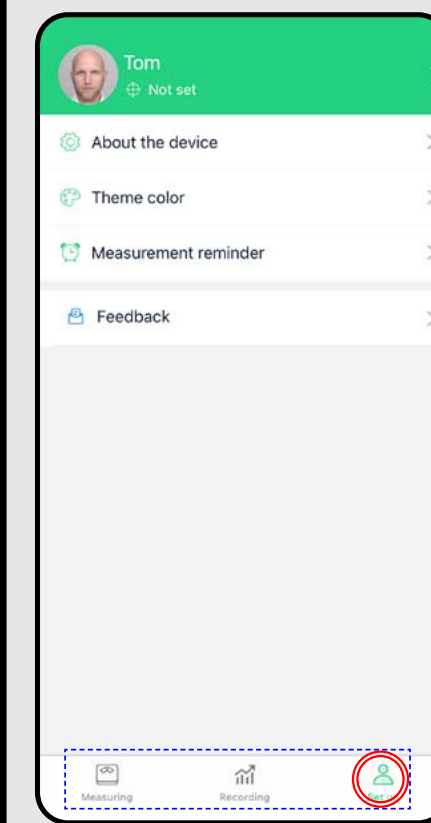


- **It is possible to set in the app section:**
  - a) **Profile edit** (see below 9B-2)
  - b) **Device management** (scale) - Possibility to rename and delete devices, change units of measurement and firmware info.
  - c) **Theme color** - Setting of the application color theme.
  - d) **Notification** - Alarm function. It is possible to set 3 different times of measuring notification.
  - e) **Feedback** - It is possible to give a feedback to the app developers. **Please use this option** (rather than feedback in the general section).


2

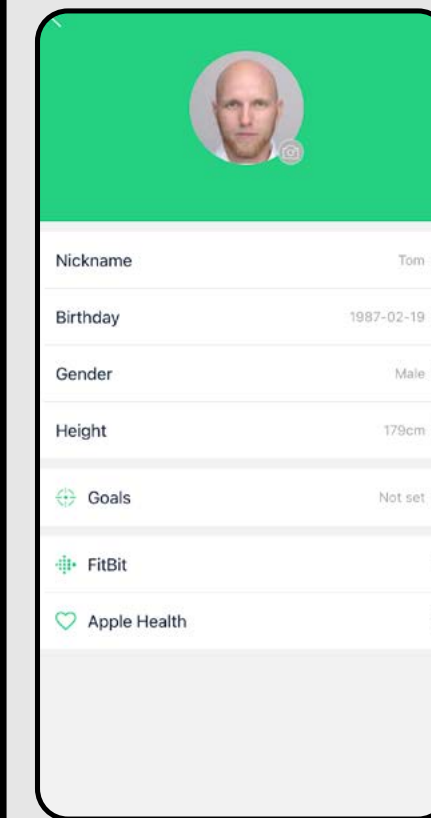

- Click the profile icon (👤 Tom) to go to the profile settings.
- Here you can change the nickname, birth details, gender, height and desired weight target.
- At the same time, it is possible to pair the application with third-party applications that will accept selected parameters measured by the ETA weight. These are the FitBit and Google Fit applications (or Apple Health for users of Apple devices).

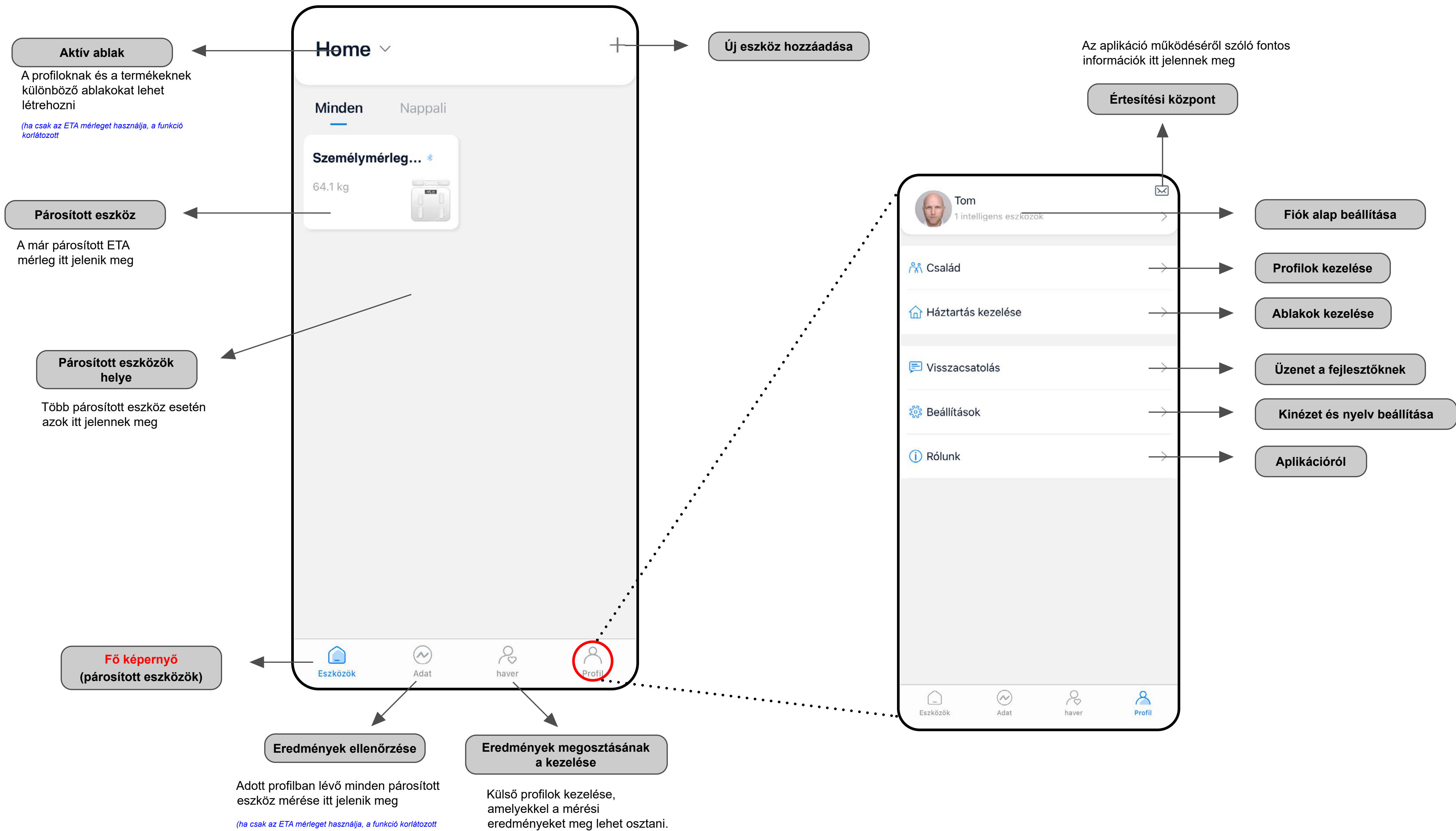



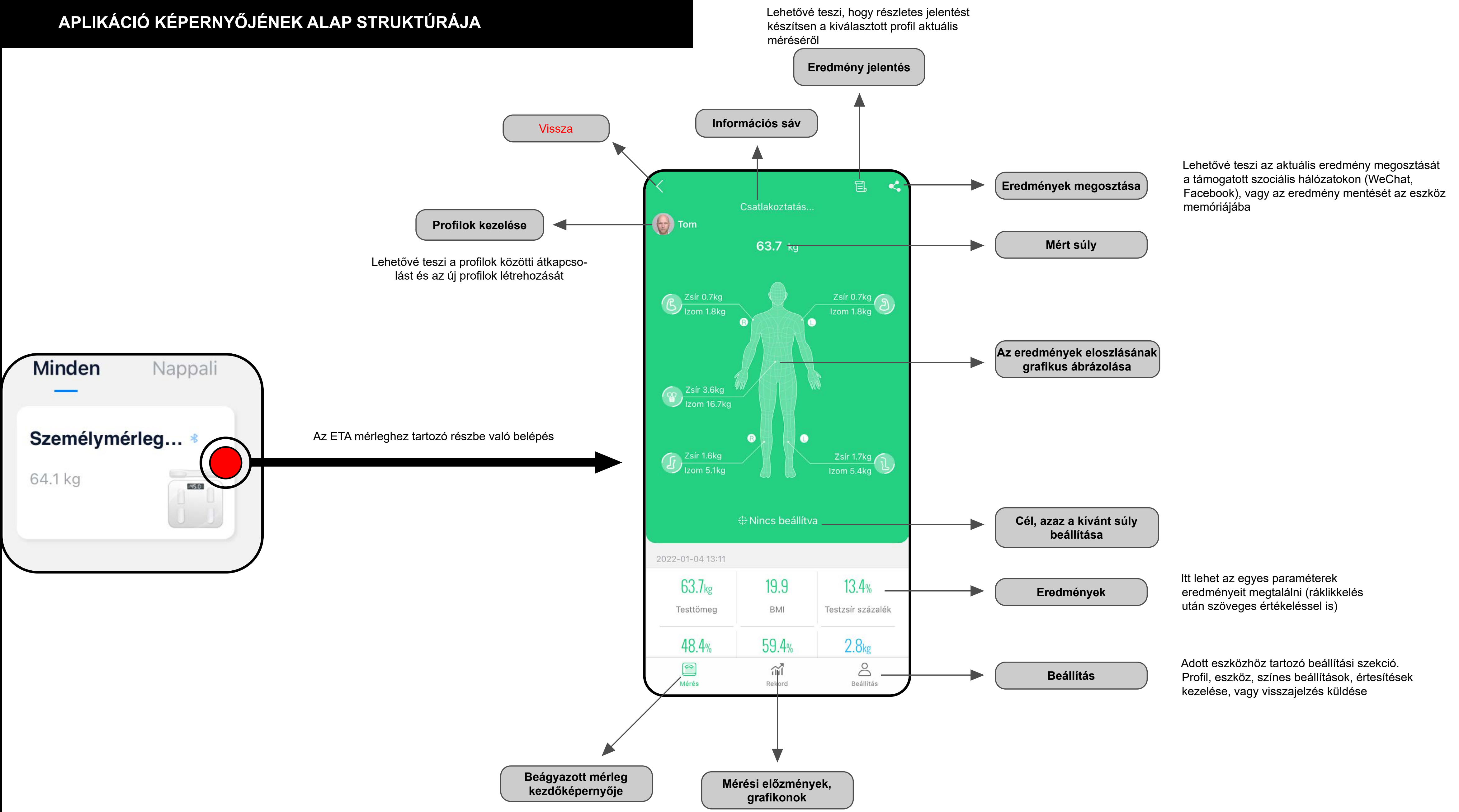

# APLIKÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy az ETA termékét választotta! Ez a használati utasítás azon ETA8781 mérleg tulajdonosainak való, akik szeretnék a mérleg teljes potenciálját kihasználni, az AILINK aplikáció segítségével.

További információkat, tanácsokat és tippeket weboldalunkon találhat meg:

<https://eta.hu/care/>

Ezt a weboldalt folyamatosan frissítjük és a legújabb, adott termékről szóló információkat nyilvánossá tesszük.

Kérdések, vagy bármilyen problémák esetén először nézze meg a fent említett weboldalt és ha az ott található információk nem segítik megoldani a problémát, forduljon hozzánk a következő e-mail címen keresztül: [info@etasince1943.com](mailto:info@etasince1943.com)

## 1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazást megtalálja az Apple Store vagy a Google Play alkalmazás adatbázisában, vagy használhatja az alábbi QR-kódot, hogy felgyorsítsa a dolgokat:




Töltse le és telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára (tabletjére).

### KOMPATIBILITÁS

Telefon (tablet) operációs rendszere	Android 6.0 és magasabb IOS 9.0 és magasabb
--------------------------------------	--


## 2. FIÓK REGISZTRÁCIÓJA ÉS BEJELENTKEZÉS

1

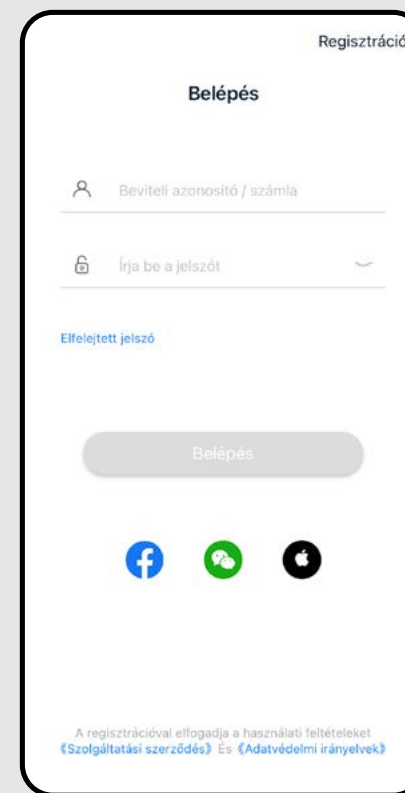


- Miután letöltötte az aplikációt, kapcsolja azt be. A bejelentkezési képernyő jelenik meg.
- A képernyőn lehet az új fiókot is regisztrálni, elfelejtett jelszó esetén újat kérni, vagy harmadik féltől származó alkalmazások segítségével bejelentkezni.
- Ha nincs létrehozva a fiókja, válassza ki a „Regisztráció” opciót (esetleg jelentkezzen be harmadik féltől származó aplikációval)
- Bejelentkezéshez adja meg a fiók nevét (e-mail címét) és jelszavát és válassza ki a „Belépés” opciót. OS Android esetén szükséges a használati feltételekkel egyetérteni.

2

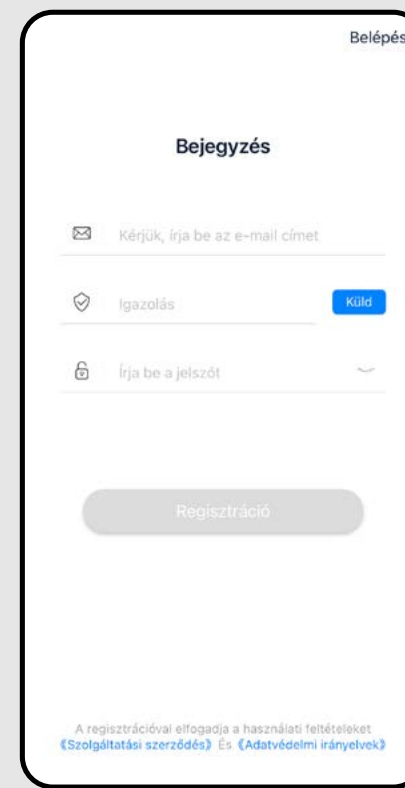

- Adjon meg egy érvényes e-mail címet és válassza ki a jelszót.
- Utána válassza ki a „Küld” opciót; a rendszer elküldi az adott e-mail címre a kódot, amelyet megad az „Igazolás” mezőbe. (Abban az esetben, ha a kód az adott időintervallumban nem jön, ne kérjen újat, hanem várjon néhány percig, mert a kód késéssel érkezhet).
- A folyamatot erősítse meg a „Regisztráció” opció kiválasztásával.


3

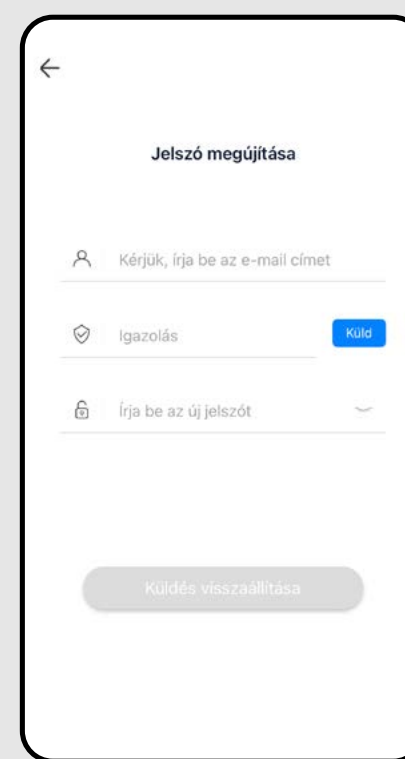

- Abban az esetben, ha elveszíti a jelszavát, a fiók létrehozásához használt e-mail címmel visszaállíthatja azt.
  - Írja be az e-mail címét, és amikor megkapja rá az ellenőrző kódot, írja be azt a megadott mezőbe.
- Megj. Az ellenőrző kód megérkezése eltarthat egy ideig. Kérjük, legyen türelemmel. Ugyanakkor ellenőrizze, hogy a kód nem blokkolja-e a levelezőprogramja spam szemétyűjtőjét/szűrőjét. Ideális esetben alap e-mail címeket használjon (pl. gmail, seznam, stb.).**

## 3. ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA


1

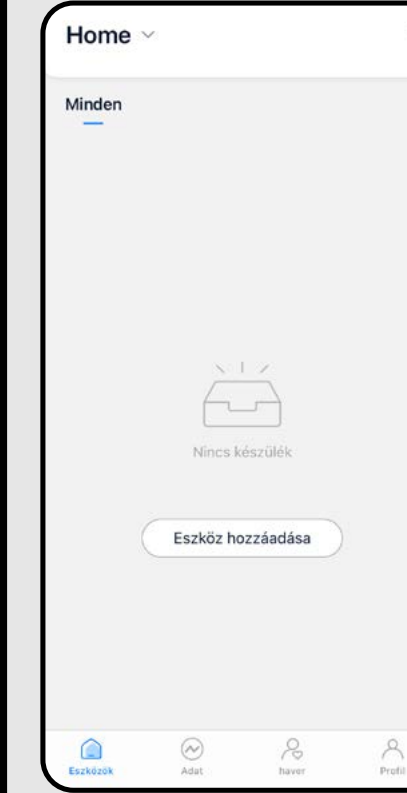

- Sikeres bejelentkezés után a fő képernyő jelenik meg, ebben az esetben párosított eszköz nélkül.
  - Aplikáció és mérleg párosításához válassza ki az „Eszköz hozzáadása” opciót.
- \* Abban az esetben, ha megvan a párosított eszköz, használja a jobb felső sarokban lévő „+” ikont, amely lehetővé teszi az eszköz hozzáadását*




2

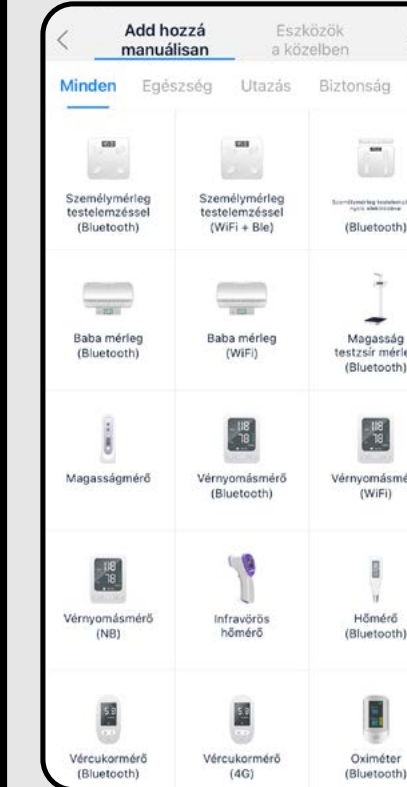

- Eszközök listája jelenik meg, amelyekhez az aplikáció használható.


**Megjegyzés:**  
Az ETA társaság az aplikációt csak az ETA8781 mérleghez használja. Semmilyen más, aplikációban sorolt eszköz jelenleg nem támogatott.

3

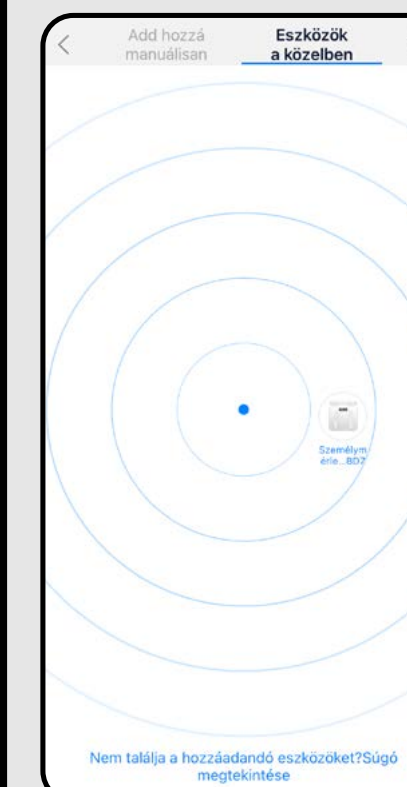

- Legjobb mód az eszköz automatikus keresése, amelyet az „Eszközök a közelben” opcióval lehet kiválasztani.
- Közeli eszközök keresése automatikusan elkezdődik.
- Kapcsolja be a mérleget rálépéssel.
- Miután a mérleg megjelent az aplikációban, klikkeljen az ikonjára.



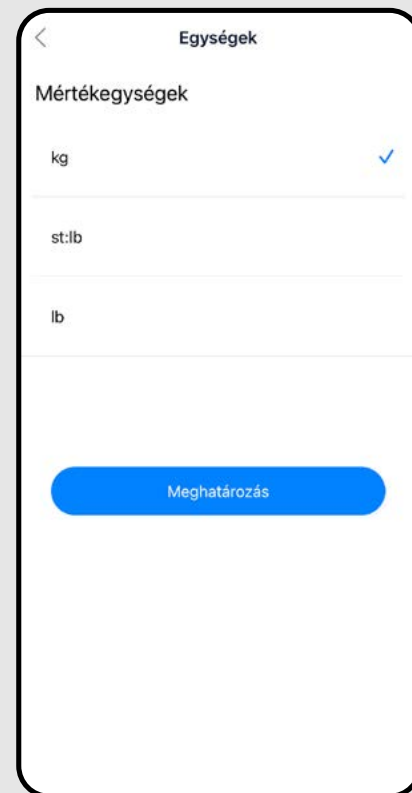


- A beállítás utolsó lépésében lehet a mérési egységeket beállítani.
- Megerősítéshez válassza ki a „**Meghatározás**“ opciót.

#### Jegyzet


Az eszköz párosításának/törlésének megszakításához tegye ezt a beállítások részben, lásd: 9B-1-b

4

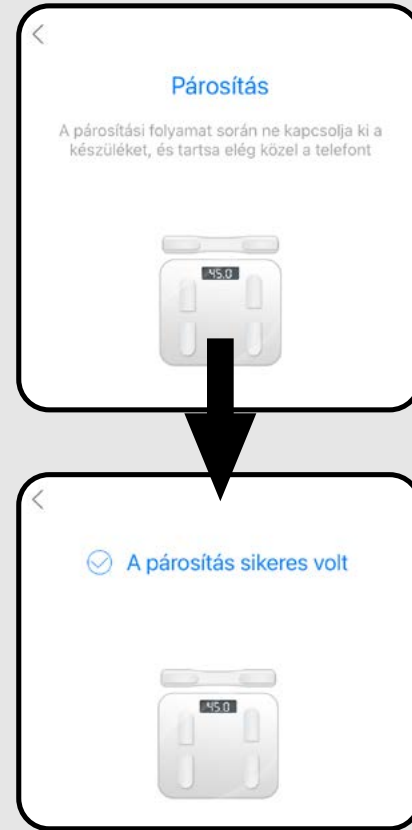

- A párosítási folyamat elkezdődik. A folyamat befejezése után sikeres párosításról szóló felirat jelenik meg az applikációban.

5

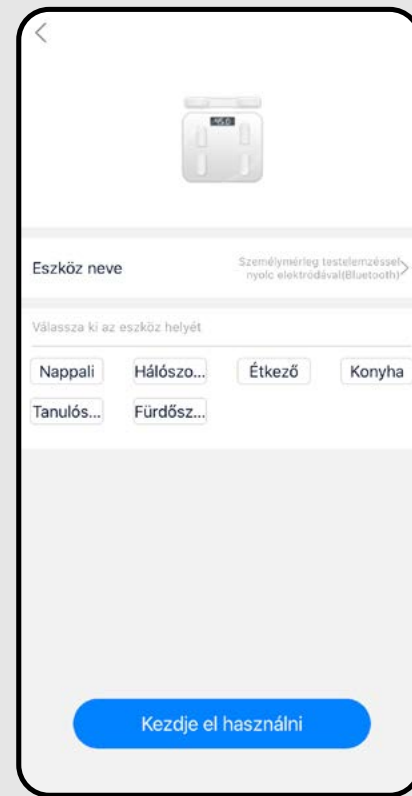

- A következő lépésben lehet a mérlegnek saját nevet adni, a mérleget hozzáadni és kategorizálni egy ablakhoz, amelyben a mérleget használni fogja.
- Megerősítéshez válassza ki a „**Kezdje el használni**“ opciót.

#### Megjegyzés

Az eszközök szoba szerinti kategorizálásának funkciója több támogatott eszköz használata esetén hasznos. A mi esetünkben (csak ETA mérleg használata) ezt a funkciót nem szükséges használni.

## 4. ALAP HASZNÁLATI TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Az AiLink applikációval való ETA mérleg használata intuitív, tesztelés közben semmilyen problémát nem észleltünk, amelyekkel használat közben találkozhat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a mobil eszköz nem lesz kompatibilis, vagy a vezeték nélküli csatlakozás nem fog problémamentesen működni. Emiatt alap tanácsok és javaslatok listáját hoztuk létre, amelyek segíthetnek az adott, smart eszközökre jellemző problémákat megoldani.


### 1. Smart eszköz (mobil, tablet):

- Mindig aktuális, hivatalos forrásokból származó verziót használjon.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön eszközei támogatott Android és iOS verziót használnak.
- A Bluetooth funkció legyen bekapcsolva.
- Az internet kapcsolat legyen aktív, az applikáció és a felhős szerver közötti megfelelő kommunikációhoz.
- Engedélyezze az applikációnak a szükséges jogokat, amelyek sokszor az operációs rendszertől függhők. Problémák esetén ellenőrizze, hogy a telefonjában nem létezik olyan beállítás, amely akadályozza az applikációnak a szükséges engedélyeket használni – ebben az esetben szükséges az applikációnak kivételt adni.
- A mérleg és telefon kommunikációját egyéb programok zavarhatják (mint VPN, firewall stb.), amelyeket a telefonban használ. Párosítási, vagy használati problémák esetén ezeket a programokat kapcsolja ki.
- Problémák esetén próbáljon más telefonnal való párosítást, így lehet az adott telefon problémáját kizárni.

### 2. Súly egység


- Mindig ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak feltöltve. A gyenge elemek negatívan befolyásolhatják a Bluetooth csatlakozást, vagy a mérési folyamatot. Néhány esetben megtörténhet, hogy az elemeket, amelyek a csomagolásban voltak, a hosszú tárolás miatt lemerültek, ezért problémák esetén javasolt az új elemeket kipróbálni.
- A mérleg érintő felületeit, a kézi szenzorokat beleértve, mindig tartsa tisztán. Így lehet a hibás mérések rizikóját minimalizálni. A mérlegre mezítláb lépjen rá és a jobb átvitel érdekében nedvesítse meg a talpait és tenyereit.

- **Próbáljon új fiókot létrehozni, így az adott fiók hibás aktivációval kapcsolatos problémáit kizárhatja;**
- **Párosítás és használat közben tartsa a smart eszközét a mérleg közelében (optimális esetben max. 2 m távolságban).**

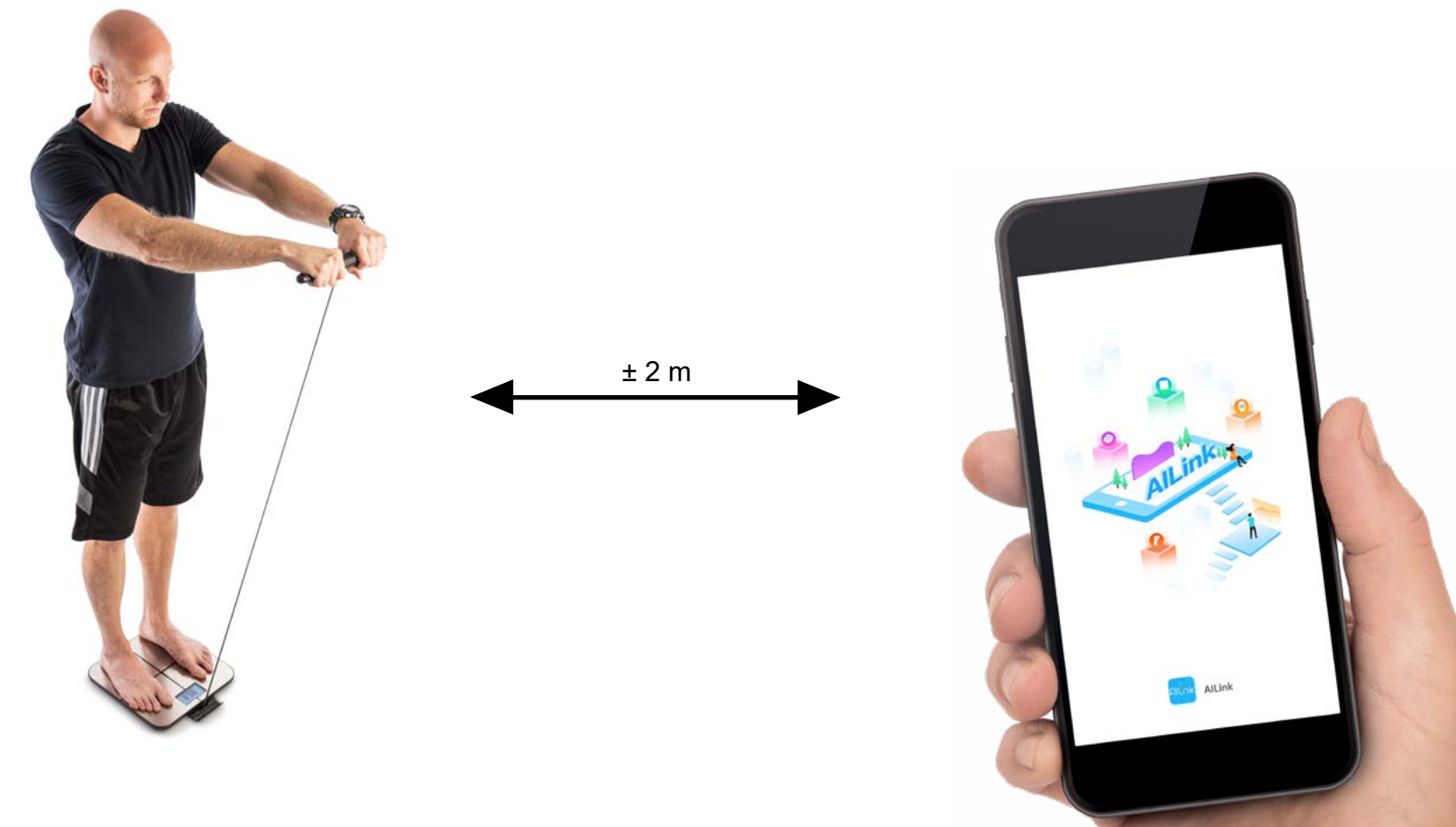


## 5. MÉRÉS ÉS ANALÍZIS

1

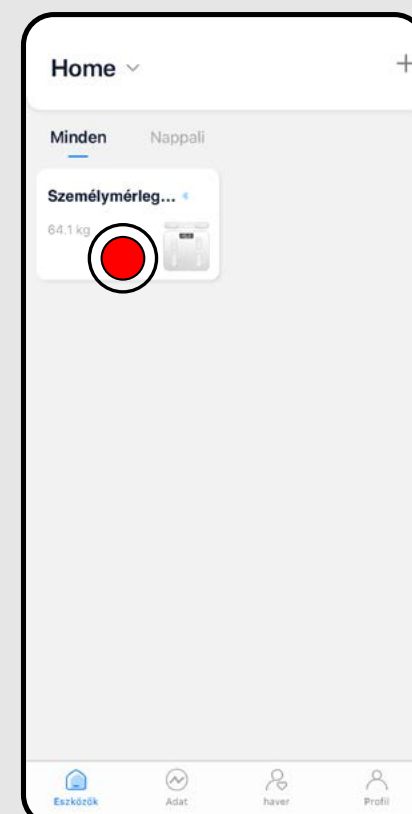


- Aplikáció bekapcsolása és sikeres párosítás után válassza ki a párosított mérleg ikonját.
- Ezzel az aplikáció általános részéről átkapcsol az adott mérleghez tartozó részbe.

2

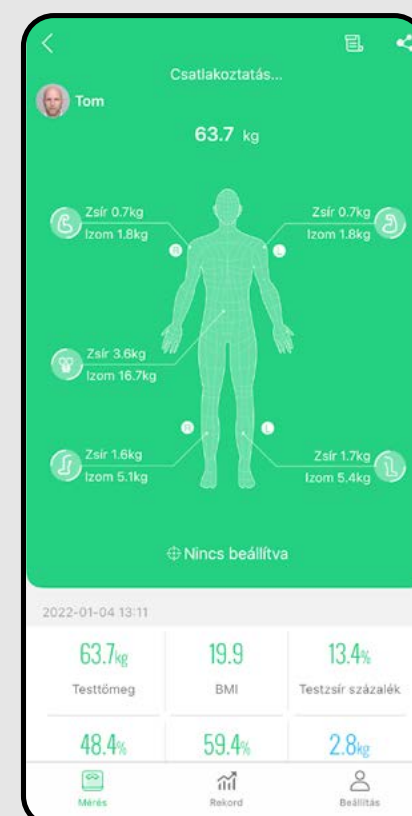


- Alap mérési képernyő jelenik meg.
- A bal felső sarokban lévő profil ikon kiválasztásával válassza ki a kívánt profilt (,ha több profillal rendelkezik).
- Rálépéssel kapcsolja be a mérleget és várjon, amíg a mérleg csatlakozik az aplikációhoz – az értesítő listán a „Sikeres csatlakozás“ felirat jelenik meg.

3

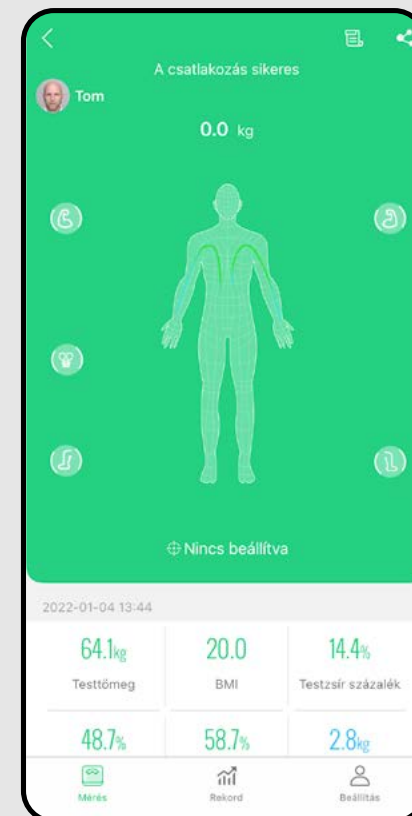

- Most lehet a súly és más testi paraméterek mérését elkezdeni.
- Lépjen rá a mérlegre, fogja meg a kézi szenzort és várja a mérést.
- Az információs lista és a test körüli képernyő jelezni fogja az aktuális mérési állapotot.

4

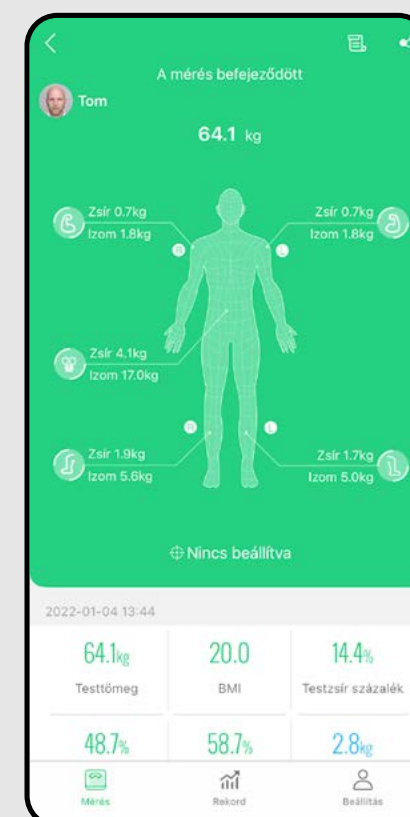

- Sikeres mérés után az információs listán az erről szóló információ jelenik meg.
- A test mellett és aplikáció alsó részén jelennek meg az eredmények.




- Egyes mért paramétereknél lehet ráklicceléssel szöveges információkat is megjeleníteni.

## MEGJEGYZÉSEK

- **Kérjük vegye figyelembe, hogy a mért értékek csak körülbelüliek és a tényleges orvosi analízisekkel szemben azok pontatlanok lehetnek. Mivel az emberi test mérése nagyon bonyolult és költséges, különböző gyártók különféle indikatív mérési módszereket használnak. Néha a professzionális eszközökből származó eredmények is különböznek. Emiatt csak egy eszköz használatát javasoljuk és azon figyelni az egyes paraméterek alakulását.**
- Ha a mérleg csatlakozása sikertelen, ellenőrizze a Bluetooth funkció működését, utána próbálja újra csatlakoztatni a mérleget az információs listán keresztül. Ha szükséges, olvassa el a 3. fejezetben lévő információkat.
- Abban az esetben, ha a mérés sikertelen, próbálja a mérést megismételni. Ha szükséges, olvassa el a 3. fejezetben lévő információkat


## 6. EREDMÉNYEK MEGJELENÉSE

1

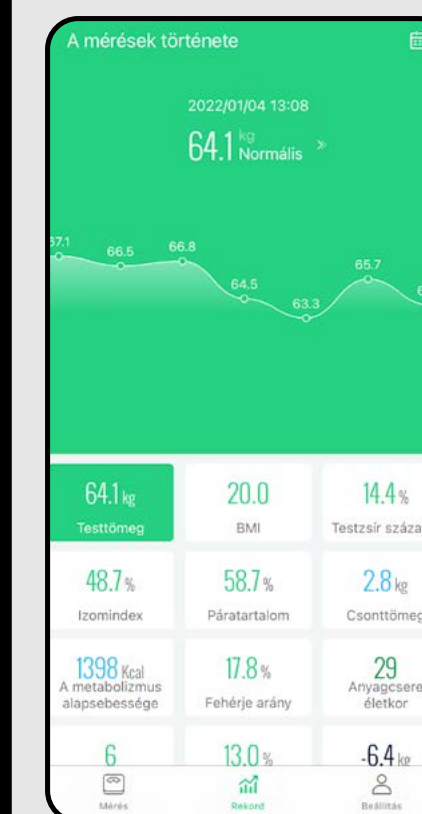

- Válassza ki az alsó listán lévő „**Rekord**“ opciót. Ezzel az eredményeket megjeleníti, grafikon formájában.
- Egyes paraméterek kiválasztásával az ehhez tartozó grafikonokat megjeleníti.
- Naptár megjelenéséhez nyomja meg a jobb felső sarokban lévő ikont, vagy az eredmény mezőjét.


2

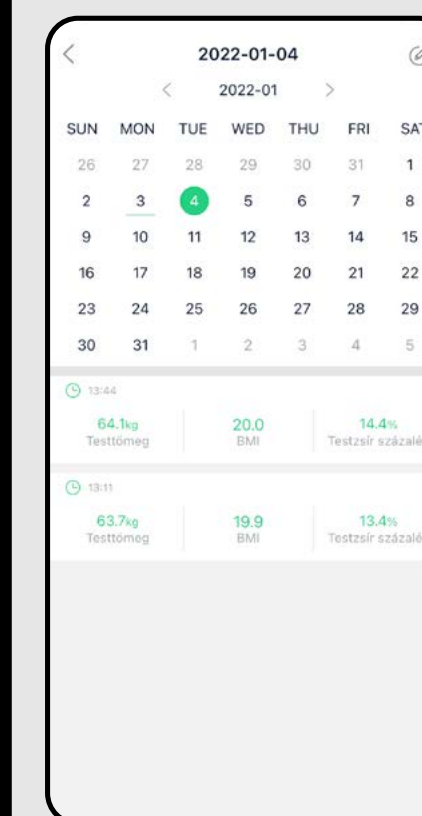

- A naptárban lehet látni, melyik napokon végezte el a mérést. A kívánt nap kiválasztásával a kiválasztott naphoz tartozó eredmények jelennek meg.

**Tipp:**  
A naptárban lehet a naptár felső oldalán lévő nyilakkal mozogni.

3

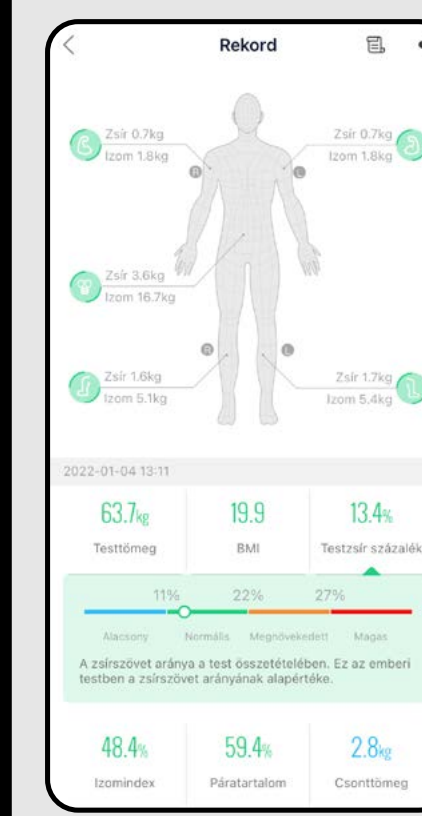


- Egyes mérésekre való klicceléssel a következő adat jelenik meg, amelyet továbbíthat, megoszthat.



### 7. SAJÁT EREDMÉNYEK MEGOSZTÁSA


Az AiLink aplikáció lehetővé teszi az eredmények megosztását több lehetőségen keresztül. Mindig csak egyes mérések megosztása lehetséges. Megosztási lehetőségeket ezen az oldalon lévő ábra segítségével találhat meg.

Mindig lehet ú.n. „screenshot“-ot készíteni, azaz kifényképezni az aktuális képernyőt, amellyel utána ugyanúgy dolgozhat, mint bármilyen más képpel.

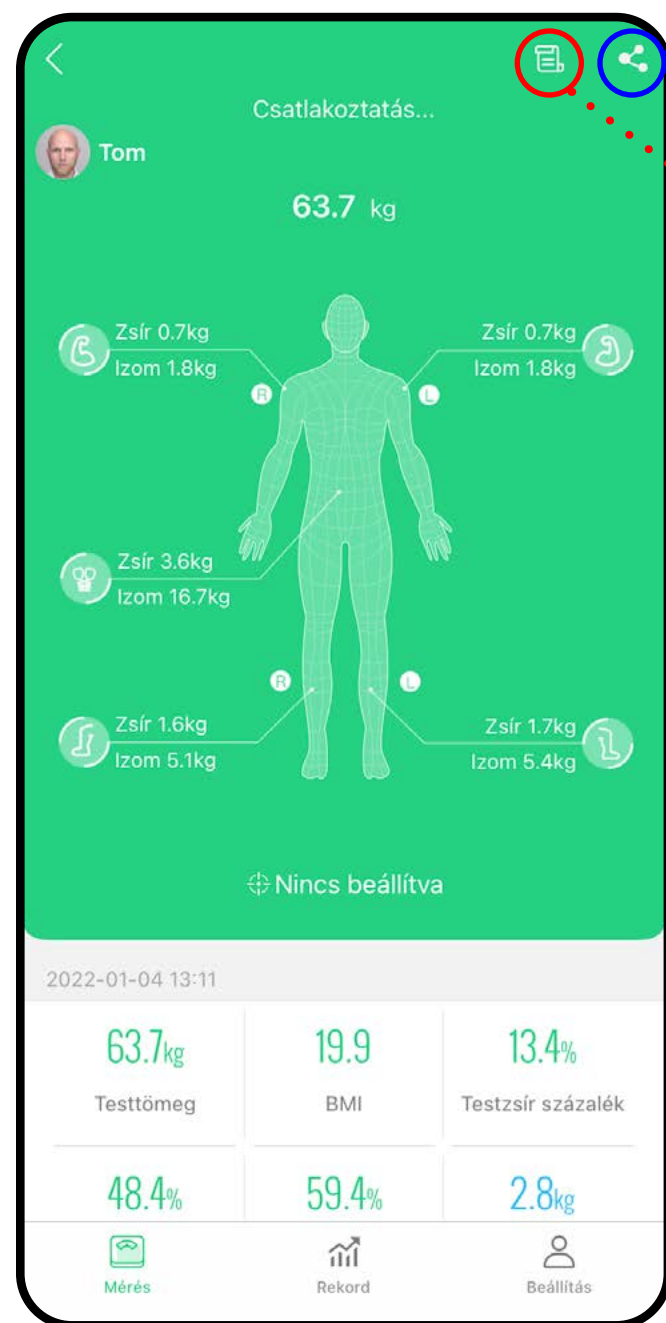


#### Utolsó mérés megjelenése

Az alap képernyőn lehet az utolsó mérés eredményeit megtalálni, az előzmények böngészése nélkül. Így az eredményeket azonnal ellenőrizheti.

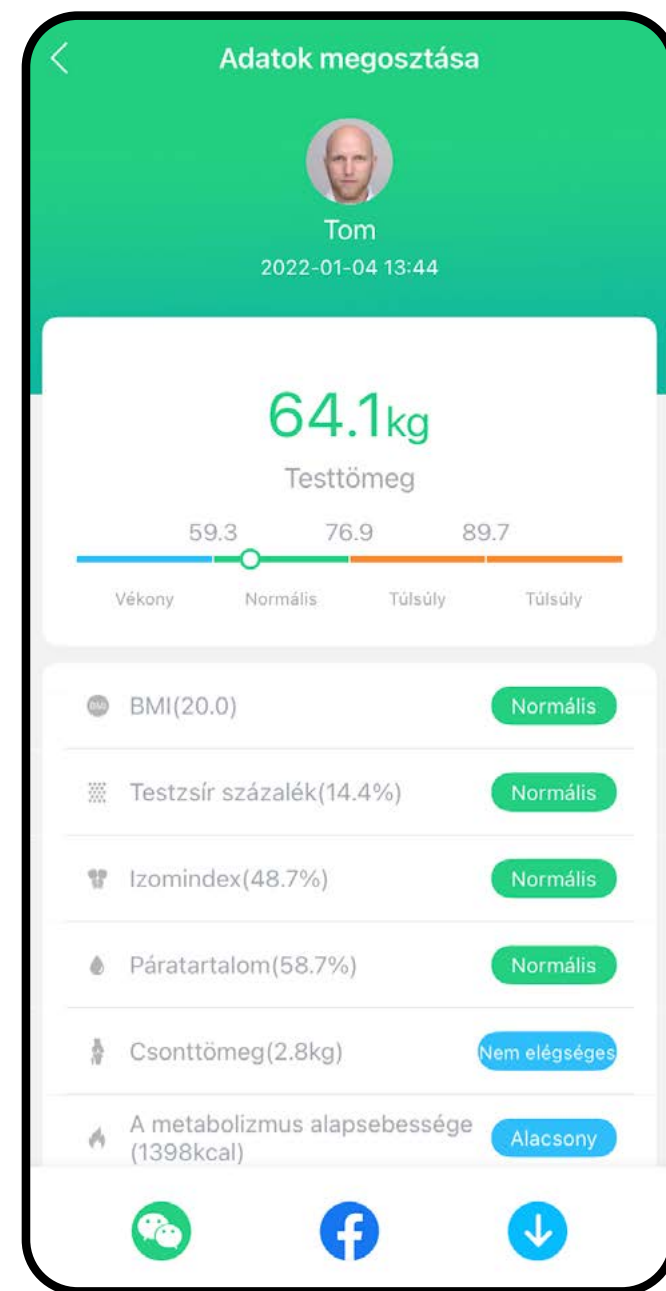

### Konkrét mérés megosztása

Konkrét mérés eredményének az alap kinézete, amelyet az eszköz memóriájába menthet, vagy a csatlakoztatott szociális hálózatokon (Facebook, WeChat) megoszthat, az alsó listán lévő gombok segítségével.

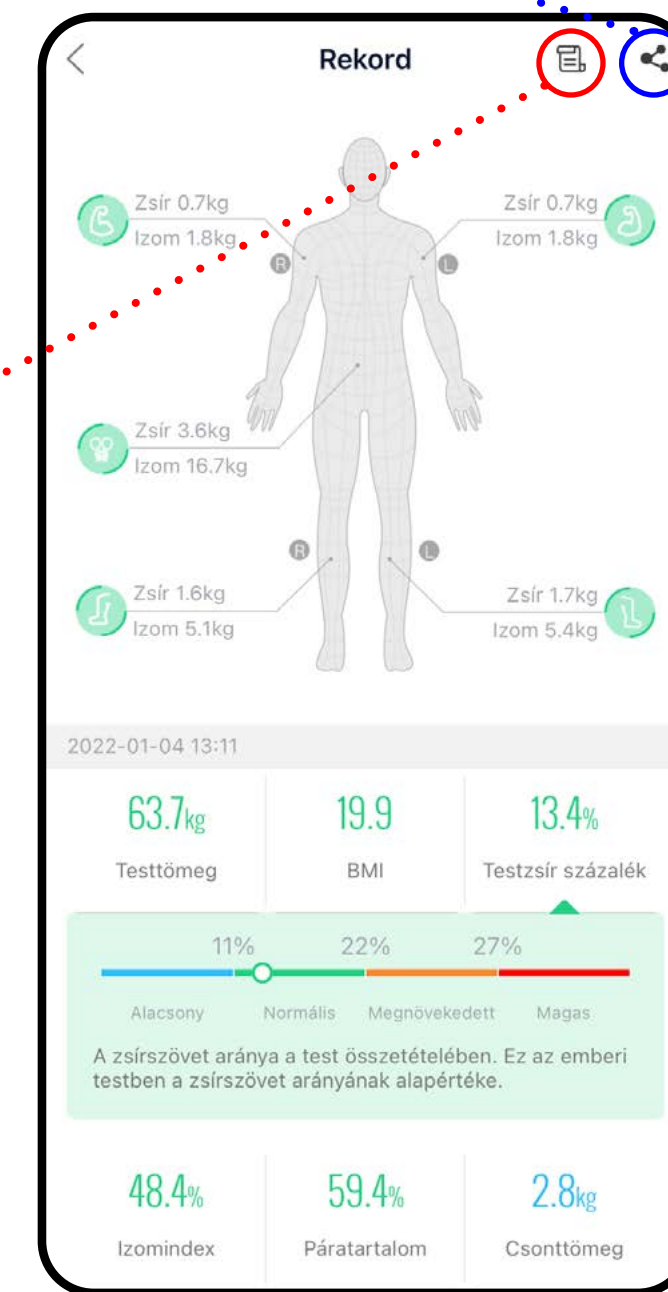

#### Konkrét mérés megjelenése

Ezt az „Rekord” szekcióban találhatja meg – azaz a mérési előzményekben, lásd 6.3 fejezetet.


### Részletesebb mérési jelentés

Az aplikáció képes részletesebb eredményt generálni, amely a kiválasztott méréshez tartozik. A eredményt lehet az eszköz memóriájába menteni (az alsó részen lévő ikon kiválasztásával) kép formájában és utána tovább dolgozni vele. (Szociális hálózatokon való közvetlen megosztás nem lehetséges)




## 8. BARÁT – MÉRÉSEK MEGOSZTÁSA

1

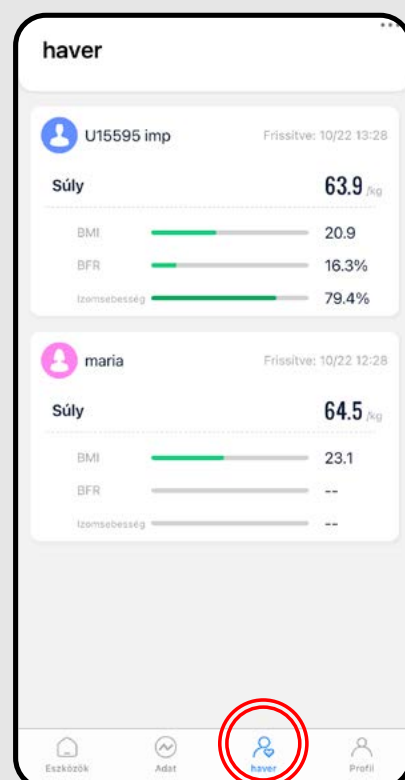

- Megosztási lehetőség mellett az applikáció lehetővé teszi AiLink felhasználói fiókok csatlakozását.
- Ezzel a lehetőséggel lehet a csatlakozott személy eredményeit látni. Ez fordítva is működik – a csatlakozott személy az Ön eredményeit is látja.
- **Példa:** bal oldalon lévő ábrán látható, hogy az aktuális felhasználó „imp” nevű felhasználóval osztja meg az eredményeit. IMP felhasználó több profillal rendelkezik, de csak a fő profilját - „maria” – osztja meg.

2

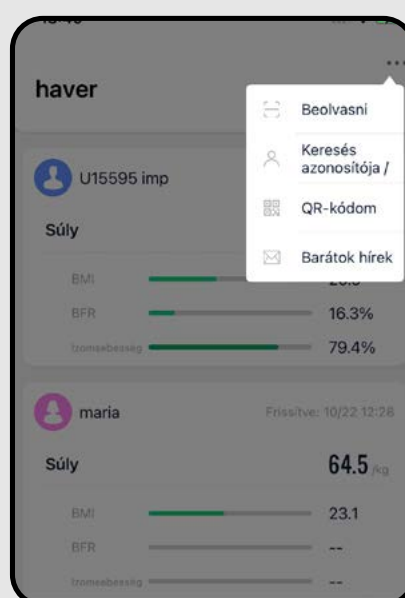

- Új barát hozzáadásához szükséges, hogy az egyik felhasználó lépjen be a „Haver” opcióba és válasszon „...” lehetőséget. Utána 2 opció használható:

1) „**Beolvasni**” opcióval lehet a telefonjából QR kódot szkennelni, amelyet a másik felhasználótól kap. QR kódot lehet úgy létrehozni, hogy a másik telefonján az „**QR-kódom**” opciót választja ki, ezt a QR kódot leszkenneli és a profilk megosztását megerősíti.


2) „**Keresés azonosítója**” opcióval adja meg a másik fiók e-mail címét és erősítse meg.

- Miután elküldte a kérést a másik félnek, a másik félnél a „Haver” szekcióban a következő jelek jelennek meg (👤/👤). Válassza ki „...” opciót, klikkeljen a „**Barátok hírek**” opcióra és erősítse meg a kérés elfogadását.

**Megjegyzés**

A fiók, ahonnan a kérés érkezik és a fiók, amely a kérést fogadja választhat, melyik alprofilokat szeretné a másik féllel megosztani.

3

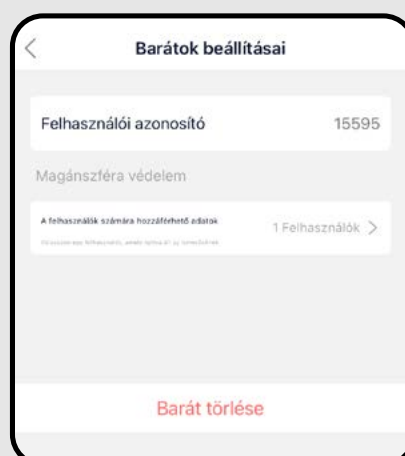


- Ha megszeretné bármilyen fiók paramétereit változtatni (pl. Felhasználói név, törlés, megosztás, alprofilok módosítása) válassza ki a „Haver” szekcióban az adott profilt és utána „⚙️” ikont.

## 9A. BEÁLLÍTÁS - ÁLTALÁNOS rész


Az applikáció lehetővé tesz 2 alap beállítási opciót. Általános beállítást (minden eszköz kezeléséhez, amelyeket az applikáció használ) és ETA mérleghez tartozó beállítást. Néhány beállítás közös, néhány pedig egyéni.

1

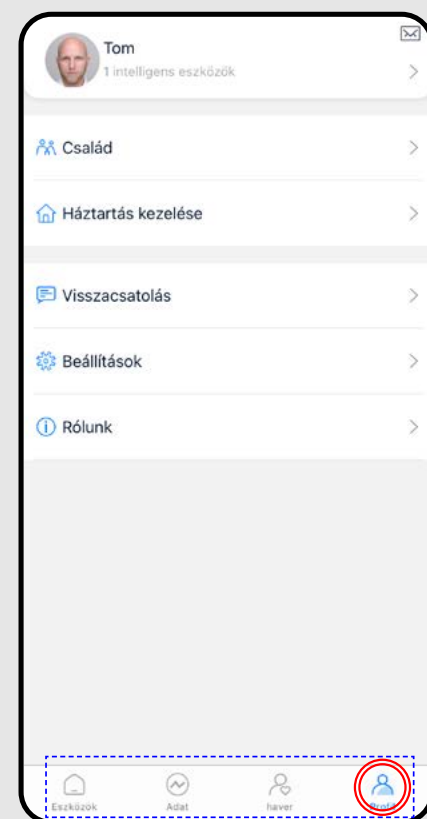**Általános beállítás:**


- Fő profil kezelése** (nézze: 9A-2)
- Profilok kezelése** (nézze: 9A-3)
- Háztartás kezelése** - Háztartások, szobák és hozzá tartozó termékek kezelése. Csak ETA mérleg használata esetén a funkció főleges.
- Visszajelzés** - lehet a fejlesztőknek üzeni. **Ezt a mezőt inkább ne használja.** Javasoljuk inkább az applikációs részben lévő űrlapot használni (lásza 9B-1)!
- Beállítás** - Applikáció nyelvének a kiválasztása, csatlakozott eszközök megjelenítése.
- Rólunk** - Applikáció verziójának és felhasználói feltételek megjelenítése.

2

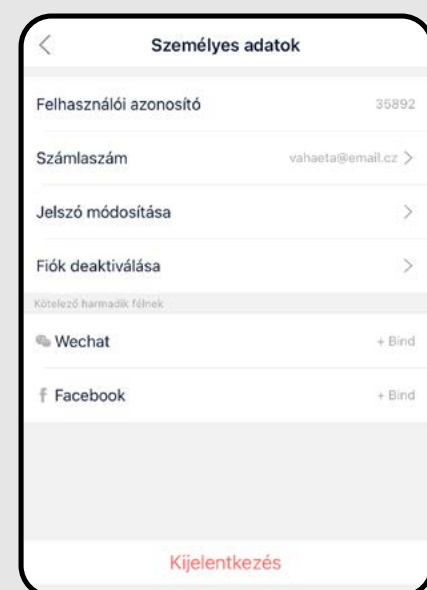

- Profil kiválasztásával (👤) lépjen be a profil beállításába.
- Fiók ID látható, jelszó módosítása, vagy profil törlése lehetséges.
- Harmadik fél applikációi (WeChat, Facebook) rész, tájékoztatás jellegű, láthatja melyik fiókok vannak csatlakoztatva


3

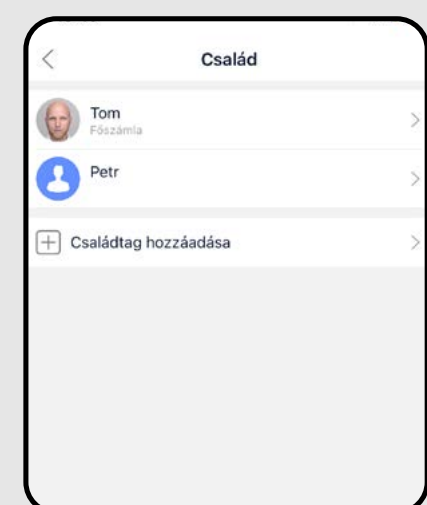

- A „**Család**” szekció a profilk egyszerű kezelését teszi lehetővé. Fő profil és összes alprofil látható.
- Adott profil kiválasztása után lehet az alap információkat módosítani (kép, név, születési nap, nem), esetleg a profilt törölni.
- Új alprofil létrehozásához válassza ki a „**Családtag hozzáadása**” opciót.


## 9B. BEÁLLÍTÁS – APLIKÁCIÓ rész

1

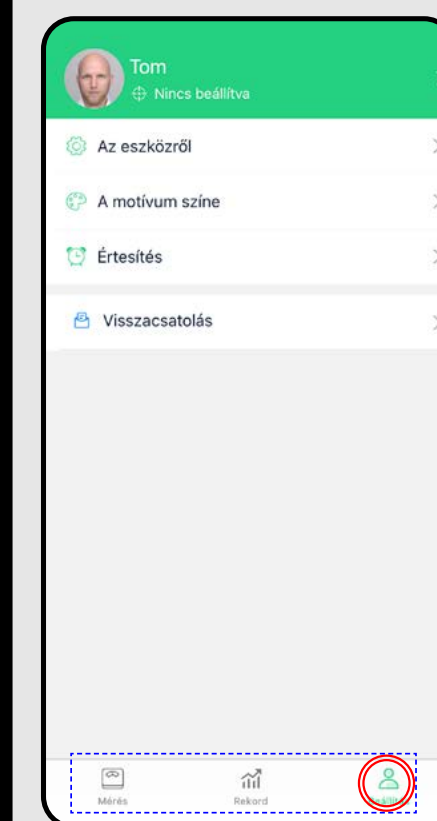**Applikáció beállítása:**


- Profilok kezelése** (nézze: 9B-2)
- Eszköz kezelése** (mérleg) - Eszköz átnevezése, törlése, egységek beállítása, firmware infó.
- Motívum színe** - Applikáció színes beállítása.
- Értesítések** - 3 emlékeztetési idő állítható be (emlékeztetés mérésre).
- Visszajelzés** - lehet a fejlesztőknek üzeni. **Inkább ezt az opciót használja** (ne az általános beállításban lévő lehetőséget).

2

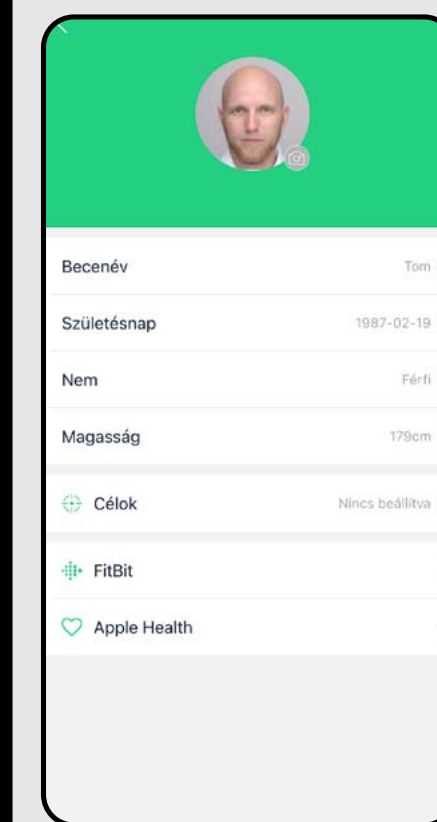

- Profil kiválasztásával (👤) lépjen be a profil beállításába.
- Név változtatása, születési idő, magasság, nem és kívánt cél beállítása.
- Harmadik féltől származó applikációval való párosítás, amely fogadja az ETA mérlegből származó kiválasztott paramétereket. Pl. FitBit és Google Fit (esetleg Apple Health Apple eszköz felhasználók esetén).



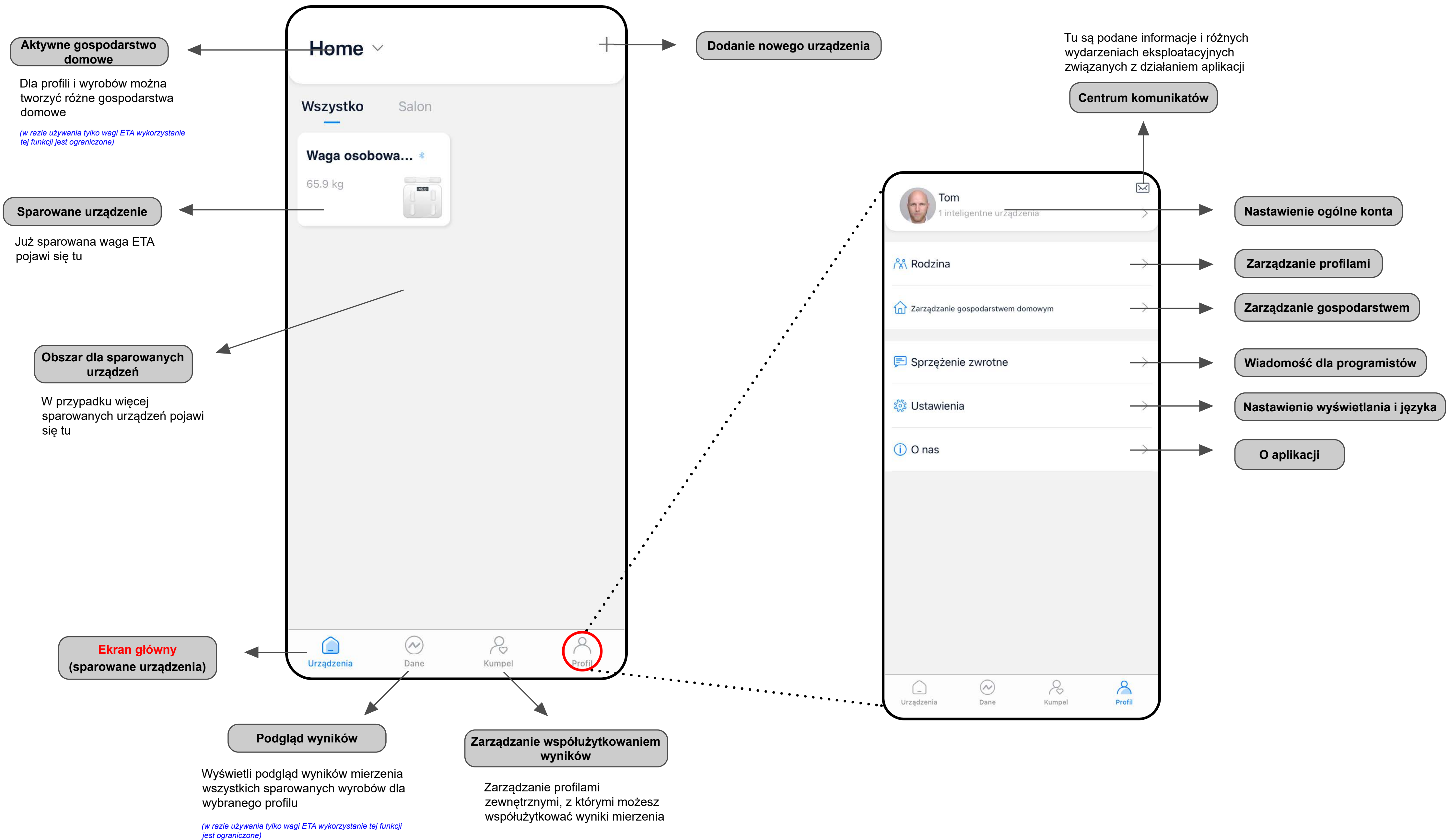

Umożliwia wytworzenie szczegółowego raportu aktualnego mierzenia wybranego profilu

Raport wyników

Pasek informacyjny

Powrót o krok

Zarządzanie profilami

Umożliwia przełączanie między profilami, łącznie z możliwością wytworzenia nowych profili

Współużytkowanie wyników

Umożliwia współużytkowanie aktualnego wyniku mierzenia z pomocą obsługiwanych sieci społecznościowych (WeChat, Facebook), lub zapisanie w magazynie danych urządzenia

Zmierzona waga

Wyobrażenie graficzne rozłożenia wyników

Nastawienie celu, ew. żądanej wagi

Pole wyników

W tej części są wyniki poszczególnych parametrów (po kliknięciu też z komentarzem tekstowym)


Nastawienie

Sekcja nastawienia związana z danym urządzeniem. Można zarządzać profilem, urządzeniem, nastawieniem kolorów, notyfikacją, lub zasłać informację zwrotną programiście aplikacji

Zagnieżdżona strona główna wagi

Historia mierzenia, wykresy

Przejdź do części aplikacji przeznaczonej dla wagi ETA

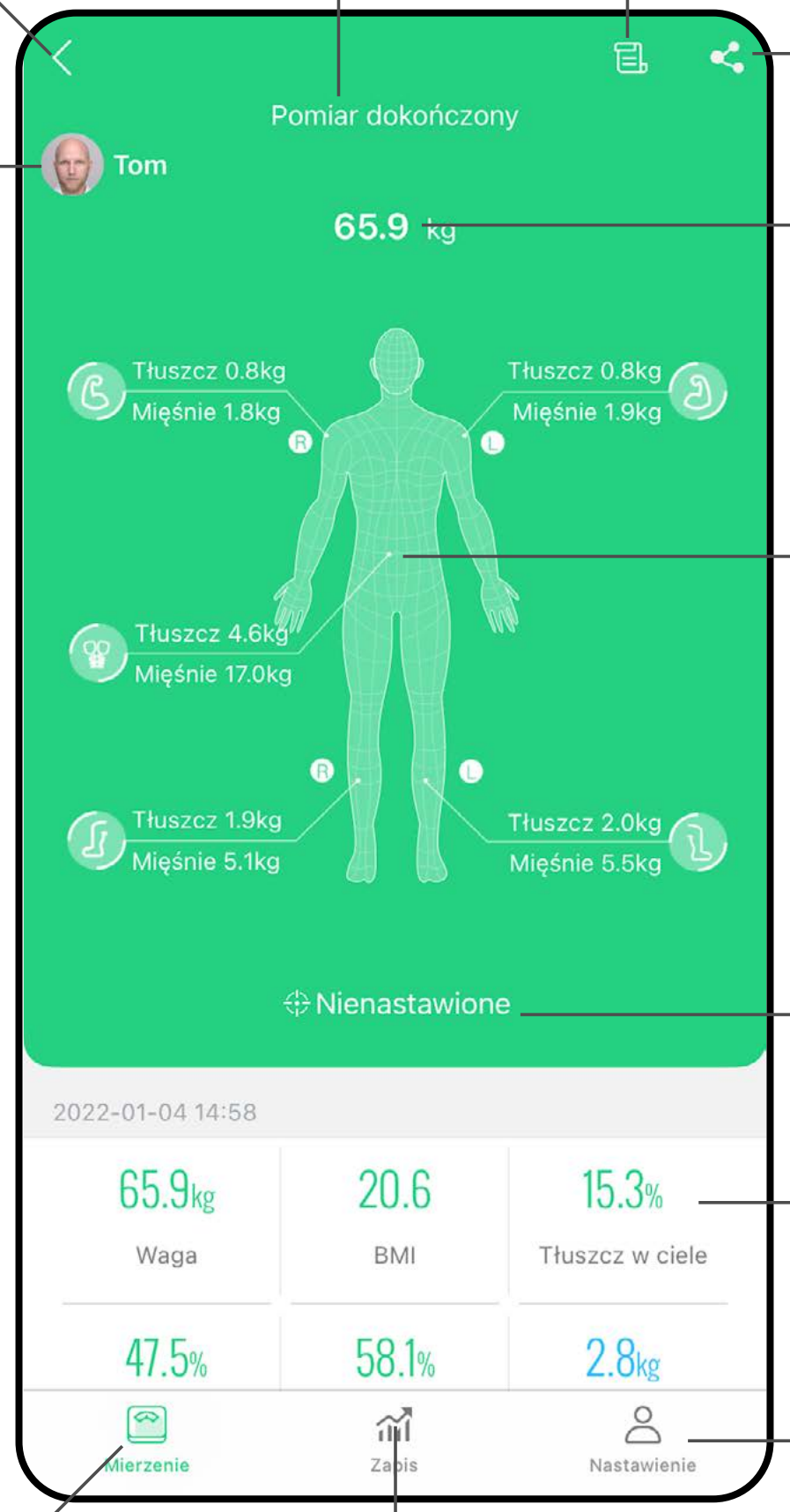



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie do produktów marki ETA. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich właścicieli wagi ETA8781, którzy chcą w pełni wykorzystać jej potencjał z pomocą aplikacji AILINK.

Blizsze informacje i rady dotyczące Twojej wagi znajdziesz też na naszych stronach internetowych:

[www.eta-polska.pl/care](http://www.eta-polska.pl/care)

Te strony internetowe nieustannie aktualizujemy i gromadzimy tu najnowsze informacje o danym wyrobie.

W razie pytań dotyczących działania aplikacji, lub w razie jakichkolwiek problemów należy najpierw przejść na podane powyżej strony internetowe, a jeżeli tam podane informacje nie pomogą w rozwiązaniu problemu, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: [info@etasince1943.com](mailto:info@etasince1943.com)

## 1. INSTALACJA APLIKACJI

Aplikację znajdziesz w bazie danych aplikacji Apple Store lub Google Play, lub możesz dla przyspieszenia użyć następującego kodu QR:




Pobierz aplikację i zainstaluj w swoim telefonie komórkowym (tablecie).

KOMPATIBILITA	
System operacyjny telefonu komórkowego (tabletu)	Android 6.0 i nowszy IOS 9.0 i nowszy


## 2. REJESTRACJA KONTA I ZALOGOWANIE

1

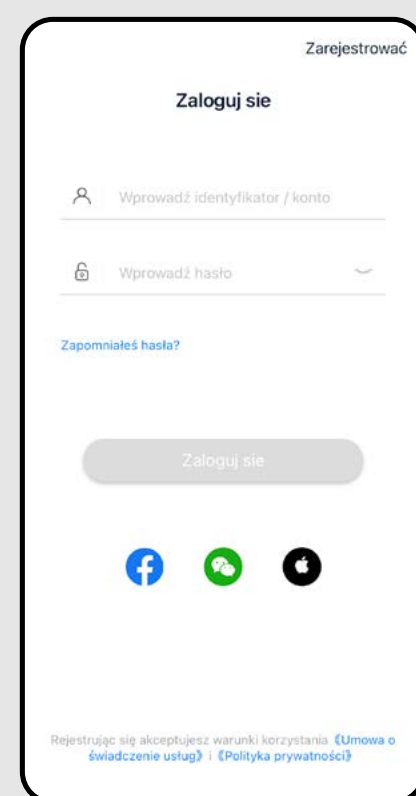


- Jak tylko pobierzesz aplikację, włącz ją. Pojawi się ekran główny umożliwiający zalogowanie.
- Ekran umożliwia też przełączenie na rejestrację nowego konta, wznowienie hasła w razie jego straty, lub zalogowanie z pomocą aplikacji trzecich stron.
- Jeżeli nie masz wytworzonego konta, kontynuuj na „Zarejestrować” (ewentualnie zaloguj się z aplikacji trzeciej strony)
- W celu zalogowania wpisz nazwę swojego konta (e-mail) i hasło, następnie kliknij w „Zaloguj się”. W przypadku OS Android musisz przed zalogowaniem potwierdzić kliknięciem w pole akceptacji warunków korzystania w lewym dolnym rogu.

2

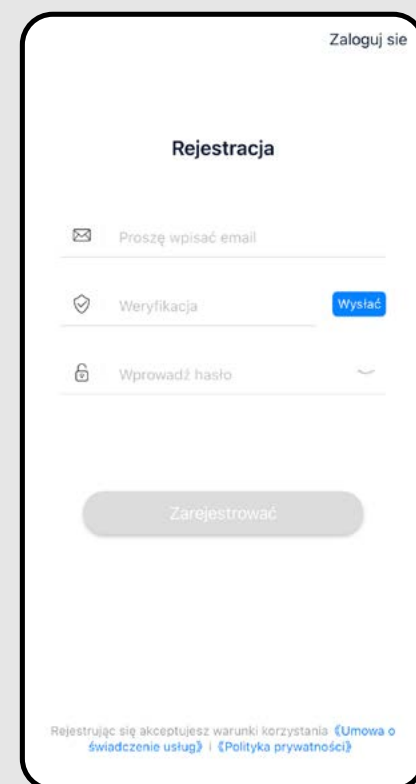

- Wpisz prawidłowy adres e-mail i wybierz bezpieczne hasło.
- Następnie kliknij w „Wysłać”; system odeśle na zadany e-mail kod weryfikacyjny, który następnie wpisz do pola „Weryfikacja”. (w przypadku, kiedy kod po podanym limicie czasu nie dotrze, nie żądaj nowego i zaczekaj kilka minut, kod może przyjść z opóźnieniem.
- Potwierdź proces klikając w „Zarejestrować”.


3

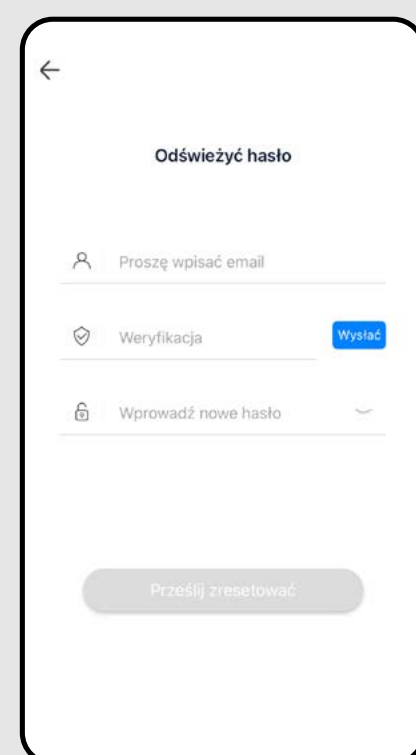

- W przypadku straty hasła można je wznowić za pośrednictwem adresu e-mail użytego do założenia konta.
  - Zadaj dany e-mail i po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego wpisz go do odpowiedniego pola.
- Uwaga: Zaslanie kodu weryfikacyjnego może chwilę trwać. Bądź cierpliwy. Jednocześnie kontroluj, czy kodu nie blokuje kosz/filtr spamowy twojego klienta pocztowego. W idealnym przypadku używaj zwykłych adresów e-mail/klientów (np. gmail, itp.).**

## 3. PAROWANIE URZĄDZEŃ


1

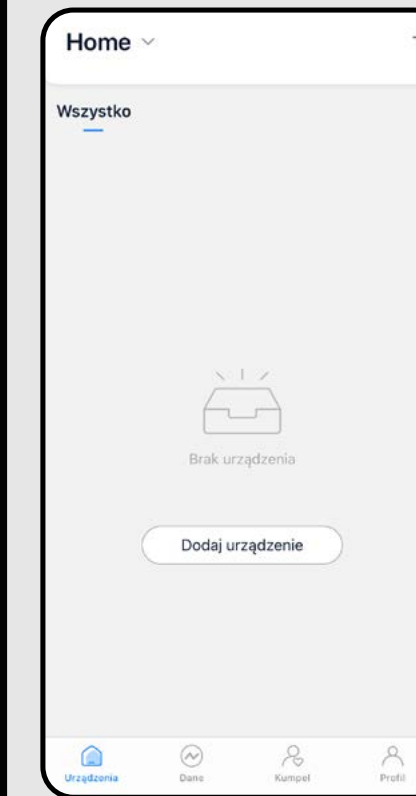

- Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się ekran główny, w tym przypadku bez sparowanego urządzenia.
  - W celu sparowania aplikacji z wagą kliknij „Dodaj urządzenie”.
- \* W przypadku, kiedy masz jakieś urządzenie już sparowane, wykorzystaj w prawym górnym rogu ikonę „+”, która w taki sam sposób umożliwi dodanie następnego urządzenia.*




2

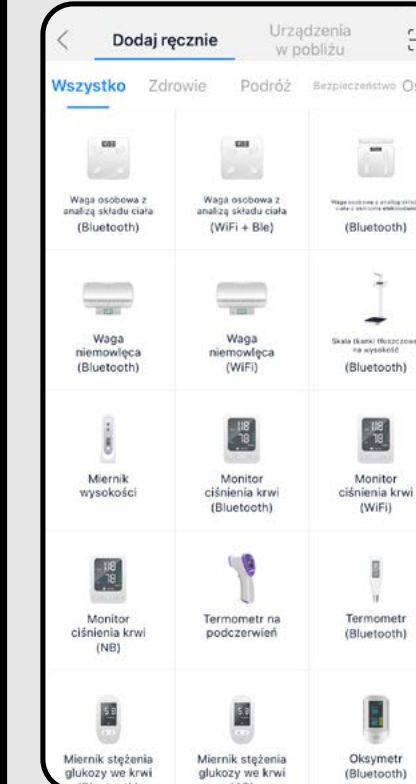





- Pojawi się lista różnych rodzajów urządzeń, do których jest przeznaczona aplikacja.

**Uwaga:**  
Spółka ETA wykorzystuje aplikację tylko dla wagi ETA8781. Żadne inne urządzenie podane w aplikacji nie jest aktualnie obsługiwane.

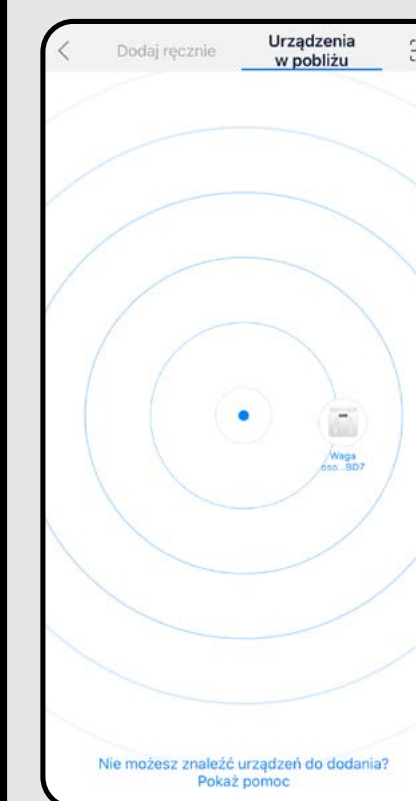3



- Najlepszym sposobem jest automatyczne wyszukiwanie urządzenia, na które przejdziesz klikając w „Urządzenia w pobliżu”.
- Zacznie się automatycznie wyszukiwanie urządzeń w najbliższej okolicy.
- Włącz wagę naciskając nogą.
- Jak tylko waga pojawi się w aplikacji, kliknij w jej ikonę.
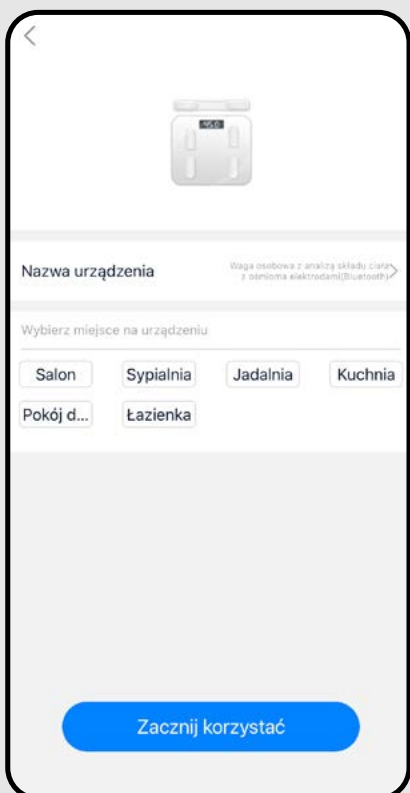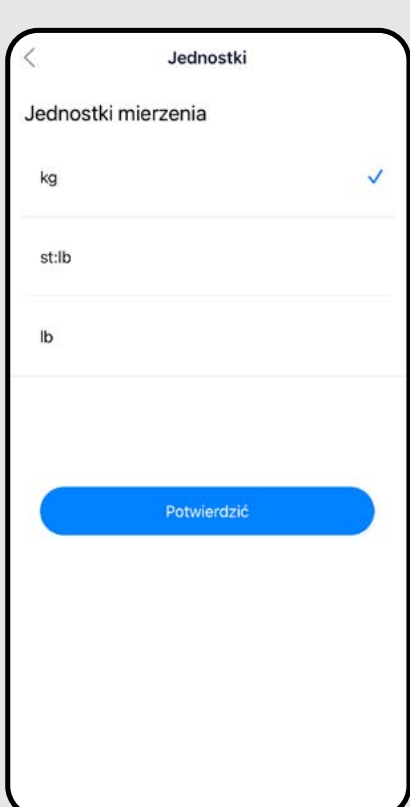
<b>4</b>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozpocznie się proces parowania. Jak tylko proces jest dokończony, aplikacja wyświetli informację o pomyślnym sparowaniu.</li> </ul>
<b>5</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>W następnym kroku aplikacji zaoferuje możliwość dodania własnej nazwy wagi i przyporządkowania wagi i kategoryzacji według pomieszczenia, w którym będzie używana.</li> <li>W celu potwierdzenia kliknij w <b>„Zacznij korzystać“</b>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Uwaga</b></p> <p>Funkcja kategoryzacji produktów według pomieszczeń ma sens raczej w razie używania kilku produktów obsługiwanych przez aplikację. W naszym przypadku (tylko używanie wagi ETA) tej funkcji nie musisz używać.</p>
<b>6</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>W ostatnim kroku nastawienia urządzenia zostanie zaoferowana możliwość nastawienia jednostek wagi.</li> <li>W celu potwierdzenia kliknij w <b>„Nastawić“</b>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Notatka</b></p> <p>Aby anulować parowanie/usunięcie urządzenia, zrób to w sekcji ustawień, patrz 9B-1-b</p>

## 4. PODSTAWOWE RADY DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Używanie wagi ETA z aplikacją AiLink jest intuicyjne i podczas naszych testów nie zarejestrowaliśmy żadnych wyraźnych problemów, na które mógłbyś podczas używania natrafić. Pomimo to smart wyroby wykazują ogólnie większe ryzyko związane z niekompatybilnością urządzeń mobilnych, lub na przykład problemami z połączeniem bezprzewodowym. Dlatego podajemy zbiór podstawowych rad i zaleceń, jak ewentualnie rozwiązać problemy charakterystyczne dla segmentu wyrobów smart.


### 1. Urządzenie smart (telefon komórkowy, ew. tablet):

- używaj zawsze aktualnej wersji aplikacji pobranej z oficjalnych źródeł
- upewnij się, że Twoje urządzenia mają obsługiwane wersje Android i iOS.
- miej aktywną funkcję Bluetooth
- miej aktywne połączenie internetowe dla prawidłowej komunikacji aplikacji z serwerem cloudowym
- w aplikacji udostępnij wymagane uprawnienia, które w niektórych przypadkach zależą od typu telefonu operacyjnego. W razie problemów skontroluj, czy nie masz w ramach np swojego telefonu jakiegoś nadrzędnego nastawienia systemowego, które uniemożliwia aplikacjom korzystanie z niektórych uprawnień - w takim przypadku musisz udzielić aplikacji wyjątku.
- komunikację wagi i telefonu mogą zakłócać niektóre programy (np. VPN, firewall, itp.), których używasz w telefonie. W razie problemów z parowaniem lub z normalną pracą wyłącz te programy.
- w razie problemów wypróbuj parowanie z innym telefonem, w ten sposób wykluczysz problem w danym telefonie.

### 2. Jednostki wagi

- zawsze upewnij się, że używasz dostatecznie naładowanych baterii. Słabe baterie mogą negatywnie wpływać na funkcję połączenia za pośrednictwem Bluetooth, lub sam proces mierzenia. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że baterie, które były dostarczone z wyrobem, w wyniku magazynowania i transportu mogą mieć obniżoną pojemność, dlatego jest wskazane w razie problemów wypróbowanie nowych baterii.
- powierzchnie dotykowe wagi, łącznie z czujnikami ręcznymi, utrzymuj zawsze czyste. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko błędów mierzenia. Na wagę stawaj bosą a dla zapewnienia lepszej przewodności nawilż stopy i dłonie.


- Wypróbuj założenie nowego konta, w ten sposób wykluczysz problem z błędną aktywacją konta;
- W trakcie parowania i używania utrzymuj swoje smart urządzenie w pobliżu wagi (najlepiej do odległości ok. 2 m).

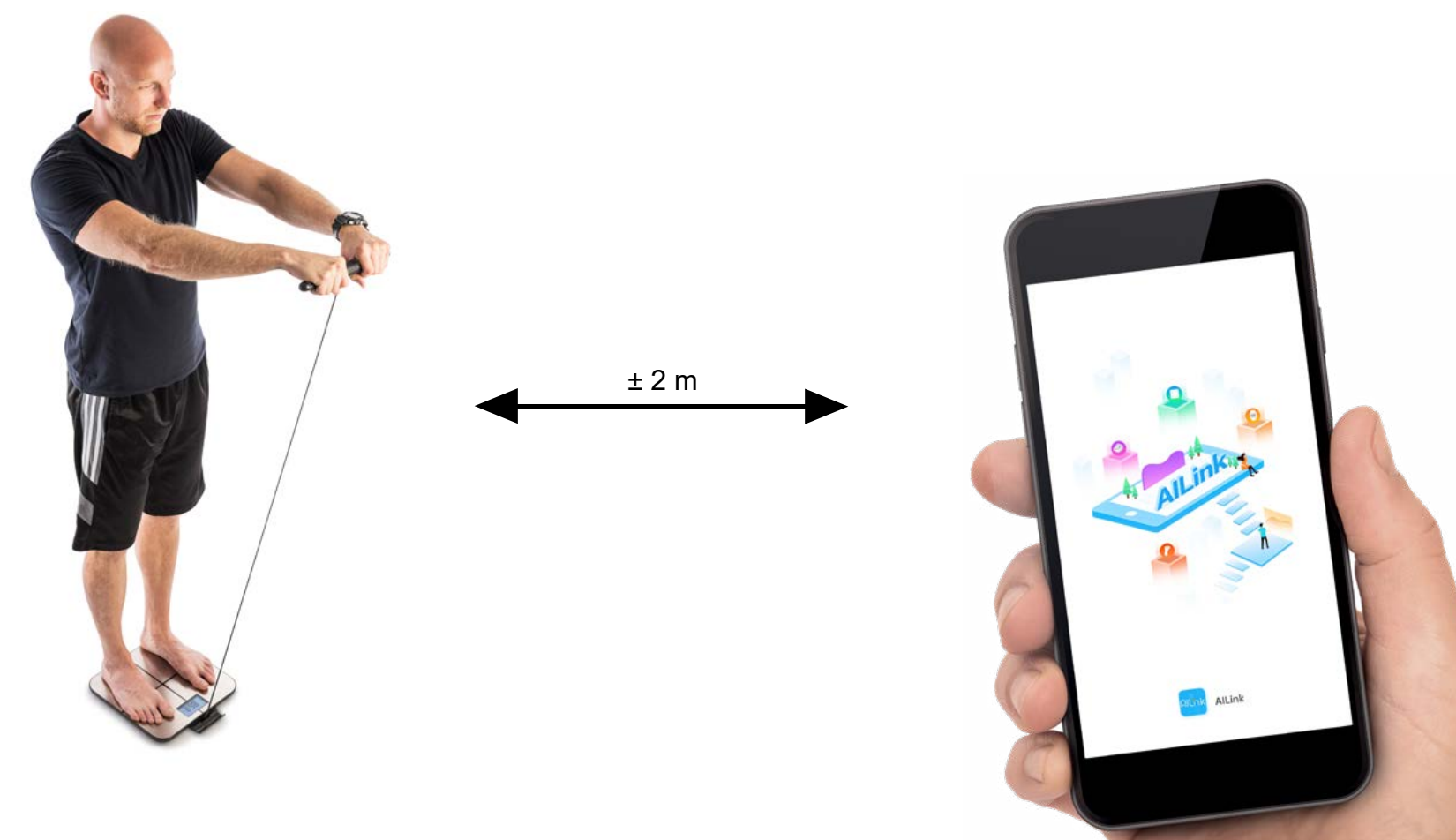




## 5. WAŻENIE I ANALIZA

1

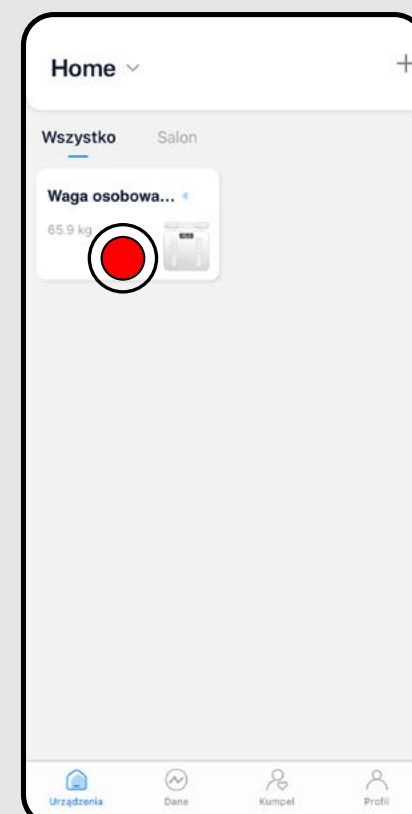


- Po włączeniu aplikacji i pomyślnym sparowaniu kliknij w pole/ikonę sparowanej wagi.
- W ten sposób przejdziesz z ogólnej części aplikacji do części do obsługi i zarządzania samą wagą.

2

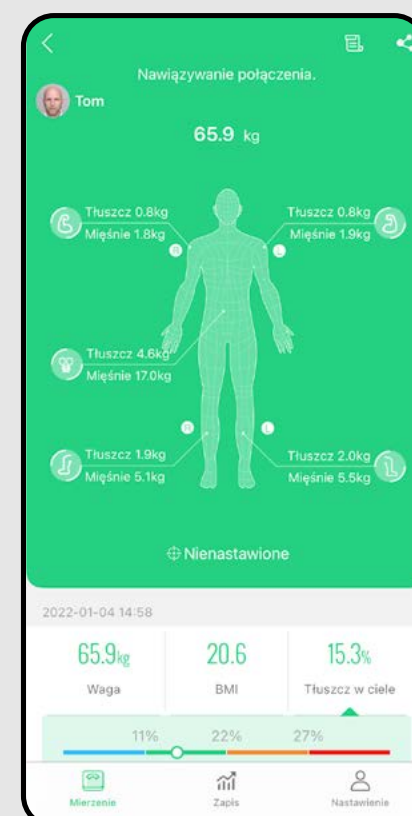


- Pojawi się ekran główny mierzenia.
- Klikając w ikonę profilu w lewym górnym rogu wybierz profil (jeżeli masz ich więcej).
- Włącz wagę naciskając nogą i zaczekaj, dopóki waga nie połączy się z aplikacją - pasek informacyjny wyświetli komunikat „Połączenie udane”.

3

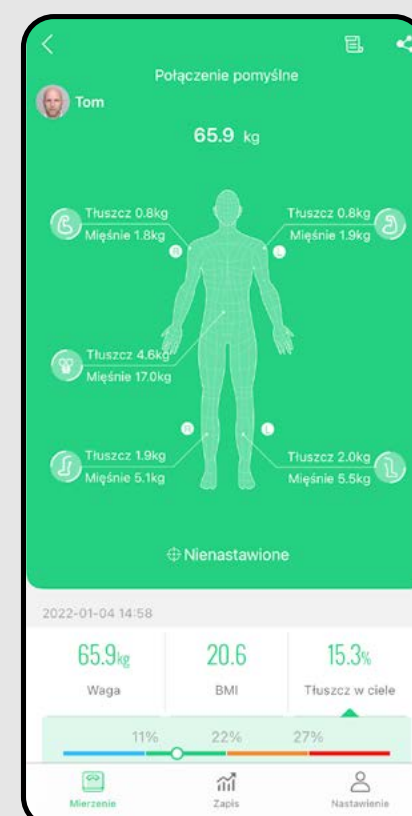


- Teraz możesz zacząć praktyczne ważenie i mierzenie parametrów ciała.
- Stać na wadze, chwycić ręczny czujnik i zacząć na zważenie/zmierzenie.
- Pasek informacyjny i środowisko graficzne wokół korpusu wagi będzie Cię informować i aktualnym stanie mierzenia.

4

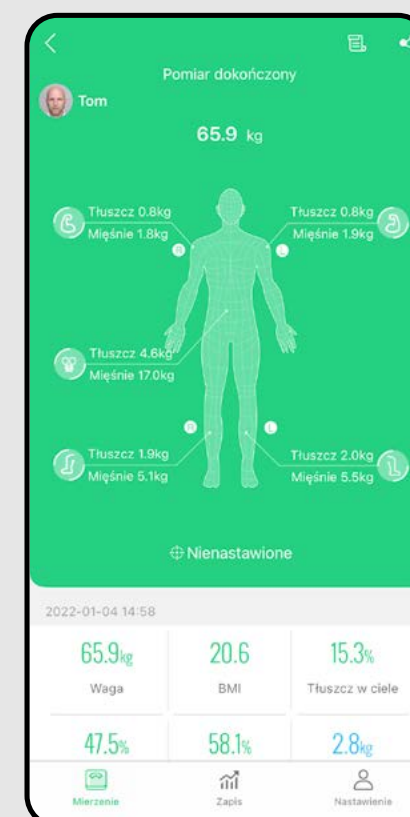

- Po pomyślnym dokończeniu mierzenia pasek informacyjny wyświetli informację, że mierzenie jest dokończone.
- Jednocześnie pojawią się wyniki w grafice korpusu wagi i w dolnej części aplikacji.

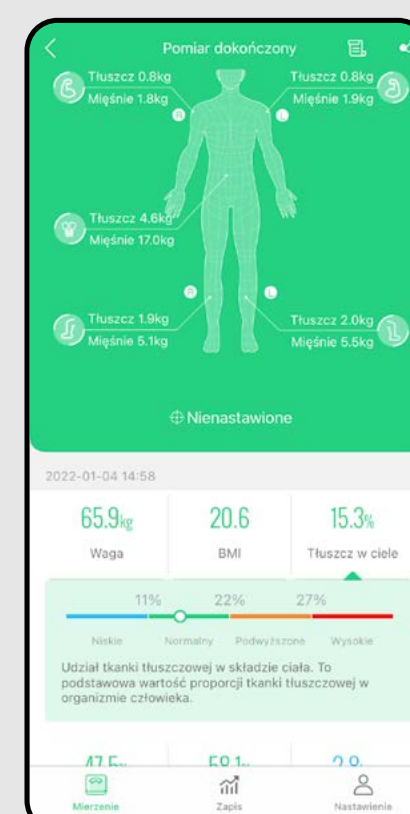

- Dla poszczególnych zmierzonych parametrów w dolnej części możesz klikając wyświetlić informacyjny komentarz tekstowy.

## UWAGI

- Pamiętaj, że zmierzone wartości są tylko przybliżone i mogą być niedokładne w porównaniu z wynikami dokładnych analiz medycznych. Ponieważ mierzenie ludzkiego ciała jest bardzo złożone i drogie, różni producenci stosują różne orientacyjne metody mierzenia. Często zatem wzajemnie się różnią wyniki tych profesjonalnych urządzeń. Z tego powodu zaleca się używanie tylko jednego urządzenia i obserwowanie na nim trendu poszczególnych parametrów.
- Jeżeli podłączenie wagi jest nieudane, upewnij się, że masz w telefonie aktywny Bluetooth, następnie kliknij dla ponownego połączenia w tekst na pasku informacyjnym. Ewentualnie przeczytaj instrukcje w rozdziale 3.
- W przypadku, kiedy mierzenie lub analiza nie udało się, spróbuj powtórzyć cały proces ważenia/mierzenia. Ewentualnie przeczytaj instrukcje w rozdziale 3.

## 6. ZWYŚWIETLANIE WYNIKÓW


1



- Kliknij w ikonę „Zapis” na dolnym pasku aplikacji. W ten sposób przejdziesz do sekcji wyobrażenia graficznego wyników mierzenia.
- Klikając w poszczególne parametry w dolnej części aplikacji wyświetlisz ich wykres.
- W celu wyświetlenia kalendarza kliknij w ikonę w prawym górnym rogu, lub w pole wyniku mierzenia.




2

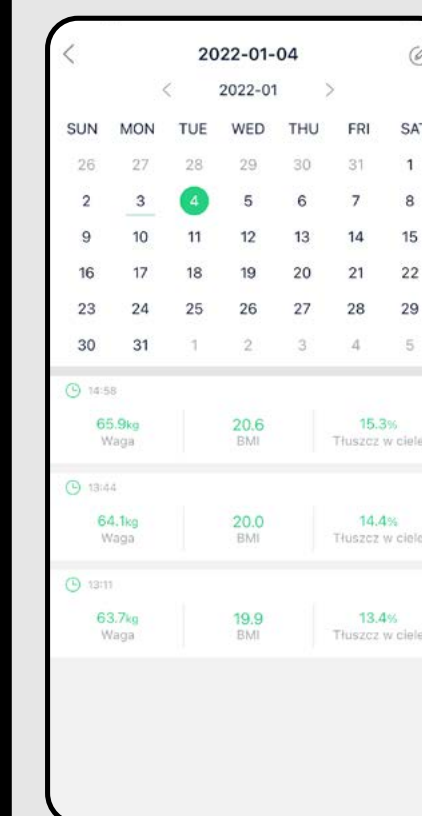

- W ramach kalendarza widzisz, w których dniach zostało przeprowadzone mierzenie. Klikając w poszczególne dni wyświetlisz dane mierzenia w dolnej części pod kalendarzem.

**Rada:**  
Kalendarz możesz przeglądać z pomocą strzałek w jego górnej części.

3

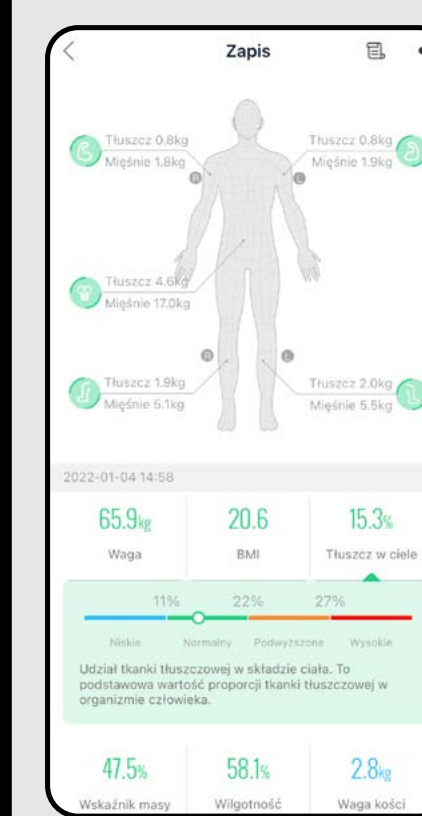


- Klikając w poszczególne mierzenia wyświetlisz następujący zapis, który możesz dalej współużytkować.



### 7. WSPÓŁUŻYTKOWANIE WŁASNYCH WYNIKÓW



Aplikacja AiLink oferuje kilka możliwości współużytkowania wyników. W zasadzie umożliwia współużytkowanie zawsze tylko pojedynczych pomiarów. Na poszczególne ekrany współużytkowania dostaniesz się według schematu na tej stronie.

Zawsze jednak może wytworzyć tzw. „screenshot“, to znaczy zdjęcie ekranu jakiegokolwiek części aplikacji, z którym następnie pracujesz jak z każdym innym obrazkiem.

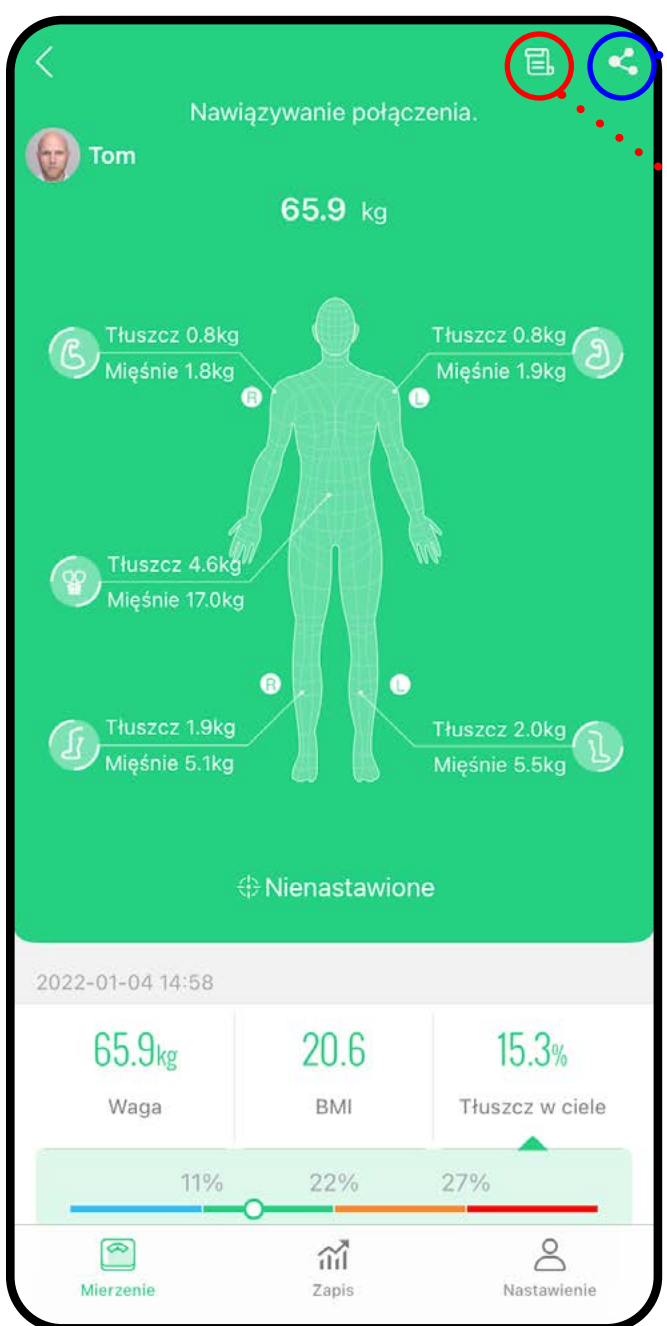


### Zapis ostatniego mierzenia

Na ekranie głównym znajdziesz wyniki ostatniego mierzenia bez konieczności przeglądania historii. Tak można skontrolować wyniki od razu po zmierzeniu.

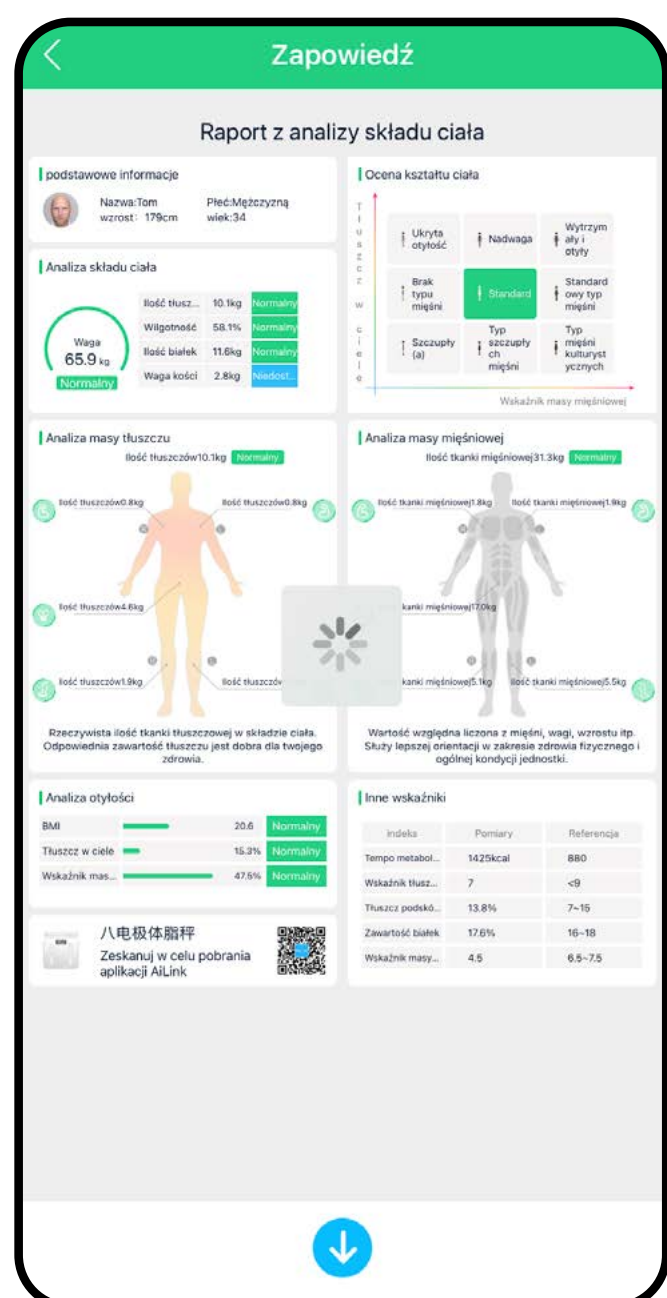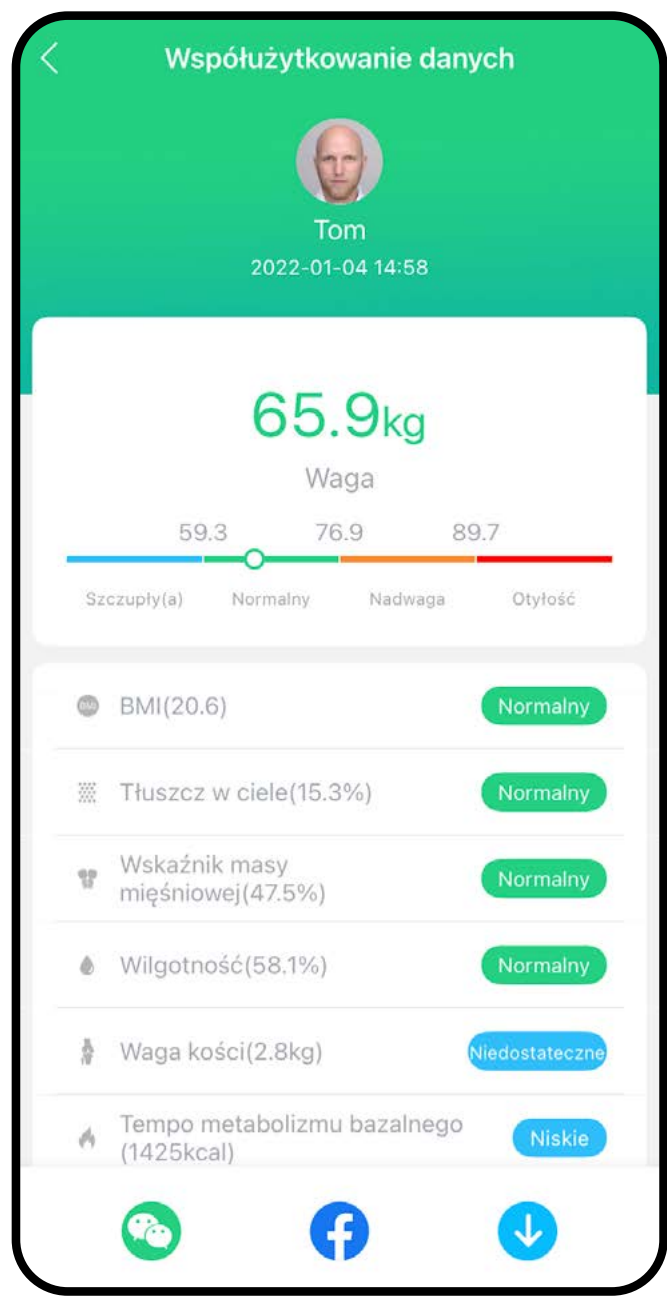

### Współużytkowanie konkretnego mierzenia

Podstawowa forma raportu konkretnego mierzenia, który można bądź bezpośrednio pobrać do magazynu danych urządzenia, lub współużytkować z pomocą podłączonych sieci społecznościowych (Facebook, WeChat) za pośrednictwem odpowiednich przycisków na dolnym pasku.

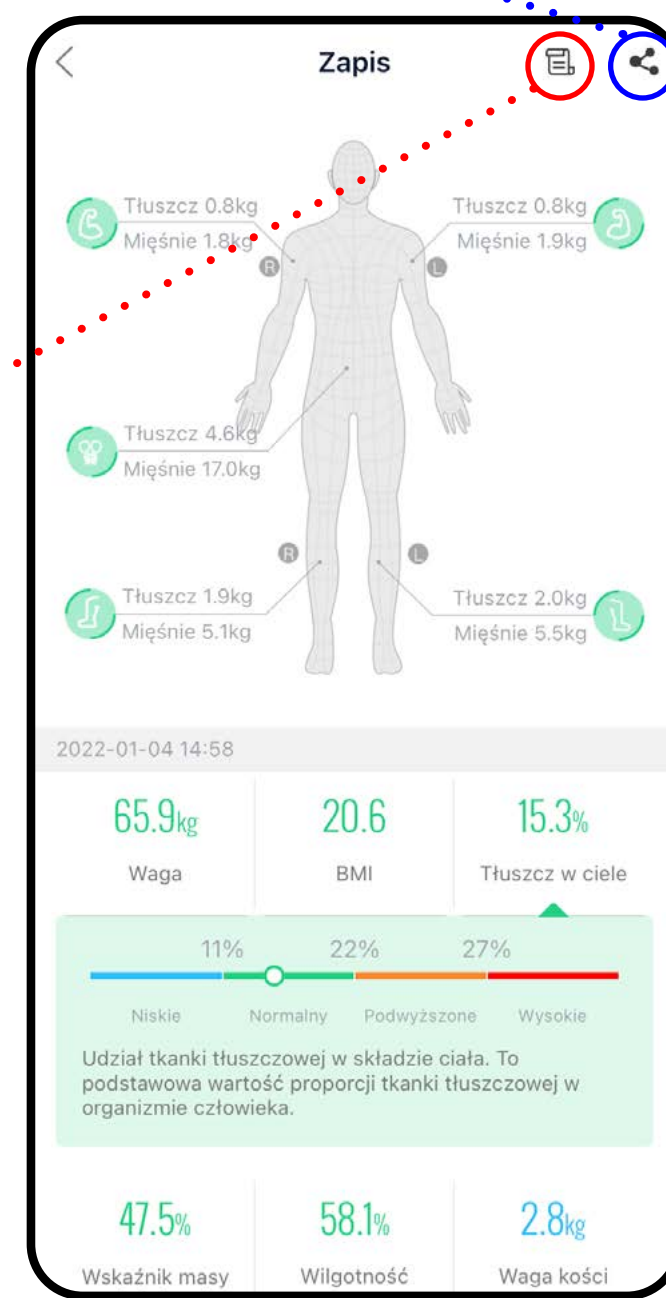

### Zapis konkretnego mierzenia


To wyświetlenie zapisu konkretnego mierzenia uzyskasz w sekcji „Zapis“ - to znaczy w historii, jak jest pokazane w rozdz. 6.3

### Bardziej szczegółowy raport z mierzenia

Aplikacja wygeneruje szczegółowy raport, który dotyczy wybranego mierzenia. Raport można pobrać do magazynu danych (klikając w ikonę strzałki w dolnej części ekranu) urządzenia w formacie obrazka a następnie dalej z nim pracować. (Nie można go jednak bezpośrednio z aplikacji zamieszczać w sieciach społecznościowych.




### 8. PRZYJACIEL - WSPÓŁUŻYTKOWANIE MIERZENIA

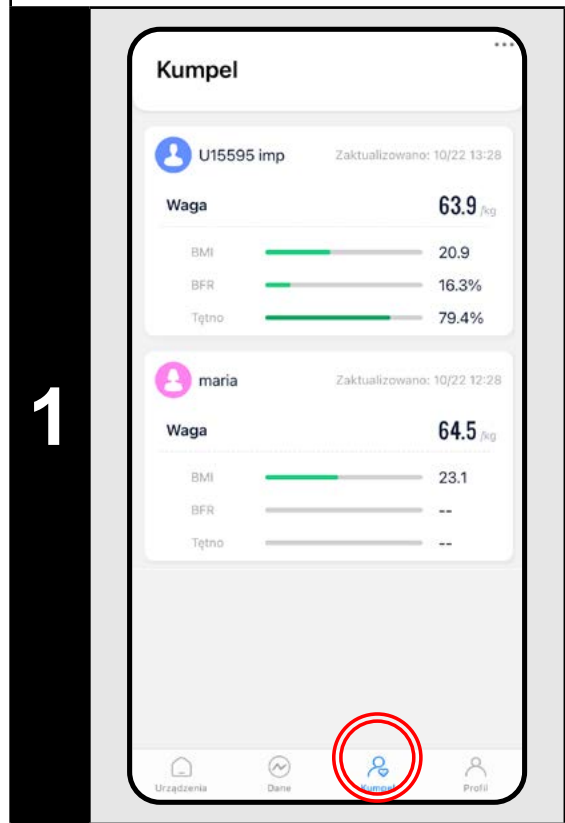

• Oprócz możliwości współużytkowania własnych wyników aplikacja umożliwia też wzajemne połączenie kont użytkowników AiLink.

• W ten sposób uzyskasz wgląd do wyników osoby, z którą jesteś połączony i na odwrót - ta osoba widzi Twoje wyniki.

• **Przykład:** na ilustracji po lewej stronie widzisz, że aktualny profil współużytkuje swoje wyniki z użytkownikiem „imp”. Użytkownik IMP zawiera kilka profili, ale postanowił współużytkować tylko swój główny profil i profil użytkownika „maria”.

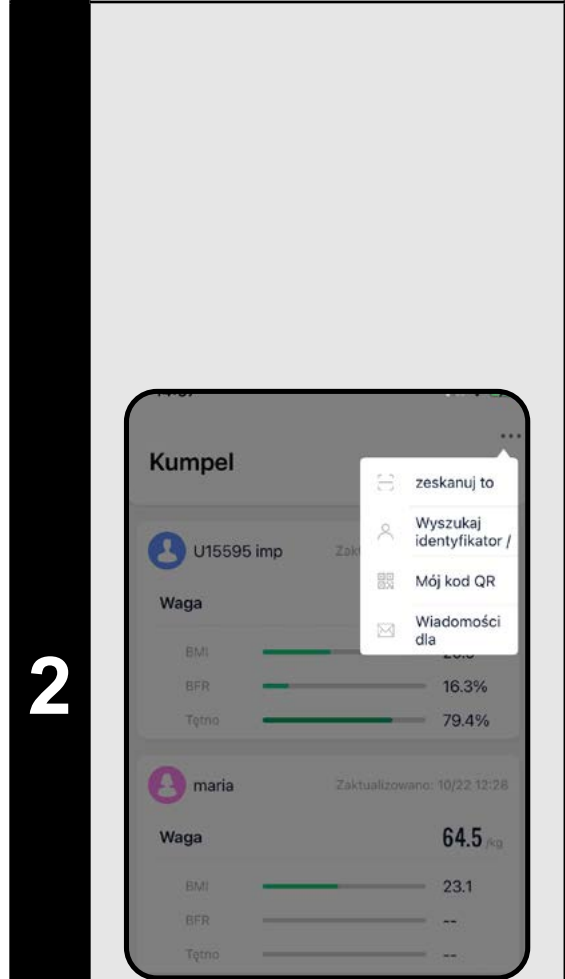

• Dla dodania nowego przyjaciela jest konieczne, aby jedno z kont wstąpiło do części „Kumpel” i kliknęło w „...”. Następnie masz do dyspozycji 2 możliwości:


1) Z pomocą opcji „Zeskanuj to” można z Twojego telefonu zeskanować kod QR, który otrzymasz od drugiego konta, z którym chcesz współużytkować dane. Kod QR uzyskasz tak, że w telefonie drugiego konta klikniesz w opcję „Mój kod QR”, ten kod QR zeskanujesz i potwierdzisz współużytkowanie profili.

2) Z pomocą opcji „Wyszukaj ID / konto” zadaj e-mail drugiego konta i potwierdź.

• Jak tylko odeślesz drugiej stronie żądanie, pojawi się jej w aplikacji informacja w sekcji „Kumpel”, przy ikonie pojawi się jeden z wyobrażonych czerwonych znaków (👤/👤). Następnie wybierz „...”, przejdź na „Nowości przyjaciół” i potwierdź przyjęcie żądania.




**Uwaga**  
Konto, które wysłało żądanie, wysyłając/przyjmując żądanie może wybrać, jakie swoje podprofile udostępni drugiej stronie.

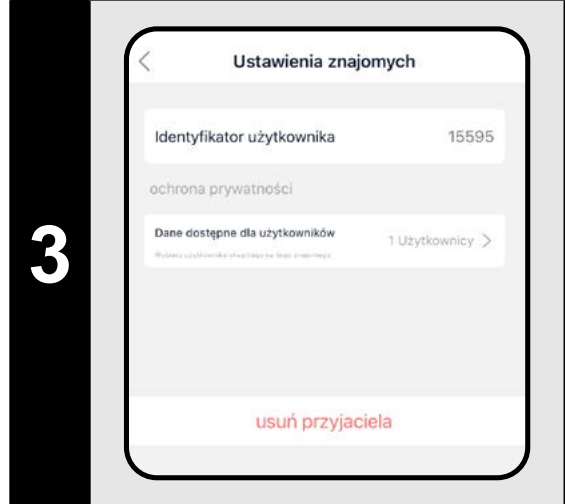

• Jeżeli chcesz zmienić jakieś parametry współużytkowanego konta (np. nazwę konta, anulowanie współużytkowania, zmiana współużytkowanych podprofilu), kliknij w sekcji „Kumpel” w dany profil a następnie w ikonę nastawienia „⚙️”.

### 9A. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Aplikacja oferuje 2 podstawowe możliwości nastawienia. Nastawienie w ramach ogólnej części aplikacji (która jest wspólna dla zarządzania wszystkimi wyrobami, które są w aplikacji używane) i nastawienie w ramach części aplikacyjnej przeznaczonej dla wagi ETA. Niektóre nastawienia w obu przypadkach pokrywają się, niektóre są specyficzne.

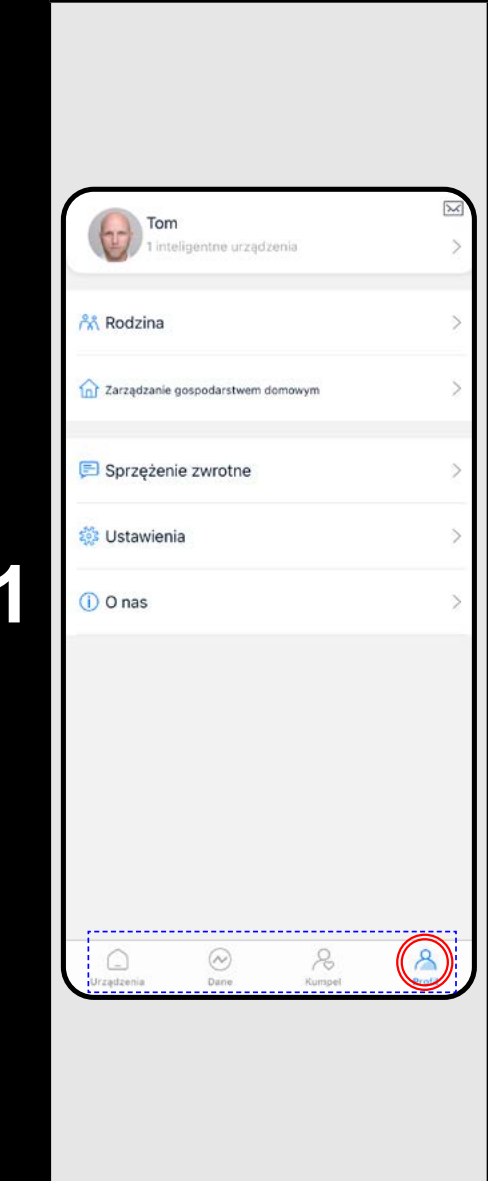

• **W części ogólnej można nastawić:**

a) **Zmiana głównego profilu** (patrz poniżej 9A-2)


b) **Zarządzanie profilami** (patrz poniżej 9A-3)

c) **Zarządzanie gospodarstwem domowym**  
Zarządzanie gospodarstwem domowym, pomieszczeniami i związanymi z nimi produktami. Do celów używania tylko wagi ETA ta funkcja jest zbędna.

d) **Sprzężenie zwrotne** - Można napisać do autorów aplikacji. **Tego pola raczej nie używaj.** Zalecamy skorzystanie z formularza bezpośrednio z części aplikacyjnej patrz 9B-1!

e) **Ustawienia** - Możliwość przełączenia języka aplikacji i wyświetlania podłączonych urządzeń.


f) **O nas** - Wyświetli wersję aplikacji i możliwość wglądu do warunków umownych aplikacji.

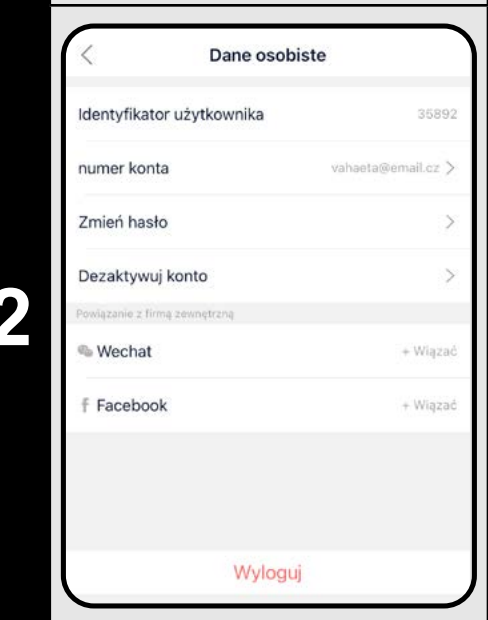

• Po kliknięciu w ikonę profilu (👤) przejdziesz do nastawienia profilu.

• Tu można uzyskać ID konta, zmienić hasło, lub deaktywować konto.

• Możliwości aplikacji trzecich stron (WeChat, Facebook) w tej części aplikacji służą tylko dla informacji, czy jesteś zalogowany do konta z pomocą tych usług.

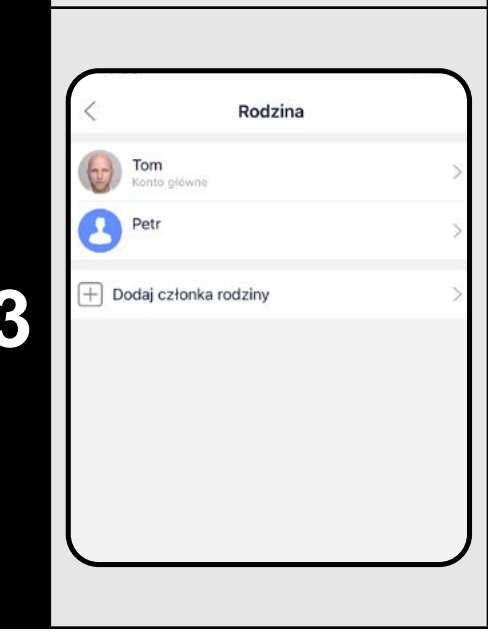


• Sekcja „Rodzina” umożliwia łatwe zarządzanie profilami. W menu widzisz zarówno główny profil, jak też wszystkie wytworzone podprofile.

• Po kliknięciu w dany profil możesz zmieniać podstawowe informacje (fotografia, pseudonim, urodziny, płeć) ewentualnie możesz usunąć profil.

• W celu wytworzenia nowego podprofilu kliknij w „Dodaj członka rodziny”.

### 9B. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ APLIKACYJNA

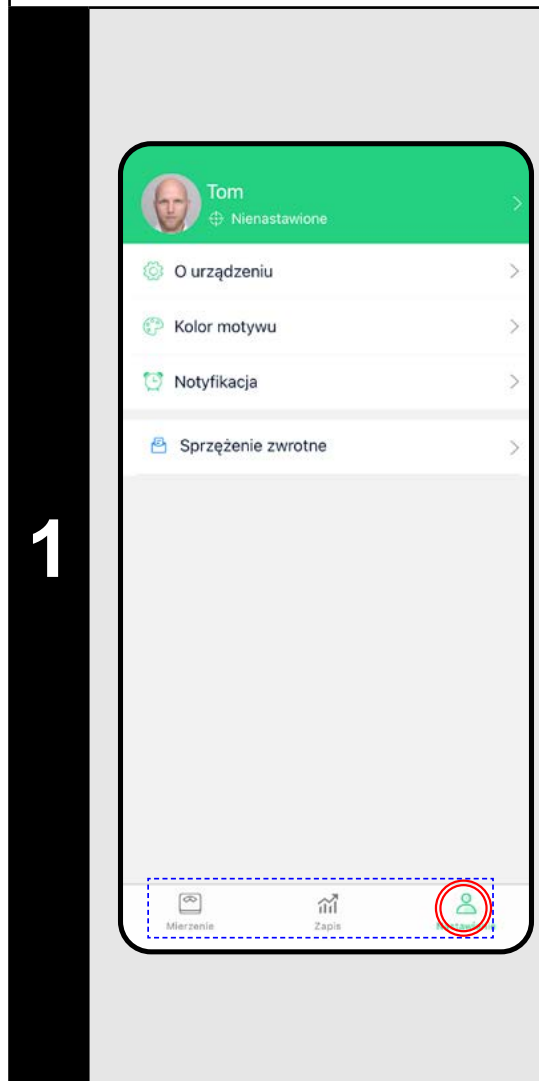

• **W części aplikacyjnej można nastawić:**


a) **Zmianę profili** (patrz poniżej 9B-2)

b) **Zarządzanie urządzeniami** (wagą)  
Możliwość zmiany nazwy i usunięcia urządzenia, zmiany jednostek mierzenia i informacja o firmwarze.

c) **Kolor motywu** - Nastawienie kolorowego motywu aplikacji.

d) **Notyfikacja** - Funkcja tzw. budzika. Można nastawić 3 różne czasy przypominania o ważeniu.


e) **Sprzężenie zwrotne** - Można napisać do autorów aplikacji uwagi, pytania, itp. **Najlepiej korzystać z tej możliwości** (raczej niż pole w ogólnej części nastawienia).

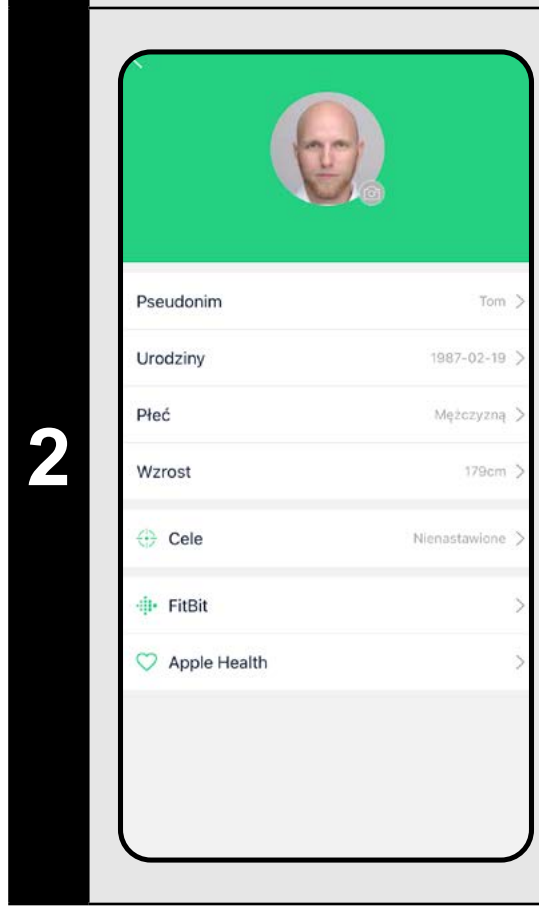

• Po kliknięciu w ikonę profilu (👤) przejdziesz do nastawienia profilu.

• Tu można zmienić pseudonim, datę urodzenia, płeć, wzrost i wagę docelową.


• Jednocześnie można tu sparować aplikację z aplikacjami trzecich stron, które będą przyjmować wybrane parametry zmierzone przez wagę ETA. Chodzi o aplikację FitBit i Google Fit (ew. Apple Health dla użytkowników urządzeń Apple).

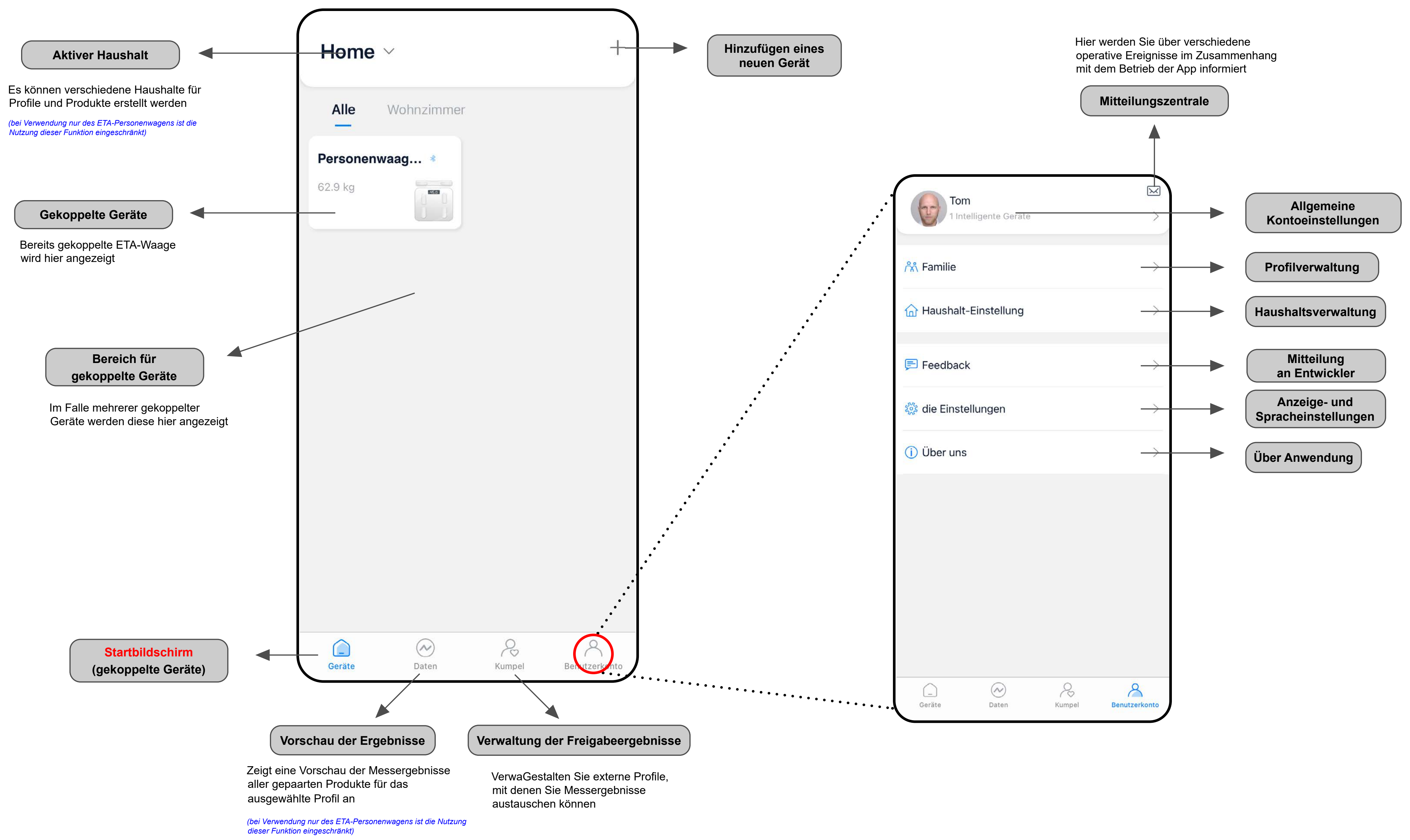





Übergang zu dem für ETA-Waagen vorgesehenen Teil der Anwendung

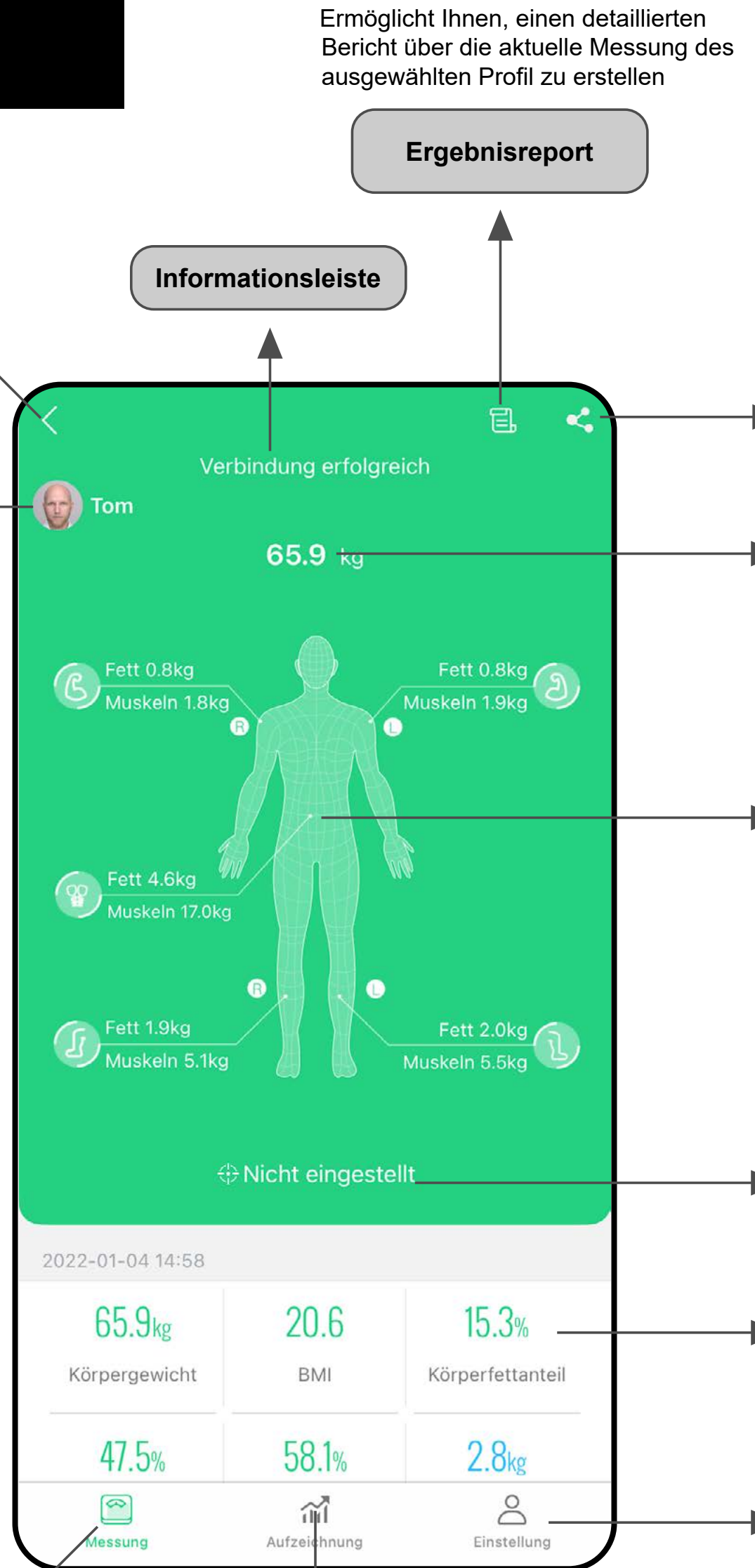

**Schritt zurück**

**Profileinstellungen**  
Ermöglicht Ihnen, zwischen Profilen zu wechseln, einschließlich der Möglichkeit, neue Profile zu erstellen

**Informationsleiste**

**Ergebnisreport**  
Ermöglicht Ihnen, einen detaillierten Bericht über die aktuelle Messung des ausgewählten Profil zu erstellen

**Teilen von Ergebnissen**  
Ermöglicht das Teilen des aktuellen Messergebnisses über unterstützte soziale Netzwerke (WeChat, Facebook) oder durch Speichern der Aufzeichnung im Gerätespeicher

**Gemessenes Gewicht**

**Grafische Darstellung der Ergebnisverteilung**

**Festlegung des Ziel- oder Wunschgewichts**

**Ergebnisfeld**  
In diesem Teil sehen Sie die Ergebnisse der einzelnen Parameter (mit Textkommentar nach dem Anklicken)

**Einstellung**  
Der Abschnitt mit den Einstellungen für das Gerät. Sie können Profil-, Geräte- und Farbeinstellungen, sowie Benachrichtigungen verwalten oder eine Rückmeldung/ Feedback an den App-Entwickler senden.

**Verschachtelter Startbildschirm der Personenwaage**

**Messverlauf, Graphik**

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in ETA-Produkte. Diese Anleitung richtet sich an alle ETA8781-Besitzer, die das volle Potenzial der AILINK-App nutzen möchten.

Weitere Informationen, Hinweise und Tipps zu Ihrer Waage finden Sie auch auf unserer Website:

<https://eta-hausgeraete.de/care>

Wir aktualisieren diese Website ständig, um das neueste Produktwissen zu sammeln.

Wir aktualisieren diese Website ständig und sammeln die neuesten Informationen über das Produkt. Bei Fragen zur Funktion der Anwendung oder bei Problemen gehen Sie zunächst auf die oben genannte Website. Sollten auch die dortigen Informationen nicht zur Lösung Ihres Anliegen beitragen, können Sie uns unter der Informations-E-Mail kontaktieren:

[info@eta-hausgeraete.de](mailto:info@eta-hausgeraete.de)

**1. INSTALLATION DER APP**

Sie finden die App im Apple Store oder Google Play, oder Sie können den folgenden QR-Code verwenden, um den Vorgang zu beschleunigen:




Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon (Tablet).

**KOMPATIBILITA**

Betriebssystem für Mobiltelefone (Tablets)	Android 6.0 und höher
	IOS 9.0 und höher


**2. KONTOREGISTRIERUNG UND ANMELDUNG**

1

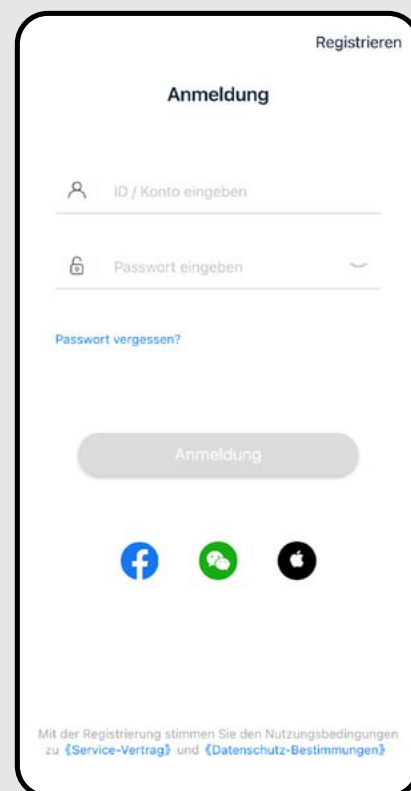


- Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, schalten Sie diese ein. Der grundlegende Anmeldebildschirm wird angezeigt.
- Auf dem Bildschirm können Sie auch zur Registrierung eines neuen Konto wechseln, Ihr Passwort zurücksetzen wenn Sie es verloren haben oder sich über eine Drittanbieter-App anmelden.
- Wenn Sie noch kein Konto haben, gehen Sie zu **"Registrieren"** (oder mit einer Drittanbieter-App anmelden).
- Geben Sie Ihren Kontonamen ein, um sich anzumelden (E-Mail) mit Passwort und klicken Sie dann auf **"Anmelden"**. Im Fall des Android-Betriebssystem müssen Sie das Kontrollkästchen für die Nutzungsbedingungen in der unteren linken Ecke deaktivieren, bevor Sie sich anmelden.

2

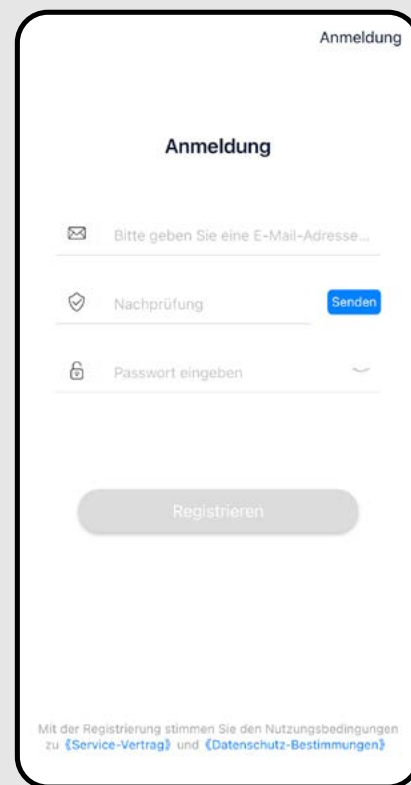

- Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein sicheres Passwort.
- Klicken Sie dann auf **"Senden"**; das System schickt Ihnen einen Verifizierungscode an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, den Sie dann in das Feld **"Nachprüfung"** eingeben. (Wenn der Code nicht nach dem angegebenen Zeitlimit eintrifft, fordern Sie keinen neuen an und warten Sie einige Minuten, der Code kann verspätet eintreffen).
- Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf **"Registrieren"**.

3

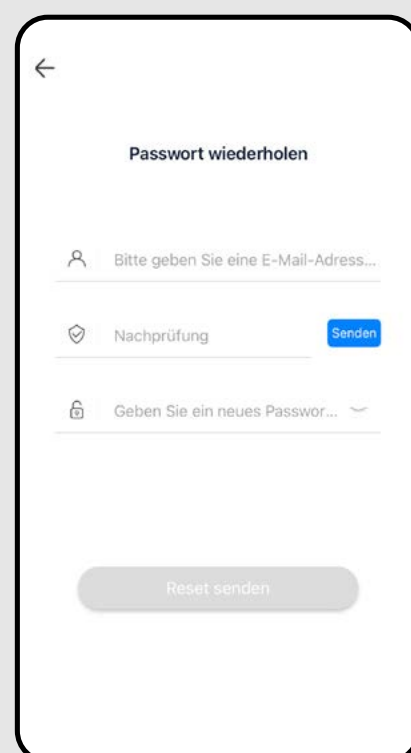


- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es über die E-Mail-Adresse zurücksetzen, mit der Sie Ihr Konto erstellt haben.
  - Geben Sie die E-Mail ein, und wenn Sie den Bestätigungscode erhalten, geben Sie ihn in das vorgesehene Feld ein.
- Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, bis der Verifizierungscode eintrifft. Bitte haben Sie Geduld. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass der Code nicht den Spamkorb /Filter Ihres E-Mail-Clients blockiert. Verwenden Sie idealerweise eine gängige E-Mail-Adressen/Kunden (z.B. gmail, u.ä.).**

**3. GERÄTEKOPPLUNG**


1



- Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, sehen Sie den Startbildschirm, in diesem Fall ohne das gekoppelte Gerät.
  - Um die App mit der Waage zu koppeln, klicken Sie auf **"Gerät hinzufügen"**.
- \* Wenn Sie bereits ein Gerät gekoppelt haben, verwenden Sie das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke, mit dem Sie auf die gleiche Weise ein weiteres Gerät hinzufügen können.*

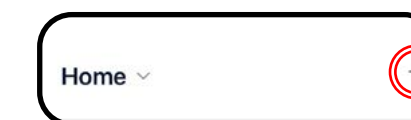


2

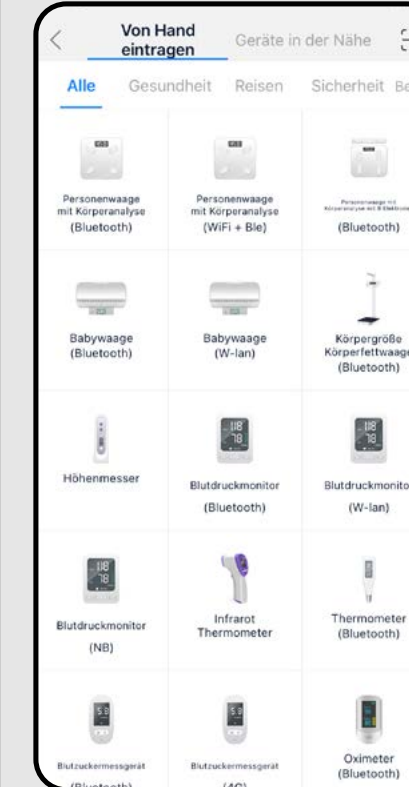

- Es wird eine Liste der verschiedenen Gerätetypen angezeigt, für die die App bestimmt ist.


**Anmerkung:**  
ETA verwendet die App nur für die ETA8781. Andere Geräte, die in der App aufgeführt sind, werden derzeit nicht unterstützt.

3

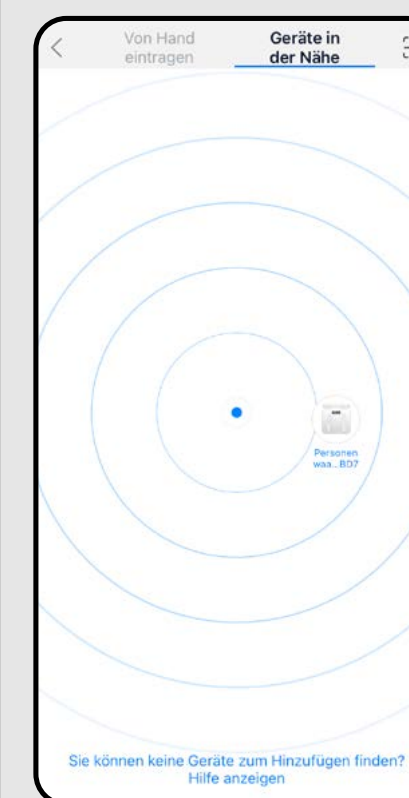


- Am besten finden Sie das Gerät automatisch, indem Sie auf **"Geräte in der Nähe"** klicken.
- Die Suche nach Geräten in der Nähe startet automatisch.
- Schalten Sie die Waage ein, indem Sie diese betreten
- Sobald die Waage in der App erscheint, klicken Sie auf ihre Icon/ Datei.



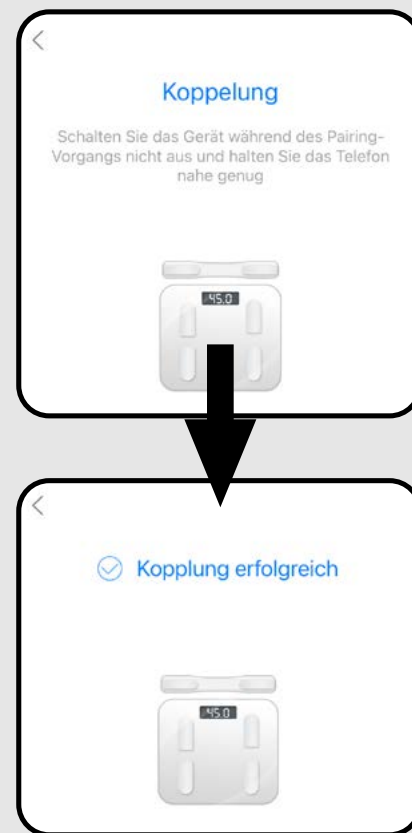


- Der Kopplungsvorgang wird gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt die App eine Information über die erfolgreiche Kopplung an.

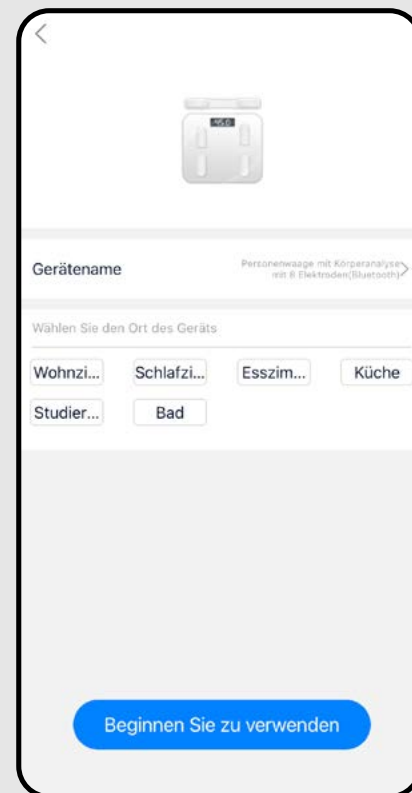

- Im nächsten Schritt bietet die App die Möglichkeit, einen eigenen Name für Ihre Waage hinzuzufügen. Ebenfalls können Sie den Raum, in dem diese verwendet werden soll, zuzuordnen und kategorisieren.
- Zur Bestätigung klicken Sie auf "**Beginnen Sie zu verwenden**".

#### Hinweis

Die Funktion, Produkte nach Räumen zu kategorisieren, macht mehr Sinn, wenn mehrere Produkte verwendet werden, die die App unterstützt. In unserem Fall (wir verwenden nur ETA-Waagen) brauchen Sie diese Funktion nicht zu verwenden.

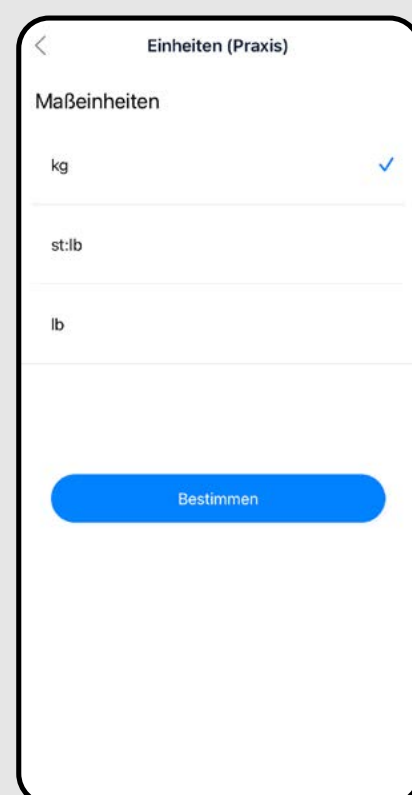

- Im letzten Schritt der Geräteeinstellung wird Ihnen die Möglichkeit geboten, die Gewichtseinheiten einzustellen.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf "**Bestimmen**".

#### Notiz

Um das Koppeln/Löschen des Geräts abubrechen, tun Sie dies im Einstellungsbereich, siehe 9B-1-b

## 4. GRUNDLEGENDE HINWEISE UND TIPPS ZUR VERWENDUNG

Die Verwendung der ETA-Waage mit AiLink ist intuitiv und wir haben während unserer Test keine signifikanten Probleme oder Schwierigkeiten festgestellt, die bei der Verwendung auftreten könnten. Dennoch bergen hochwertige Produkte im Allgemeinen ein erhöhtes Risiko im Zusammenhang mit der Inkompatibilität von Mobilgeräten oder Problemen mit der drahtlosen Konnektivität. Daher bringen wir eine Reihe grundlegender Ratschläge und Empfehlungen zur Lösung von Problemen mit, die für das Segment der hochwertigen Produkte charakteristisch sind.


### 1. Smart-Gerät (Handy oder Tablet):

- Verwenden Sie immer die neueste Version der App, die von offiziellen Quellen heruntergeladen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte unterstützte Versionen von Android und iOS enthalten.
- Lassen Sie die Bluetooth-Funktion aktiv.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive Internetverbindung für eine ordnungsgemäße Kommunikation der App mit dem Cloud-Server haben.
- Erteilen Sie der App die erforderlichen Berechtigungen, die in einigen Fällen von der Art des Betriebssystems des Telefon abhängen. Stellen Sie bei Problemen sicher, dass Sie beispielsweise keine übergeordneten Systemeinstellungen in Ihrem Telefon haben, die die App daran hindern, bestimmte Berechtigungen zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie der App eine Ausnahme erteilen.
- Die Kommunikation zwischen der Waage und Ihrem Telefon kann durch einige Programme (z.B. VPN, Firewall u.a.), die Sie auf Ihrem Telefon verwenden, gestört werden. Bei Problemen mit dem Koppeln oder dem normalen Betrieb sollten Sie diese Programme deaktivieren.
- Versuchen Sie bei Problemen, die Kopplung mit einem anderen Handy durchzuführen, um ein Problem mit dem Handy auszuschließen.

### 2. Gewichtseinheit

- Stellen Sie sicher, dass Sie immer ausreichend geladene Batterien verwenden. Schwache Batterien können die Funktion der Bluetooth-Verbindung oder den Messvorgang selbst, negativ beeinflussen. In einigen Fällen können die mitgelieferten Batterien aufgrund von Lagerung und Transport eine geringere Kapazität aufweisen. Es ist daher ratsam, neue Batterien zu verwenden, wenn Probleme auftreten.
- Steigen Sie barfuß auf die Waage und befeuchten Sie Ihre Füße und Handflächen, um eine bessere Leitfähigkeit zu gewährleisten.


- Versuchen Sie, ein neues Konto zu erstellen, um das Problem einer falschen Kontoaktivierung zu vermeiden.
- Halten Sie Ihr Smart-Gerät während des Koppeln und der Verwendung in der Nähe der Waage (idealerweise im Abstand von ca. 2 m).

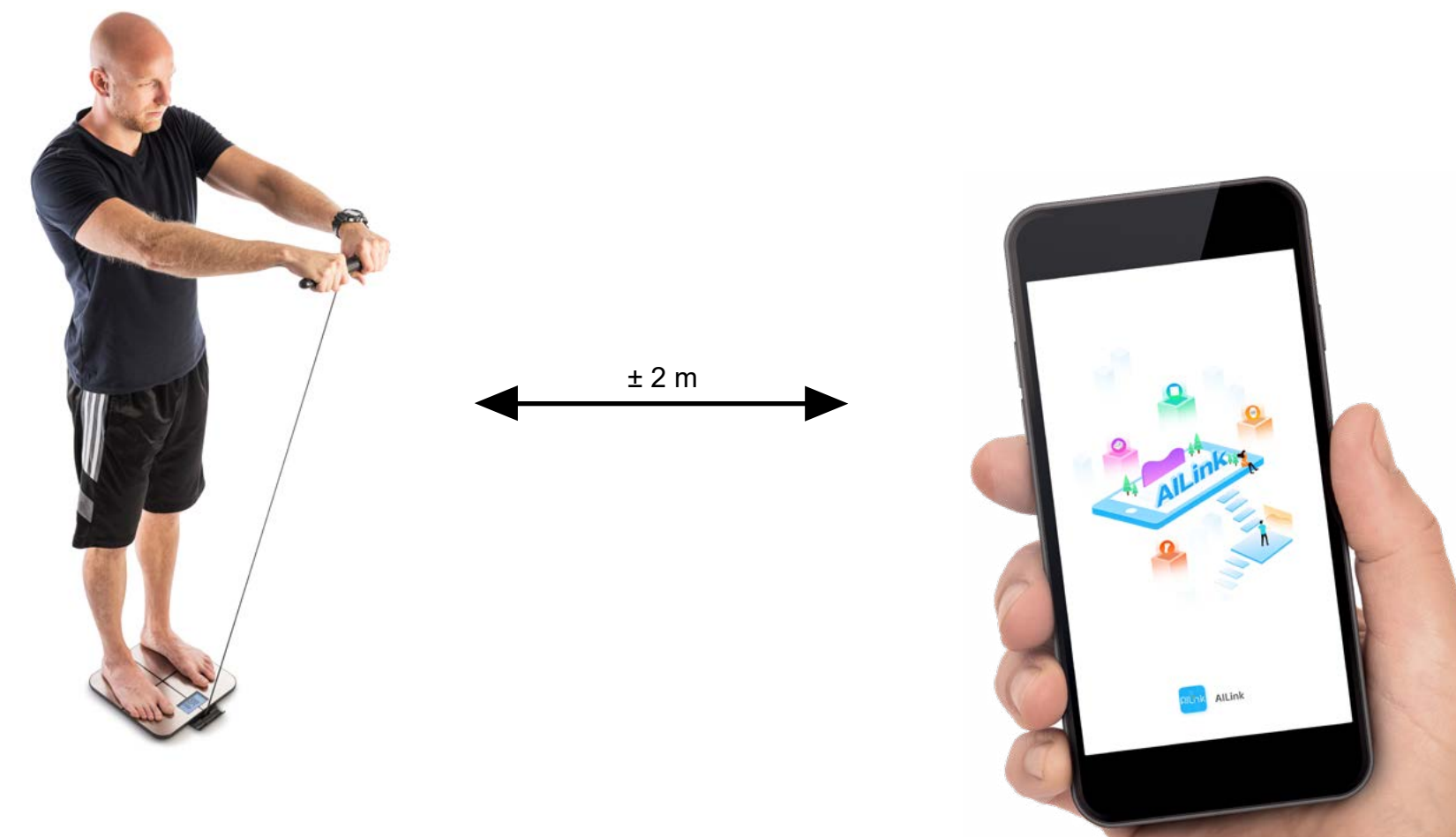




### 5. WIEGEN UND ANALYSE

1

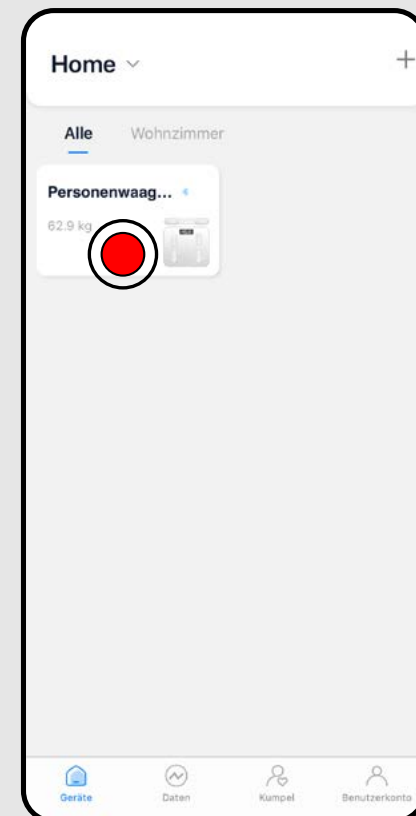


- Klicken Sie nach dem Einschalten der App und erfolgreicher Kopplung auf das Feld / Symbol der gekoppelten Waage.
- Dies führt Sie vom allgemeinen Teil der App zum Kontroll- und Verwaltungsteil der Waage selbst.

2

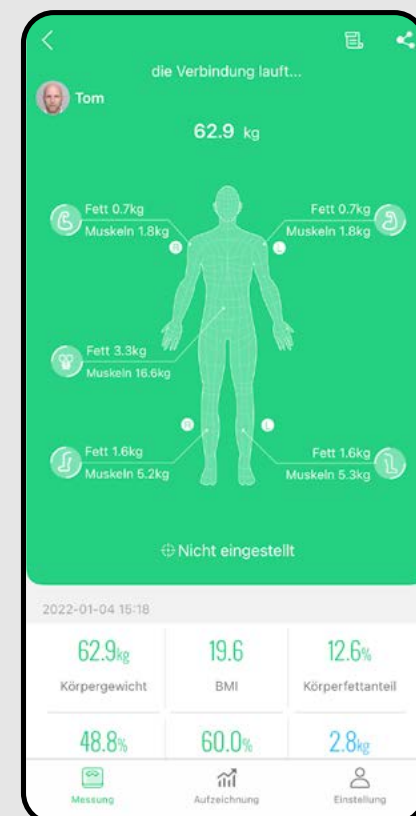


- Der grundlegende Messbildschirm wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Profil-Icon / -Datei in der oberen linken Ecke, um ein Profil auszuwählen (falls Sie mehr als eines verwenden).
- Schalten Sie die Waage durch Betreten ein und warten Sie, bis sich die Waage mit der Anwendung verbindet. In der Informationsleiste erscheint die Meldung „**Verbindung erfolgreich**“.

3

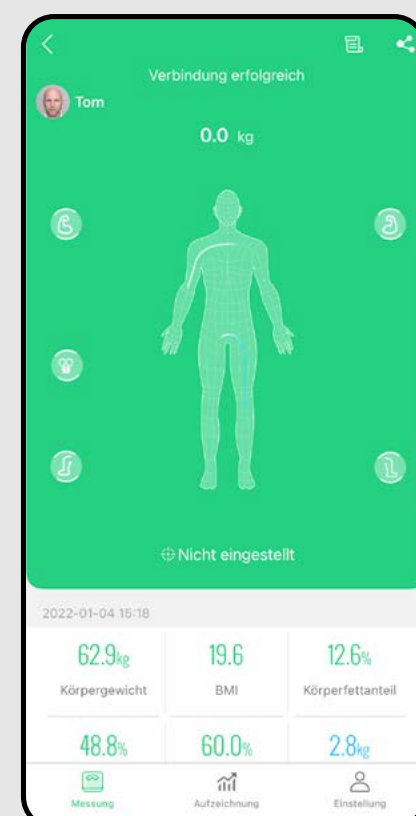

- Jetzt können Sie mit dem praktischen Wiegen und Messen der Körperparameter beginnen.
- Steigen Sie auf die Waage, greifen Sie den Handsensor und warten Sie auf das Wiegen / Messen.
- Die Informationsleiste und die grafische Umgebung um den Körperumfang informieren Sie über den aktuellen Messstatus.

4

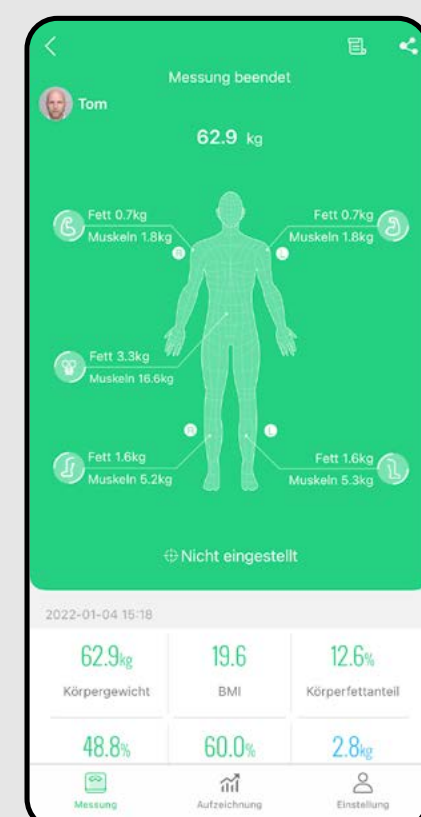

- Nach erfolgreichem Abschluss der Messung, zeigt die Informationsleiste den Abschluss der Messung an.
- Ergebnisse in Umfang-Körper-Grafiken und am unteren Rand der Anwendung, werden gleichzeitig angezeigt.




- Sie können unten auf jeden gemessenen Parameter klicken, um einen informativen Textkommentar anzuzeigen.

### ANMERKUNGEN

- Bitte beachten Sie, dass die gemessenen Werte nur Richtwerte sind und im Vergleich zu den Ergebnissen tatsächlicher medizinischer Analysen ungenau sein können. Da die Vermessung des menschlichen Körper sehr komplex und teuer ist, verwenden verschiedene Hersteller unterschiedliche indikative Messmethoden. Die Ergebnisse dieser professionellen Geräte weichen oft voneinander ab. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, ein Gerät zu verwenden und die Entwicklung der einzelnen Parameter an diesem zu beobachten.
- Wenn die Verbindung zur Waage fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist, und klicken Sie dann auf den Text in der Infoleiste, um die Verbindung wiederherzustellen. Alternativ können Sie auch die Anweisungen in Kapitel 3 lesen.
- Wenn die Messung oder Analyse fehlgeschlagen ist, versuchen Sie, den gesamten Wiege-/Messvorgang zu wiederholen. Alternativ können Sie auch die Anweisungen in Kapitel 3 lesen.


### 6. ERGEBNISSE ANZEIGEN

1

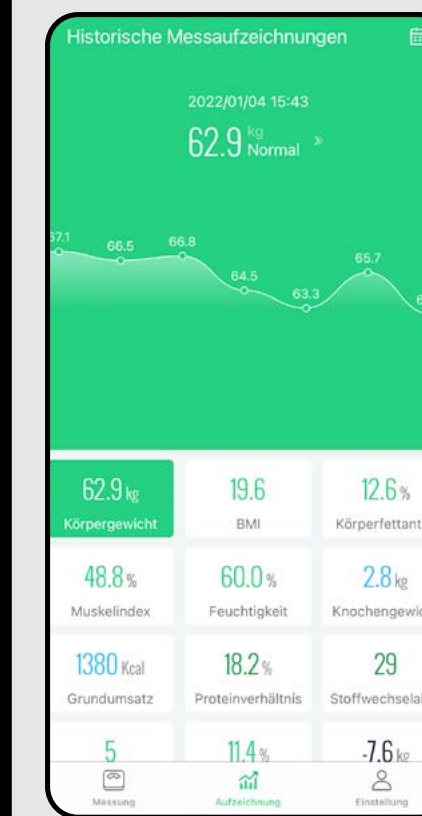

- Klicken Sie auf das Icon / Datei „**Aufzeichnung**“ in der unteren Leiste der App. Dadurch gelangen Sie zur grafischen Darstellung der Messergebnisse.
- Klicken Sie auf die einzelnen Parameter am unteren Rand der App, um deren Graphik anzuzeigen.
- Um den Kalender anzuzeigen, klicken Sie auf das Icon/ Datei in der oberen rechten Ecke oder auf das Feld mit den Messergebnissen.


2

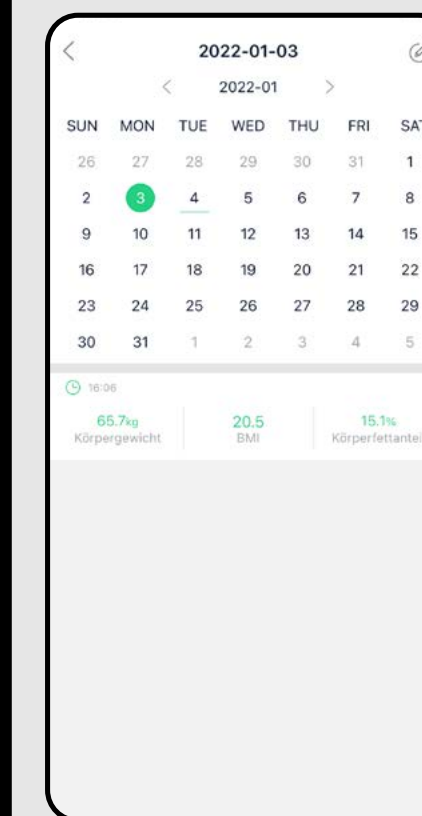

- Im Kalender sehen Sie, an welchen Tagen die Messung durchgeführt wurde. Klicken Sie auf die einzelnen Tage, um die angegebenen Messwerte unten unter dem Kalender anzuzeigen.

**Tipp:**  
Mit den Pfeilen oben, können Sie durch den Kalender blättern.

3

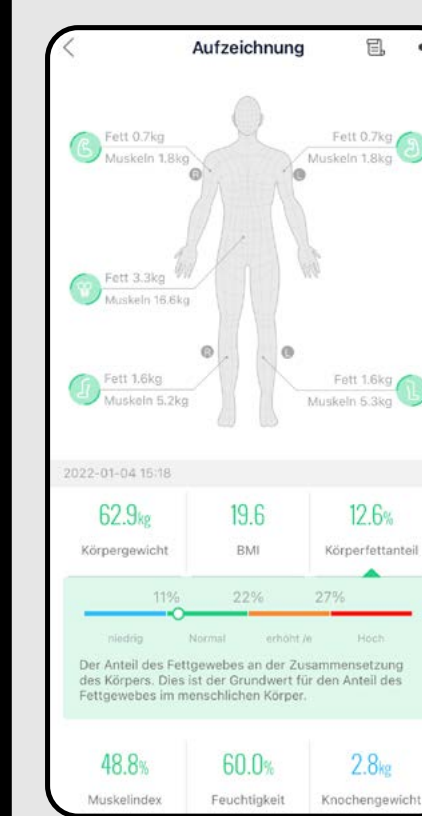


- Durch Anklicken der einzelnen Messungen sehen Sie dann folgende Aufzeichnung, die Sie dann teilen können.



### 7. EIGENE ERGEBNISSE TEILEN


Die AiLink-App bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Ergebnisse zu teilen. Im Prinzip können Sie jederzeit nur einzelne Messungen teilen. Sie können die einzelnen Freigabebildschirme aufrufen, indem Sie dem Diagramm auf dieser Seite folgen.

Sie können jedoch jederzeit einen "Screenshot" erstellen, d.h. eine Aufnahme des Bildschirm eines beliebigen Teil der Applikation, die Sie dann wie jedes andere Bild bearbeiten können.

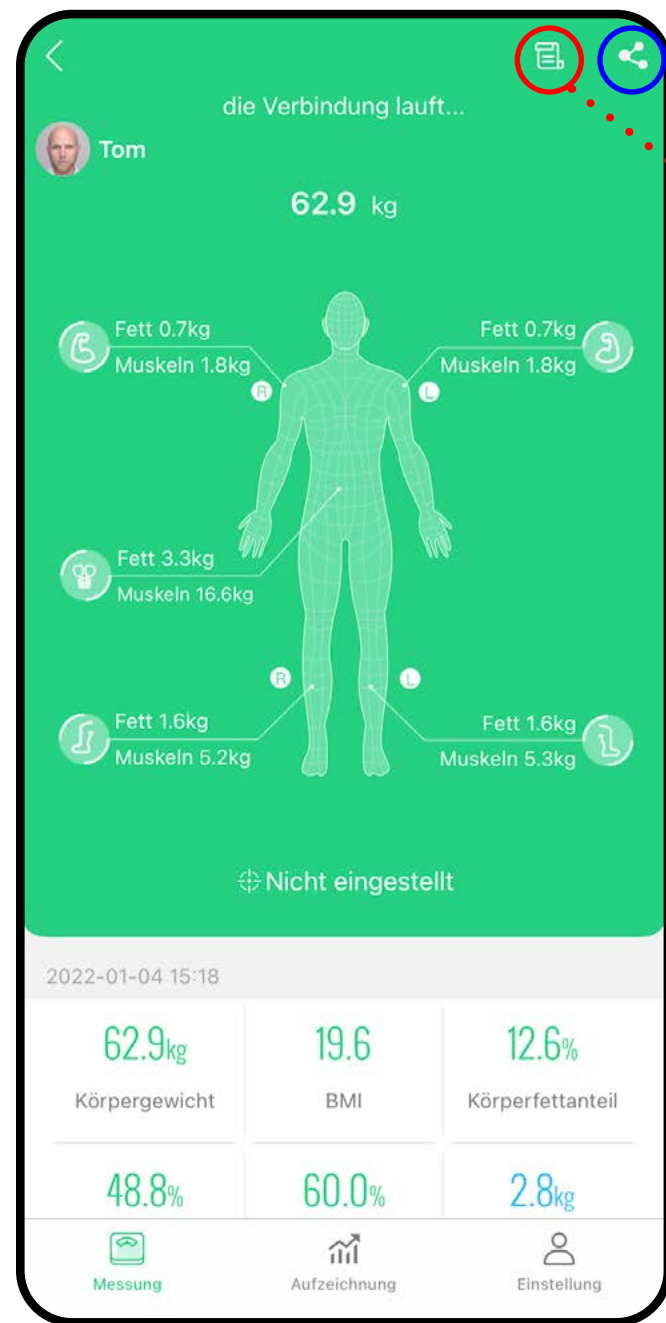


### Aufzeichnung der letzten Messung

Auf dem Grundbildschirm werden die Ergebnisse der letzten Messung angezeigt, ohne dass man durch die Historie blättern muss. So können Sie die Ergebnisse sofort nach der Messung überprüfen.

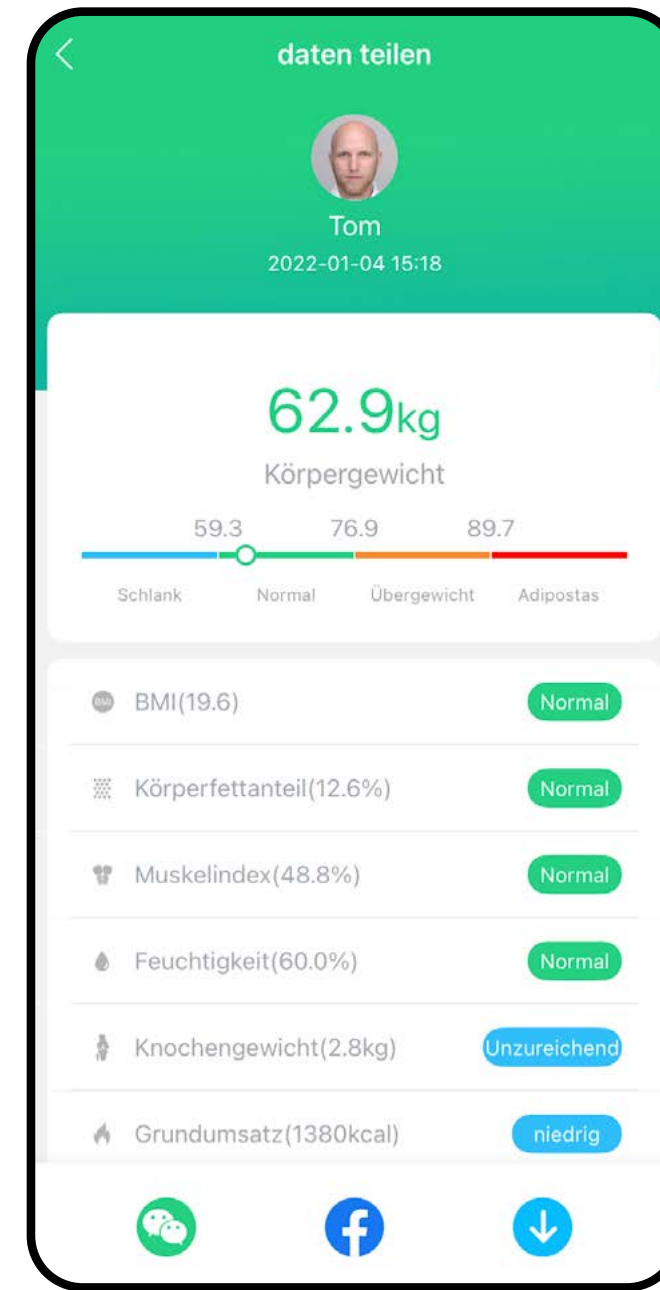

### Teilen einer bestimmten Messung

Die Grundform eines Bericht einer bestimmten Messung, der entweder direkt auf den Gerätespeicher heruntergeladen oder über verbundene soziale Netzwerke (Facebook, WeChat u.a.), über die entsprechenden Schaltflächen in der unteren Leiste teilen.

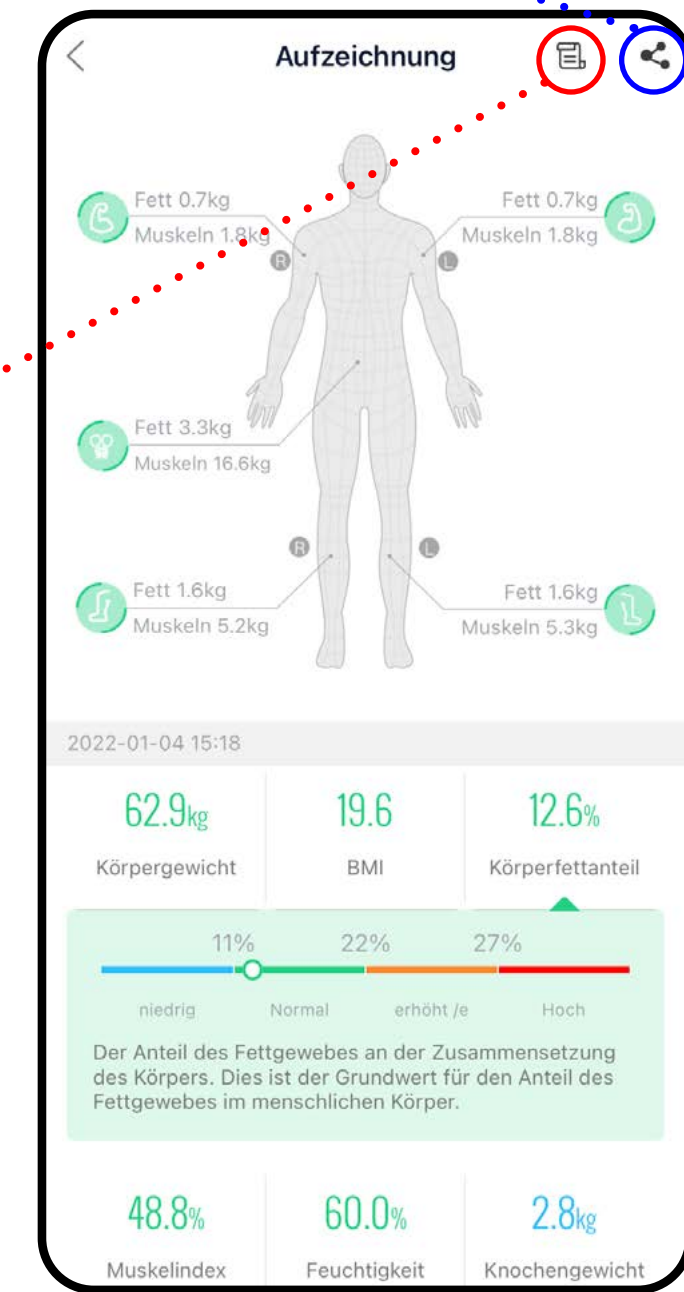

### Messung


Diese Ansicht der Aufzeichnung einer bestimmten Messung erhalten Sie im Bereich "Aufzeichnung", d.h. in der Messhistorie, wie in Kapitel 6.3 gezeigt.

### Detaillierter Messbericht

Die App erstellt einen detaillierteren Bericht, der sich auf die ausgewählte Messung bezieht. Der Bericht kann im Bildformat auf den Speicher des Gerät heruntergeladen (durch Klicken auf das Pfeilsymbol am unteren Rand des Bildschirm) und dann weiter bearbeitet werden. (Es kann jedoch nicht direkt von der App in sozialen Netzwerken geteilt werden).



### 8. FREUNDE - MESSUNGEN TEILEN

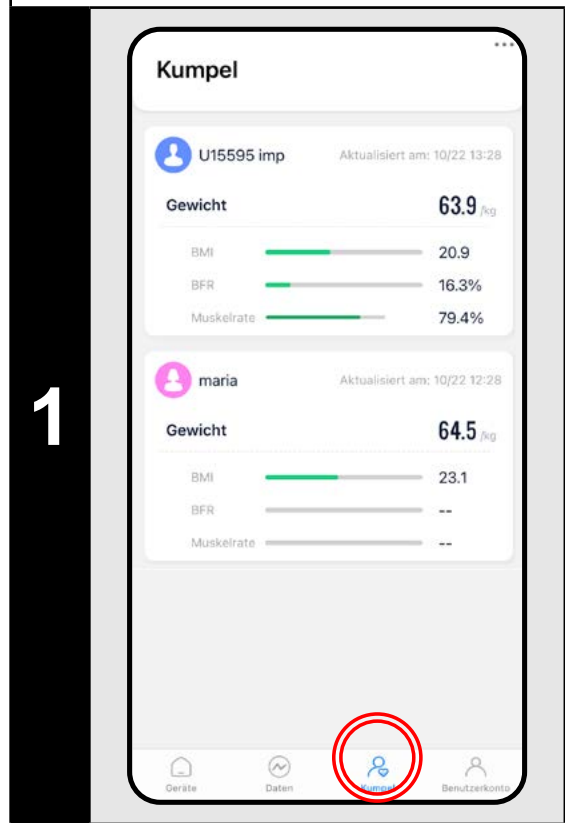


• Neben der Möglichkeit, die eigenen Ergebnisse zu teilen, bietet die App auch die Möglichkeit, AiLink-Benutzerkonten miteinander zu verknüpfen.

• Auf diese Weise können Sie die Ergebnisse der Person einsehen, mit der Sie verbunden sind und umgekehrt. Diese Person wird Ihre Ergebnisse sehen.

• **Beispiel:** In der Abbildung links können Sie sehen, dass das aktuelle Profil seine Ergebnisse mit dem Benutzer "imp" teilt. Benutzer IMP hat mehrere Profile, möchte aber nur sein Hauptprofil und das Profil des Benutzer "maria" freigeben.


1

• Um einen neuen Freund hinzuzufügen, muss eines der Konten in den Bereich „Kumpel“ gehen und auf „...“ klicken. Sie haben dann 2 Möglichkeiten:

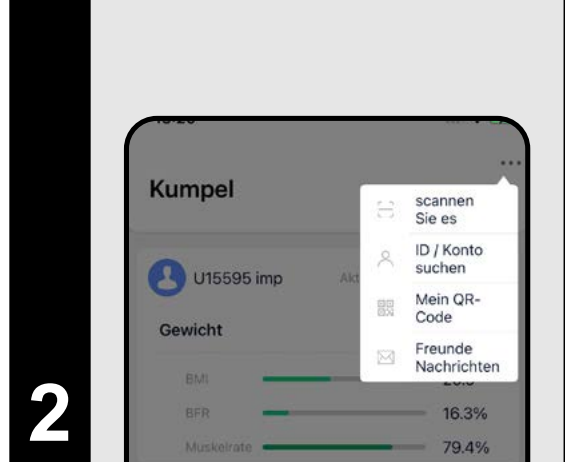

1) Mit der Option "Scannen Sie es" können Sie den QR-Code von Ihrem Telefon scannen, den Sie von dem anderen Konto erhalten, mit dem Sie Daten teilen möchten. Den QR-Code erhalten Sie, indem Sie auf dem Telefon des anderen Konto auf „Mein QR-Code“ klicken, diesen QR-Code scannen und das Teilen des Profil bestätigen.

2) Über die Option „ID / Konto suchen“ die E-Mail-Adresse des anderen Account eingeben und bestätigen.

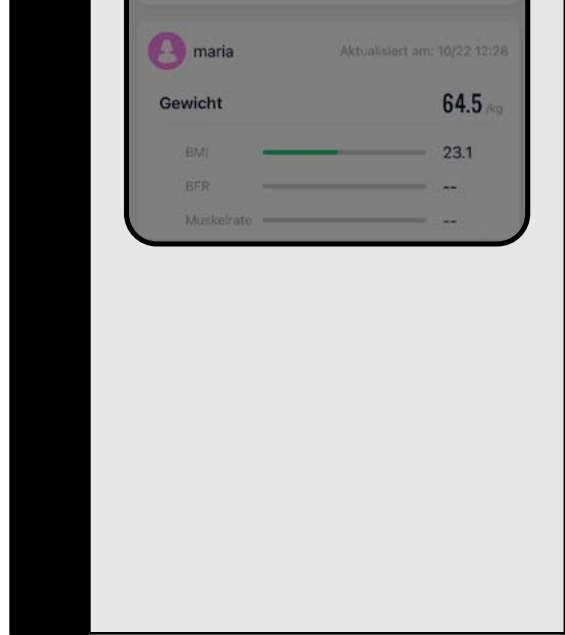

• Wenn Sie eine Anfrage an einen anderen Benutzer senden, wird dieser im Abschnitt "Kumpel" der App eine Benachrichtigung sehen und eine der angezeigten roten Markierungen (👤/👤). wird neben dem Symbol angezeigt. Wählen Sie dann "...", gehen Sie zu "Freunde Nachrichten" und bestätigen Sie Ihre Anfrage.


**Hinweis**  
Das Konto, das die Anfrage sendet und das Konto, das die Anfrage empfängt, können auswählen welche Unterprofile beim Senden / Empfangen der Anfrage mit der anderen Partei geteilt werden.

2

• Wenn Sie einige Parameter eines gemeinsam genutzten Konto ändern möchten (z.B. Kontoname, Freigabe löschen, gemeinsam genutzte Unterprofile ändern), klicken Sie auf das Profil im Abschnitt "Kumpel" und dann auf das Einstellungssymbol „⚙️“.

### 9A. EINSTELLUNGEN - ALLGEMEINER Teil

Die App ermöglicht Ihnen 2 Grundeinstellungen. Einstellungen im allgemeinen Teil der App (der für die Verwaltung aller in der App verwendeten Produkte gilt) und Einstellungen im Teil der App, der für die ETA-Waage bestimmt ist. Einige Einstellungen überschneiden sich in beiden Fällen, einige sind spezifisch.

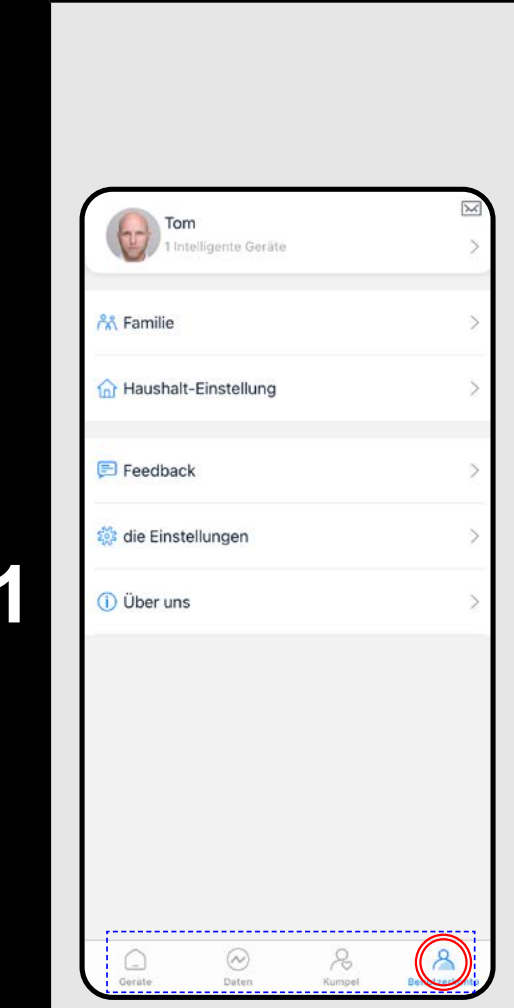

• **Im Bereich Allgemein können Sie Folgendes einstellen:**

a) **Bearbeiten Sie das Hauptprofil** (siehe 9A-2 unten)

b) **Profilverwaltung** (siehe 9A-3 unten)


c) **Haushaltverwaltung** - Verwaltung von Haushalten, Räumen und zugehörigen Produkten. Wenn Sie nur die ETA-Waage verwenden wollen, ist diese Funktion nicht erforderlich.

d) **Feedback/ Rückmeldung** - kann an die Applikationsentwickler geschrieben werden. **Verwenden Sie dieses Feld lieber nicht.** Wir empfehlen die Verwendung des Formular direkt, aus dem Anwendungsteil (siehe 9B-1)!

e) **Einstellung** - Option zum Umschalten der Anwendungssprache und zum Anzeigen der angeschlossenen Geräte.

f) **Über uns** - Zeigt die Version der App und die Möglichkeit, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der App einzusehen.


1

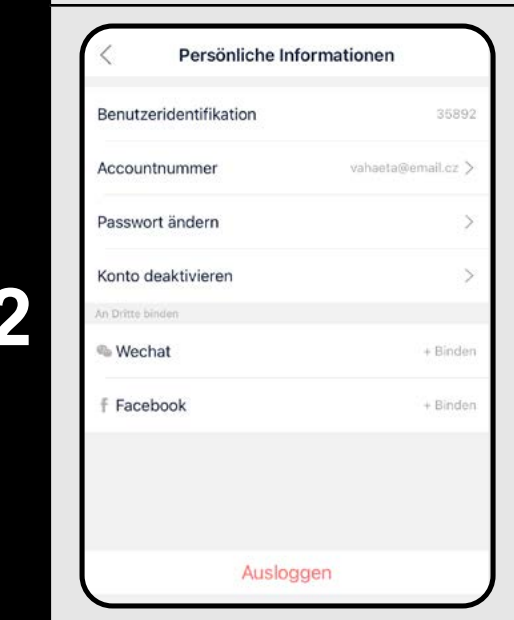

• Klicken Sie auf das Profil-Icon/ Datei (👤), um zu den Profileinstellungen zu gelangen.

• Hier können Sie Ihre Konto-ID überprüfen, Ihr Passwort ändern oder Ihr Konto deaktivieren.

• Die Optionen für die App von Drittanbietern (WeChat, Facebook u.a.), in diesem Abschnitt der App werden nur verwendet, um Sie darüber zu informieren, ob Sie über diese Dienste in Ihrem Konto eingeloggt sind.

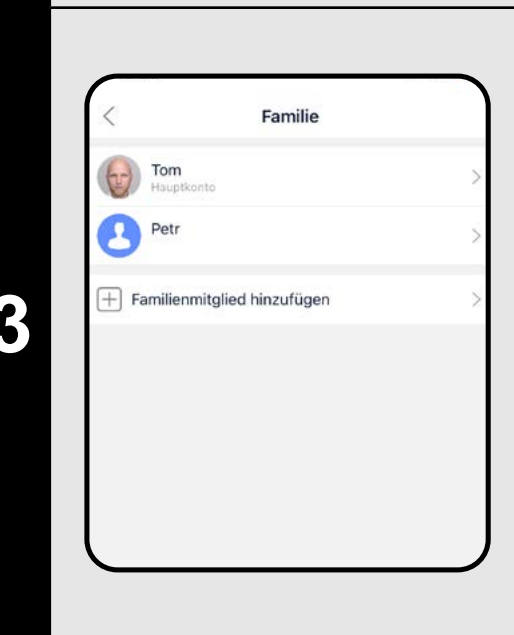


• Sektion „Familie“ ermöglicht eine einfache Verwaltung der Profile. Im Menü können Sie sowohl das Hauptprofil als auch alle erstellten Unterprofile sehen.

• Nachdem Sie auf das Profil geklickt haben, können Sie die grundlegenden Informationen (Foto, Spitzname, z.B. Geburtstag, Geschlecht u.ä.) oder auch das Profil löschen.

• Um ein neues Unterprofil zu erstellen, klicken Sie auf "Familienmitglied hinzufügen".

2

### 9B. EINSTELLUNGEN - ANWENDUNGSTEIL

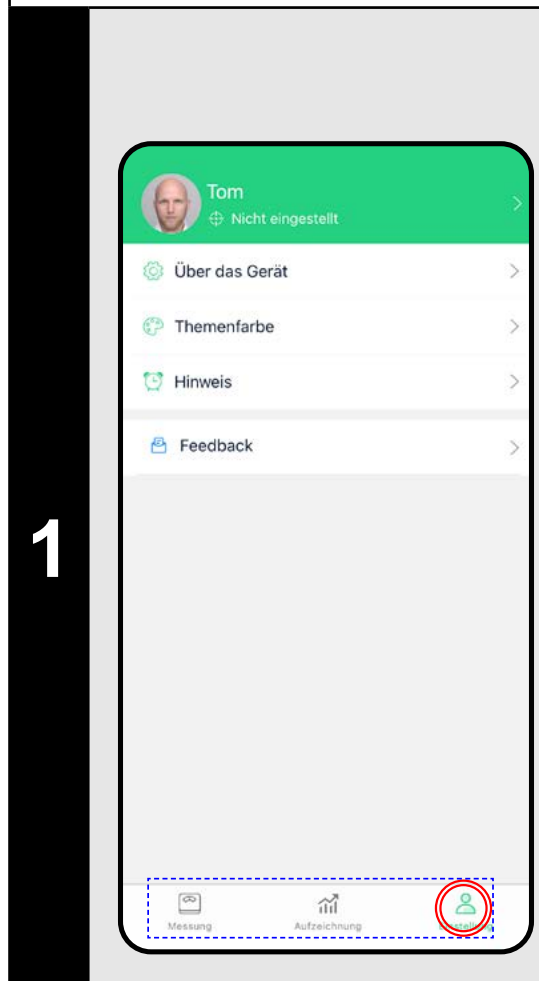

• **Im Anwendungsteil können Sie einstellen:**

a) **Profile bearbeiten** (siehe 9B-2 unten)


b) **Geräteverwaltung** (Waagen) - Möglichkeit zum Umbenennen und Löschen von Geräten, Ändern von Maßeinheiten und Firmware-Infos.

c) **Themenfarbe** - Einstellung des Farbthema der App.

d) **Notifikationen** - Alarmfunktion. Es können 3 verschiedene Erinnerungszeiten für das Wiegen eingestellt werden.

e) **Feedback/ Rückmeldung** - Kann an Anwendungsentwickler, Kommentare, Anfragen usw. geschrieben werden. **Am besten verwenden Sie diese Option** (anstatt das Feld im allgemeinen Teil der Einstellungen).

1

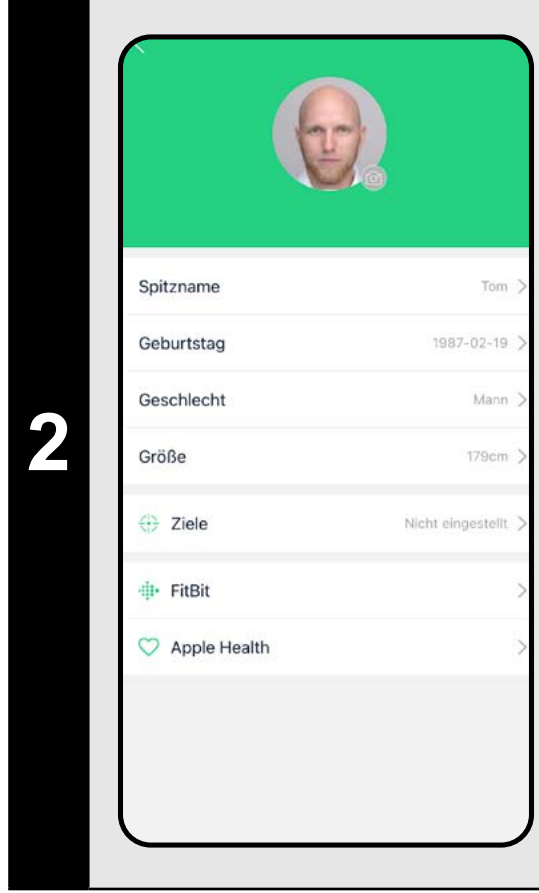

• Klicken Sie auf das Profilsymbol (👤), um zu den Profileinstellungen zu gelangen.

• Hier können Sie Ihren Spitznamen, Ihre Geburtsdaten, Ihr Geschlecht, Ihre Größe und Ihr gewünschtes Zielgewicht ändern.

• Es ist auch möglich, die App mit Apps von Drittanbietern zu koppeln, die ausgewählte von der ETA-Waage gemessene Parameter akzeptieren. Diese Apps sind FitBit und Google Fit (oder Apple Health für Nutzer von Apple-Geräten).

2



*eta*